


RÜSCH/ Dịch vụ chăm sóc Teleflex tại nhà

Ống thông dùng bóng nong vi

Teleflex®

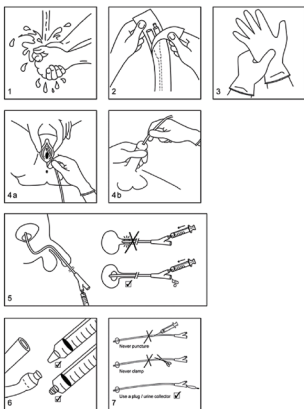

 Ống thông dùng bóng nong vi

Chỉ định

Dùng để thoát nước qua niệu đạo thông thường hoặc để thoát nước qua niệu đạo hậu phẫu và thực rửa bàng quang có giám sát y tế.

Chống chỉ định

Dị ứng nhựa cao su! Không thể vượt qua đường niệu đạo! Co hẹp niệu đạo quá mức, đặt sai.

Các biến chứng tiềm ẩn

Trong trường hợp không thể xì hơi bóng, cắt trực ống thông ở điểm rẽ đôi hoặc chọc thủng bóng theo quy trình đã thiết lập. Nếu bóng vỡ, phải lấy tất cả mảnh vỡ ra khỏi bàng quang.

Nhiễm trùng đường tiết niệu liên quan đến ống thông,

cảm giác buốt mót và thôi thúc, kích ứng niêm mạc niệu đạo và tắc ống thông do đóng cặn là các biến chứng đã ghi nhận được. Đặt ống thông không chính xác có thể gây tổn thương niệu đạo nếu bơm bóng trong niệu đạo.

RÜSCH BRILLANT, RÜSCH BRILLANT ProfilCath, RÜSCH BRILLANT AquaFlate / BRILLANT Plus AquaFlate, RÜSCH BRILLANT ProfilCath AquaFlate / ProfilCath Plus AquaFlate

Các ống thông này được làm bằng silicon. Chỉ sử dụng nước tiết trùng hoặc dung dịch tiết trùng glycerine 10% để bơm bóng.

Chỉ sử dụng ống tiêm đã làm đầy để bơm bóng, không dùng để tiêm! Không sử dụng chất bôi trơn gốc silicon cho ống thông silicon! Do có thể xảy ra khuếch tán, chúng tôi khuyến cáo nên kiểm tra thể tích bóng đã bơm nước tiết trùng ít nhất mỗi tuần một lần.

Ống thông silicon RÜSCH ProfilCath dành cho bàng quang thay thế bằng ruột

Các ống thông này dùng để thoát nước tiểu hậu phẫu sau khi phẫu thuật chuyển lưu nước tiểu có kiểm chế vào túi bao hoặc bàng quang thay thế bằng ruột.

RÜSCH Gold / Gold Plus, RÜSCH SympaCath, RÜSCH Amber, RÜSCH SiLaSil / SiLaSil Plus

Các sản phẩm này được làm bằng mủ cao su tự nhiên, có thể gây ra phản ứng dị ứng! Không sử dụng chất bôi trơn gốc dầu! Chỉ sử dụng nước tiết trùng để bơm bóng!

RÜSCH SympaCath được phủ lớp thấm nước.

Nên làm ướt bằng dung dịch muối sinh lý vô trùng hoặc nước tiết trùng trước khi dùng.

Ống thông cho bệnh nhi

Một số ống thông cho bệnh nhi có chứa que thăm để thuận tiện cho việc đặt ống. Đảm bảo đặt đầu que thăm đúng cách trong đầu ống thông và không nhô ra khỏi lỗ ống thông trong quá trình đặt ống. Rút que thăm sau khi đã đặt ống thông đúng vị trí trước khi bơm bóng. Cho que thăm vào trở lại có thể làm thủng và nhô ra khỏi ống thông, gây thương tích niệu đạo. Có thể khó rút que thăm nếu trực ống thông bị cong hoặc xoắn!

Khuyến nghị

Kiểm tra ống thông bằng mắt xem có hư hỏng cơ học không và kiểm tra có rò rỉ không trước khi sử dụng.

Rút ống thông có bóng £ 40 ml:
Bơm phồng lại bóng đã xì hơi hoàn toàn bằng 2 ml không khí để tránh nếp gấp bóng đầu xa có thể gây đau đớn hoặc tổn thương niệu đạo khi rút ra.

Cảnh báo

Không bơm bóng căng quá mức!
Hút quá mức có thể làm xẹp nòng bơm.
Chỉ đảm bảo vô trùng nếu bao bì chưa bị mở và chưa bị hư hại.

⊗ Sử dụng một lần: Không tái sử dụng, tái xử lý hoặc tái tiết trùng. Tái sử dụng thiết bị có thể gây nguy cơ nhiễm trùng và/hoặc chấn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Việc tái xử lý các sản phẩm được chủ định chỉ sử dụng một lần có thể làm giảm hiệu quả hoặc không có tác dụng.

Hướng dẫn bảo quản:

Tránh xa ánh nắng mặt trời và giữ khô ráo. Không sử dụng nếu hàng rào tiết trùng sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm bị hư hại.

REF	Số Catalog
SIZE	Kích cỡ sản phẩm
QTY	Số lượng, Số khoản mục mục
O.D.	Đường kính ngoài
Ch.	1 Ch. = 1/3 mm
Length	Chiều dài ống thông
Tip	Đầu ống thông
LOT	Mã lô
	Ngày sản xuất
	Hạn sử dụng
STERILE EO	Đã tiệt trùng bằng etylen oxit
STERILE R	Được tiệt trùng bằng bức xạ
	Nhà sản xuất
EC REP	Đại diện được ủy quyền tại châu Âu
	Thận trọng, Chú ý, Quan trọng, Ghi chú
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng
	Không tái sử dụng
	Không tiệt trùng lại
	Không làm từ mủ cao su tự nhiên
	Sản phẩm này chứa mủ cao su tự nhiên
	Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hại
	Bảo quản nơi khô ráo
	Tránh ánh nắng mặt trời
Never puncture	Tuyệt đối không được chọc thủng
Never clamp	Tuyệt đối không được kẹp
Use a plug / urine collector	Sử dụng túi thu thập nước tiểu / có nút

www.Teleflex.com

CE 0124



Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kamunting, Perak, Malaysia
Sản xuất tại Malaysia

EC REP

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ai-len

IUR009VI-R01

10 16
2016-10



Teleflex®