



Weck
Auto Endo5
 Automatische Clip-Zange

Noch größere Sicherheit

Die Weck Auto Endo5 automatische Clip-Zange schenkt Ihnen noch mehr Sicherheit bei dem zuverlässigen Ligaturverschluss dank des Weck Hem-o-lok Polymer-Ligaturclips. Das innovative Ladesystem der Clips in den Applikatoren sorgt für eine noch zuverlässigere Positionierung der Clips bei der Applikation und einen verbesserten Cliphalt auf der gewählten Struktur.

Sicher verriegelnde Clip-Technologie

Im Vergleich zu führenden Konkurrenzprodukten bieten die Hem-o-lok Clips beispiellose Sicherheit* dank des integrierten gezahnten und firmeneigenen distalen Verriegelungsmechanismus. Der M/L-Clip verfügt über eine Clipöffnung von 4,9 mm und bei geschlossenem Clip über eine Länge von 9,2 mm.

Verfahrensflexibilität

Mit ihrem ergonomischen Design, dem längeren Schaft und den 15 Hem-o-lok M/L-Clips – den einzigen, für die Ligatur von Gefäßen oder Gewebestrukturen von bis zu 10 mm durch einen 5-mm-Zugang – erhöht die Auto Endo5 Clip-Zange ihr Einsatzspektrum.

Vorteile



Der Anwender im OP

Beispiellose Clipsicherheit im Vergleich zu führenden Konkurrenzprodukten* des Hem-o-lok Clips dank integrierter Zähnchen sowie distalem Verriegelungsmechanismus.



Ihre Einrichtung


Möglichkeiten der Kosteneinsparung im Vergleich zu führenden Auto Endo 5 mm Metall-Clip-Zangen.



Der Patient

Flexible Clippelenke zur Ligatur von Strukturen bis zu 10 mm durch einen 5-mm-Zugang tragen zur Minimierung des Traumas beim Patienten bei.

Eigenschaften der Weck Auto Endo5 Automatischen Clip-Zange

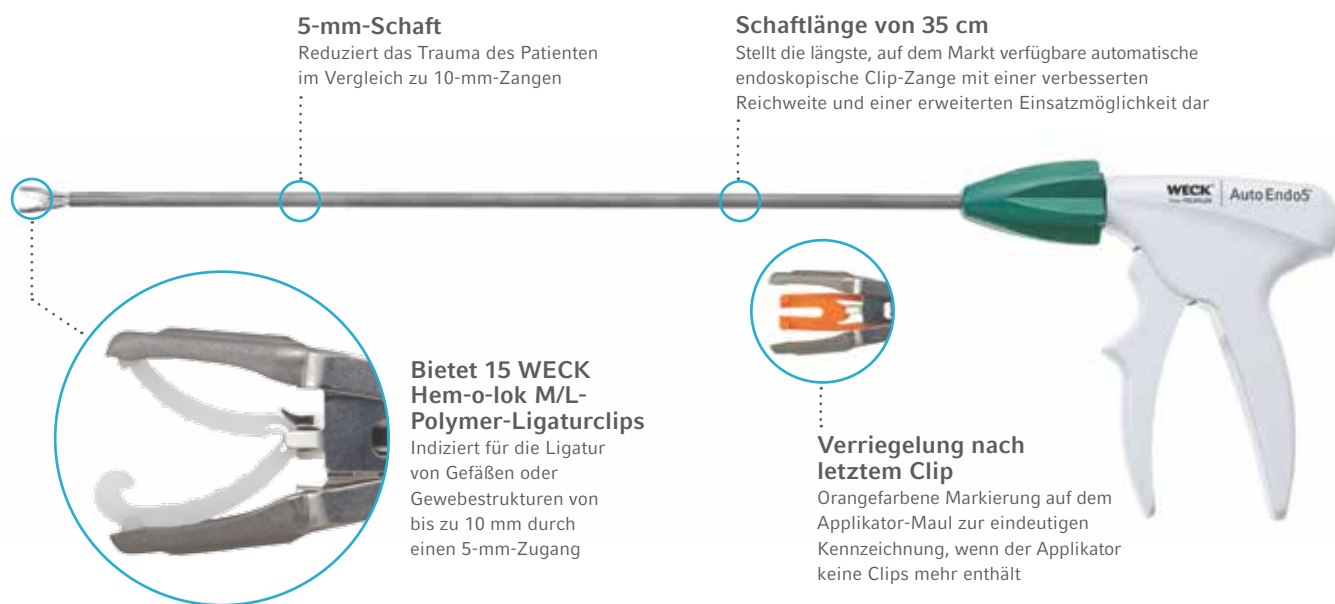

Eigenschaften des Weck Hem-o-lok Clips

Integrierte Zähne speziell entwickelt, um durch eine 360°-Drehung jedes Verrutschen des Clips zu vermeiden

Verriegelungsmechanismus bietet Sicherheit durch fühlbaren und hörbaren Verschluss

Drei Kontaktpunkte im Applikator-Maul bieten verbesserte Stabilität

Flexibles Gelenk ermöglicht eine Ligatur von Strukturen von bis zu 10 mm durch einen 5-mm-Zugang


Bogenform für eine problemlose Entfernung durch ein entsprechendes Instrument

Produktinformationen

REF.	PRODUKTBESCHREIBUNG	VE
AE05ML	Weck Auto Endo5 5 mm automatische endoskopische 35 cm Clip-Zange	3
544121T	Weck Hem-o-lok wiederverwendbares endoskopisches und zerlegbares Instrument zur Clipentfernung	1

Geeignet für folgende Fachbereiche

- Allgemeinmedizin
- Gynäkologie
- Thoraxchirurgie
- Bariatrische Chirurgie
- Pädiatrie
- Herzchirurgie
- Kolorektale Chirurgie
- Urologie
- HNO

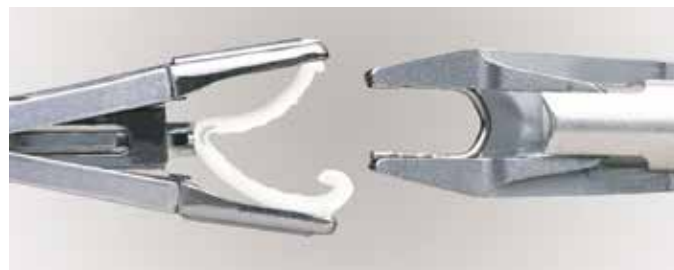

Mit der großen Distalöffnung des Hem-o-lok Clips sowie dessen Polymerflexibilität ist die Auto Endo5 Clip-Zange für die Ligatur größerer Strukturen als mit vergleichbaren 5-mm-Metall-Clip-Zangen geeignet.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Chirurgie-Vertriebsspezialisten von Teleflex.

Ihre Bestellung können Sie bei unserem Kundendienst unter 0049 7151 406 0 aufgeben.

Nicht nur ein Clip – ein echter Verschluss.

*Vorliegende Daten (interne Studie aus dem Jahr 2013), Teleflex Incorporated, Report #D001591. Basierend auf ex-vivo-Tests von drei Fehlermodi der Clips beim Einsatz auf Schweineschlagadern: $p = 33$, $p \leq 0,05$. Informationen zur klinischen Leistungsfähigkeit können aus diesen Daten nicht abgeleitet werden. Test-Druckbereich jenseits physiologischen Druckwerten. Der Weck Hem-o-lok Medium/Large Clip wurde verglichen mit Ethicon LIGAMAX 5, Ethicon 10 mm LIGACLIP und Covidien Endo Clip III. Der Weck Hem-o-lok Large Clip wurde verglichen mit Ethicon 12 mm LIGACLIP und Covidien Endo Clip. Die Hem-o-lok Ligatur Clips sind für den Einsatz bei einer kontrazeptiven Eileiter-Tubenkoagulation sowie der Ligatur der renalen Arterie während einer laparoskopischen Spendernephrektomie kontraindiziert.

Ethicon, LIGACLIP und LIGAMAX 5 sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Johnson & Johnson. Covidien und Endo Clip sind eingetragene Warenzeichen von Covidien. Teleflex, das Teleflex Logo, Endo5, Hem-o-lok und Weck sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (02/2017). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. ©2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. 94 30 54-00 00 00 REV A 02 17 02