



Weck
Auto Endo5
 Applicateur de clips automatique

Une plus grande confiance

L'applicateur de clips automatique Weck Auto Endo5 garantit une occlusion totalement sûre grâce à ses clips de ligature en polymère Weck Hem-o-lok et accroît ainsi votre confiance. De par son design innovant, chaque clip reste parfaitement positionné dans les mors de l'applicateur durant l'application et la tenue du clip sur la structure choisie est améliorée.

Une technologie de verrouillage des clips totalement sûre

Les clips Hem-o-lok offrent une sécurité de ligature inégalée, comparativement aux principaux produits concurrents,* grâce à leur face interne crantée et à leur mécanisme de verrouillage distal breveté. Le clip M/L présente un profil ouvert de 4,9 mm et une longueur de 9,2 mm en position fermée.

Flexibilité interventionnelle

Avec son design ergonomique, son tube plus long et ses 15 clips Hem-o-lok de taille M/L – les seuls clips indiqués pour ligaturer des structures vasculaires ou tissulaires jusqu'à 10 mm à travers un trocart de 5 mm – l'applicateur de clips Auto Endo5 accroît la flexibilité interventionnelle.

Avantages



Le chirurgien

Avec leur face interne crantée et leur mécanisme de verrouillage distal, les clips Hem-o-lok garantissent une sécurité de ligature inégalée, comparativement aux principaux produits concurrents.*



Votre établissement


Comparé aux principaux applicateurs de clips métalliques du marché auto endo 5 mm permet de réaliser des économies potentielles.



Le patient

La charnière flexible du clip permet de ligaturer des structures jusqu'à 10 mm à travers un trocart de 5 mm et minimise ainsi les traumatismes du patient.

Caractéristiques de l'applicateur de clips automatique Weck Auto Endo5

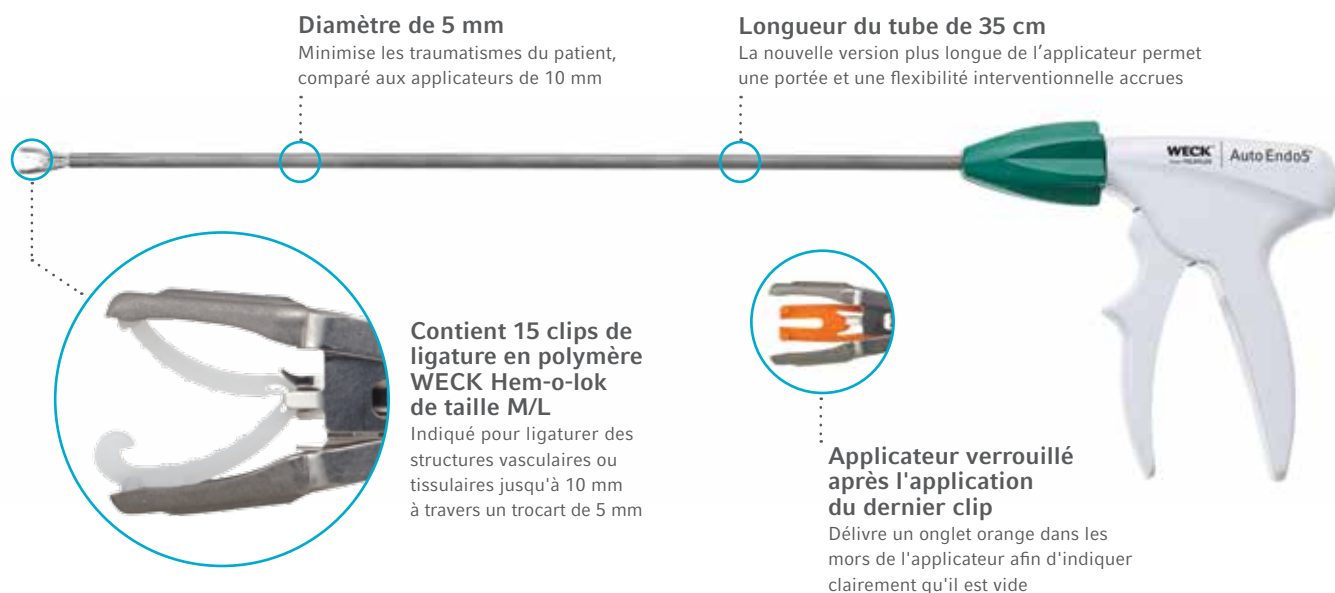

Caractéristiques du clip Weck Hem-o-lok

Rainures intégrées

conçues pour prévenir tout glissement et garantir une préhension à 360° totalement fiable

Mécanisme de verrouillage

garantissant une fermeture totalement sûre avec une rétroaction tactile et sonore

Trois points de contact

dans les mors de l'applicateur pour une meilleure stabilité

Charnière flexible


permettant de ligaturer des structures jusqu'à 10 mm à travers un trocart de 5 mm

Forme arquée facilitant

le retrait avec un instrument approprié

Informations sur le produit

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION DU PRODUIT	QUANTITÉ/UNITÉ
AE05ML	Applicateur de clips 35 cm endoscopique automatique 5 mm Weck Auto Endo5	3
WK544121T	Extracteur de clips endoscopique réutilisable et démontable Weck Hem-o-lok	1

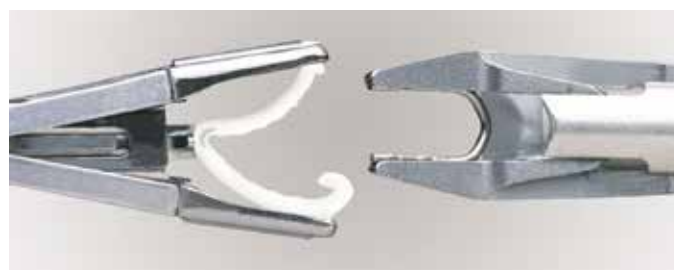

Avec les clips Hem-o-lok en polymère se distinguant par leur large ouverture distale et leur flexibilité, l'applicateur de clips Auto Endo5 est indiqué pour ligaturer des structures plus grandes que les applicateurs de clips métalliques 5 mm.

Spécialités applicables

- Chirurgie générale
- Chirurgie gynécologique
- Chirurgie thoracique
- Chirurgie bariatrique
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie cardiaque
- Chirurgie colorectale
- Chirurgie urologique
- Chirurgie ORL

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage.

L'applicateur de clips réf. AE05ML est un dispositif médical de classe III. Organisme notifié: SGS- CE 0120. Fabricant: Teleflex Medical US. L'extracteur de clip réf. WK544121T est un dispositif médical de classe I (auto-déclaration). Fabricant: Teleflex Medical USA.

Ne vous contentez pas de clipper, verrouillez.

*Données internes (étude interne 2013), Teleflex Incorporated, Rapport #D001591. Basées sur des tests ex-vivo portant sur trois modes de défaillance de clips communs menés sur des carotides porcines, taille de l'échantillon = 33, $p \leq 0,05$. Aucune performance clinique ne peut être extrapolée à partir de ces données. Les pressions de test sont supérieures aux pressions physiologiques. Le clip moyen/grand Weck Hem-o-lok a été comparé aux clips Ethicon LIGAMAX 5, Ethicon 10 mm LIGACLIP et Covidien Endo Clip III. Le grand clip Weck Hem-o-lok a été comparé aux clips Ethicon 12 mm LIGACLIP et Covidien Endo Clip. Les clips de ligature Hem-o-lok sont contre-indiqués dans la ligature des trompes de Fallope à des fins contraceptives ainsi que dans la ligature de l'artère rénale dans le cadre d'une néphrectomie laparoscopique sur donneur.

Ethicon, LIGACLIP, et LIGAMAX 5 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Johnson & Johnson. Covidien et Endo Clip sont des marques déposées de Covidien. Teleflex, le logo Teleflex, Endo5, Hem-o-lok, et Weck sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales immatriculées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document ne se substituent en aucun cas au mode d'emploi du produit. Les produits dans le catalogue peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter le représentant de votre pays. Toutes les données sont à jour au moment de l'impression (02/2017). Susceptible de modifications techniques sans préavis.

©2017 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. 94 30 54-00 00 02 REV A 02 17 01.2

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Teleflex responsable des ventes de dispositifs chirurgicaux.

Pour passer commande, veuillez contacter le Service Clientèle au 05 62 18 79 40.

Distribué par : Siège social international de Teleflex, Irlande · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

France Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com

Belgique Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com

Suisse Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

www.teleflex.com

Teleflex