

Trach-Vent® Gibeck – le nez artificiel « original »

Trach-Vent® et Trach-Vent®+ sont synonymes d'une excellente humidification spécialement conçue pour les patients trachéotomisés en respiration spontanée.

Avec un poids de seulement 4 et 6 g, ces deux ECH sont très légers. Ils ont un espace mort de seulement 10 ml et peuvent être utilisés par les adultes ainsi que les enfants.

Trach-Vent®

Trach-Vent® est utilisé depuis plus de 30 ans par les hôpitaux et cliniques. La combinaison de son excellente humidification, de sa petite taille et de sa discrétion font de lui le produit idéal pour adultes et enfants en réanimation, ORL et en hospitalisation à domicile.

Oxy-Vent®

Disponible avec ou sans tubulure, il se connecte très facilement au Trach-Vent® et fournit un apport d'oxygène de plus de 50%.

Support Trach-Vent®

Il réduit le traumatisme que représente le changement du Trach-Vent® spécialement dans le cas d'une hospitalisation à domicile.

Trach-Vent®+



Les sites pour aspiration et apport d'oxygène humidifié intégrés font du Trach-Vent®+ le choix optimal pour les adultes et les enfants en réanimation.

EN BREF

Trach-Vent®, Trach-Vent®+

- petit, compact, faible espace mort, léger
- grande efficacité d'humidification (également lors d'apport d'oxygène)
- connecteurs ISO
- pour adultes et enfants
- usage unique
- sans latex


INFORMATION PRODUIT

	Trach-Vent®	Trach-Vent®+
		
Réf. stérile propre	41 111 41 112	41 311 41 312
Espace mort	10 ml	10 ml
Poids	4 g	6,3 g
Connecteurs	15 mm connecteur standard, ISO 5356-1	15 mm connecteur standard, ISO 5356-1
Membrane	papier Microwell bactériostatique et hygroscopique	papier Microwell bactériostatique et hygroscopique
Résistance au débit	à 30 l/min., 0,25 cm H ₂ O	à 30 l/min., 0,25 cm H ₂ O
Perte d'eau	9,5 mg H ₂ O/l à V _T 500 ml	9,5 mg H ₂ O/l à V _T 500 ml
Capacité d'humidification	27 mg H ₂ O/l à V _T 500 ml	27 mg H ₂ O/l à V _T 500 ml
Qty (box / case)	500 / 50	500 / 50

ACCESSOIRES / SETS

Réf.	Désignation	Qté.
49 912	Oxy-Vent®	20
45 512	Oxy-Vent® avec tubulure	10
45 612	Oxy-Tube®, tubulure à oxygène 210 cm, propre	10
61 112	Support Trach-Vent®	30
41 172	Kit de démarrage Trach-Vent®, 3 Trach-Vent® ECH, 1 support Trach-Vent®, 1 Oxy-Vent® avec tubulure	6
41 322	Trach-Vent®+ avec Oxy-Tube®, propre	10

Trach-Vent® Kit de démarrage

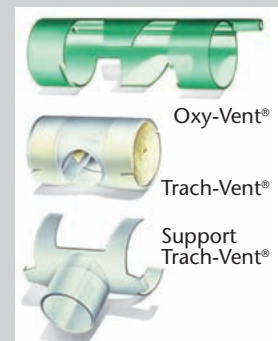

Trach-Vent® + avec Oxy-Tube®

