



LMA Protector Airway

Révolutionne l'accès aux voies respiratoires

LMA Protector Airway est le système pour voies respiratoires de seconde génération le plus avancé de Teleflex.

Double canal gastrique

Le seul masque laryngé combinant une chambre pharyngée et un double canal de drainage gastrique, spécialement conçu pour évacuer le contenu gastrique des voies respiratoires.

Silicone

La sonde et le coussinet pour voies respiratoires sont 100 % silicone, sans phtalate et conçus pour s'adapter parfaitement à l'anatomie. Il a été démontré que les coussinets en silicone réduisent le risque de maux de gorge¹ et permettent d'atteindre des pressions d'étanchéité plus élevées.²

Technologie Cuff Pilot

Un indicateur de pression du coussinet intégré destiné aux dispositifs de gestion des voies respiratoires à usage unique permettant une surveillance continue de la pression du coussinet et garantissant un réglage facile et précis, si nécessaire.³

Technologie Second Seal

Le coussinet allongé facilite l'obturation de la partie supérieure de l'œsophage.

Intubation facilitée

Permet une intubation directe sous contrôle visuel.

Avantages



Le médecin

Excellentes pressions d'étanchéité, double canal gastrique et surveillance continue de la pression du coussinet pour une confiance totale.



Votre établissement


Système contribuant à la réduction des complications liées aux voies respiratoires et à l'amélioration de l'efficacité des procédures.



Le patient

Coussinet en silicone sans phtalate garantissant un confort optimal au patient.

LMA Protector Airway doté de la technologie Cuff Pilot

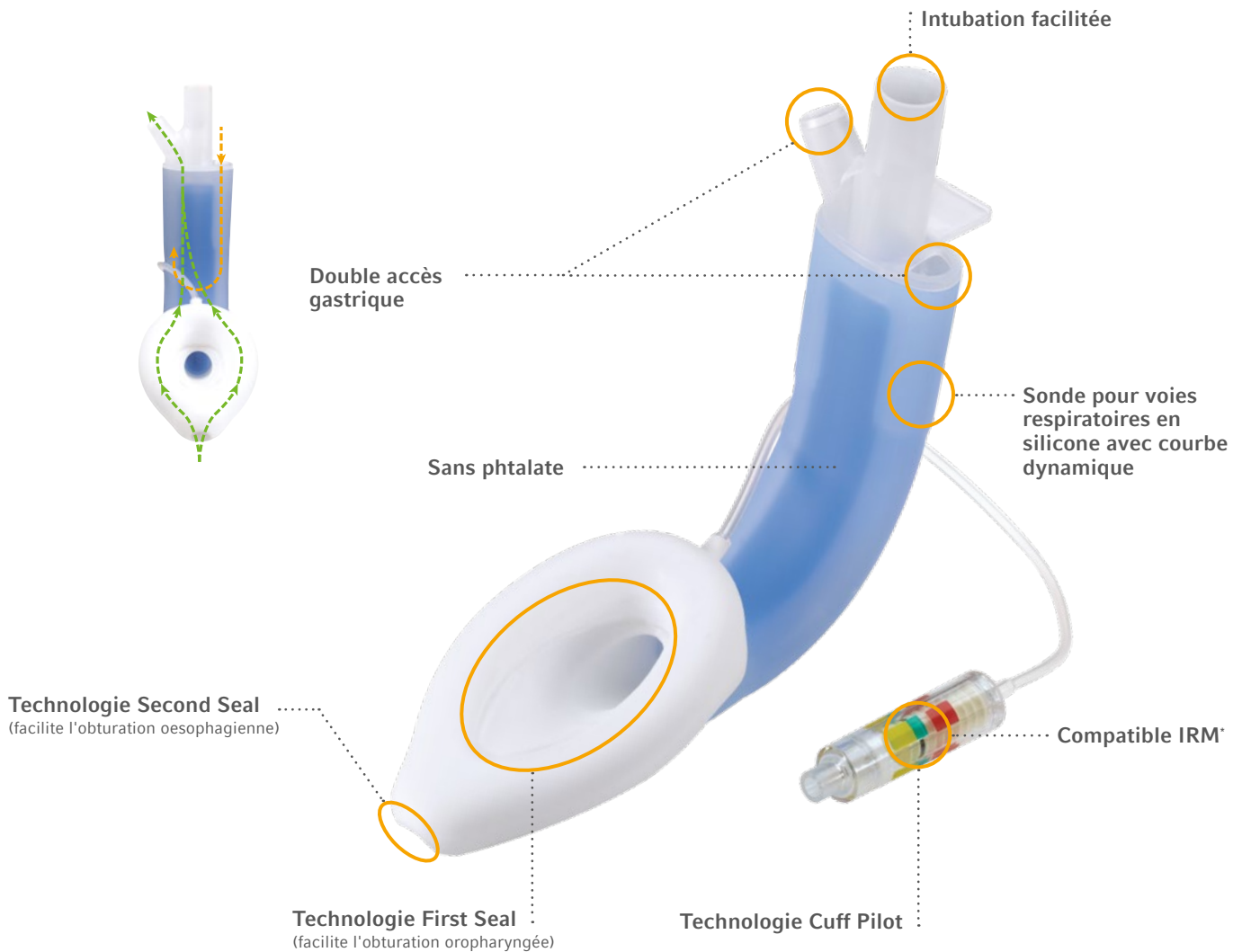

LMA Protector Airway

RÉFÉRENCE AVEC TECHNOLOGIE CUFF PILOT	RÉFÉRENCE AVEC BALLONNET PILOT	TAILLE DU MASQUE	POIDS DU PATIENT	PRESSION INTERNE MAXIMALE**	D.I. MAXIMAL DE LA SONDE ENDOTRACHÉALE (MM)	PLUS GRANDE TAILLES DE SONDE ORO-GASTRIQUE OG
192030	195030	3	30-50 kg	60 cm H ₂ O	6,5	16 Fr
192040	195040	4	50-70 kg	60 cm H ₂ O	7,5	18 Fr
192050	195050	5	70-100 kg	60 cm H ₂ O	7,5	18 Fr

SE=SONDE ENDOTRACHÉALE | OG=SONDE OROGASTRIQUE

* LMA Protector Airway uniquement avec technologie Cuff Pilot.

** Il est recommandé de ne pas gonfler le coussinet à une pression interne supérieure à 60 cm H₂O.

Références :

1. William A, Chambers NA, Erb T.O, Ungern-Sternberg BS. Incidence of sore throat in children following use of flexible laryngeal mask airways – impact of an introducer device. *Pediatric Anesthesia*. 2010; 839-843. [Pubmed: 20716076].
2. Jagannathan N, Sohn LE, Sawardekar A, Gordone J, Langen KE, Anderson K. A randomized comparison of the LMA Supreme and LMA ProSeal in children. *Anaesthesia*. 2012; 67:632-639. [Pubmed: 22420717].
3. E.Bick, I. Bailes, A.Patel, A.I.J.Brain Editorial: Fewer sore throats and a better seal: why routine manometry for laryngeal mask airways must become the standard of care *Anaesthesia* 2014, 69, 1299-1313.



www.lmaco.com

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Classe du Dispositif Médical : IIa Organisme notifié: BSI CE0086 Fabricant du D. M. : Teleflex Medical Athlone Irlande

94 08 37 - 00 00 02 - REV A - 07 16 02.2 Teleflex, Cuff Pilot, First Seal, LMA, LMA ProSeal, LMA Protector, LMA Supreme et Second Seal sont des marques commerciales ou déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les informations incluses dans le présent document ne sauraient se substituer à la notice du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Données en cours de validité à la date d'impression (07/2016). Susceptible de modifications techniques sans préavis. © 2016 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés.

Teleflex

Distribué par : Siège social international de Teleflex, Irlande · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
 Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.int@teleflex.com
 France Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com
 Belgique Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com
 Suisse Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com