



LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada)

Un dispositivo de primera generación con tubo precurvado que maximiza el éxito de la inserción

- ▶ Disponible en 3 tamaños para adultos
- ▶ El balón de silicona permite una inserción suave
- ▶ Estéril, de un solo uso
- ▶ Facilita un suave despertar de la anestesia
- ▶ Barras epiglóticas diseñadas para evitar el bloqueo de la vía respiratoria por la epiglotis
- ▶ Gracias al suave balón, se garantiza la mínima presión en la mucosa y un buen sellado
- ▶ El balón piloto se utiliza para indicar el grado preciso de inflado
- ▶ Marcas de profundidad para controlar la posición correcta
- ▶ RM compatible
- ▶ Sin látex de caucho natural

First Seal™ (Sellado orofaríngeo)

LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada) ofrece presiones de sellado orofaríngeo de hasta 20 cm H₂O.

El First Seal™ (sellado orofaríngeo) es importante para:

- ▶ La eficacia de la ventilación
- ▶ Usos avanzados del producto, como es el caso de pacientes con la función torácica disminuida, pacientes con obesidad media y moderada, así como en determinados procedimientos que se precisa ventilación mecánica y en los que se requieren presiones de sellado más elevadas



LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada): Especificaciones

	Tamaño		
	3	4	5
Conector del tubo	15M (ISO 5356-1)		
Válvula de inflado	Conexión Luer (ISO 594-1)		
Volumen interno de la vía respiratoria	19 ml	19 ml	27 ml
Caída de presión	< 1,6 cm H ₂ O a 60 l/min	< 1,6 cm H ₂ O a 60 l/min	< 1,6 cm H ₂ O a 60 l/min
Abertura mín. interdental	29 mm	30 mm	34 mm
Vía interna	22,0 cm	22,0 cm	24,0 cm


LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada): Especificaciones del producto

Tamaño de la mascarilla	Código de producto	Tamaño del paciente	Volumen máximo del balón (aire)*
3	145030	Adultos de 30 a 50 kg	20 ml
4	145040	Adultos de 50 a 70 kg	30 ml
5	145050	Adultos de 70 a 100 kg	40 ml

*Volúmenes máximos que nunca deben ser superados. Se recomienda inflar el balón a un máximo de 60 cm H₂O de presión.



Distribuido por:

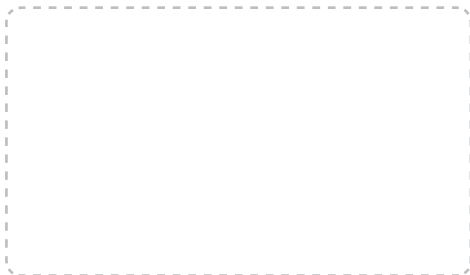

RBK-0504-000 B ES 201502

SEDE INTERNACIONAL DE TELEFLEX, IRLANDA
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Irlanda
Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73
info.es@teleflex.com



Fabricado por:
The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles



Consulte las instrucciones de uso en esta página web: www.LMACO.com

Teleflex www.teleflex.com LMA www.lmaco.com

Copyright © 2014 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. LMA, LMA SureSeal PreCurved, First Seal y LMA Better by Design son marcas registradas o marcas comerciales de Teleflex Incorporated o de sus filiales.

94 07 20 - 00 00 03 - REV B · LMA / SF · 07 15 01

Bibliografía:

1. Van Zundert A., Brimacombe J. Anaesthesia 2008; **63**: 202-213.



Evidencia clínica



Para acceder a la última evidencia clínica sobre LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada)

www.lmaco.com/evidence



Para acceder a los últimos informes digitales, vídeos educativos y testimonios clínicos

www.youtube.com/LaryngealMaskAirway



Para conocer las últimas noticias de LMA

www.facebook.com/LMAInternational



Better by Design



Para obtener información del producto y acceso a las instrucciones de uso del producto

www.lmaco.com



Para obtener más información sobre otros productos de la cartera de Teleflex

www.teleflex.com