

Sets pour cathétérisation artérielle

TECHNIQUE DE SELDINGER



POSITIONNEMENT FACILE ET PRÉCIS DE L'AIGUILLE



- ▶ Cette aiguille à frottement réduit et à biseau amélioré s'insère facilement sans forcer.
- ▶ Permet de mieux contrôler le positionnement de l'aiguille dans le vaisseau.

SET AVEC EXTENSION



- ▶ Le prolongateur intégré avec clamp réduit le risque d'exposition au sang.
- ▶ Diminue les manipulations au niveau du point de ponction.

LES AILETTES DE FIXATION




- ▶ L'embase souple du cathéter améliore le confort du patient et son profil étudié maintient un angle d'insertion idéal pour un positionnement optimal.

UN GUIDE AMÉLIORÉ



- ▶ Guides marqués permettant d'optimiser la profondeur d'insertion et le positionnement sur le guide (Guides droits uniquement).
- ▶ Longueur raccourcie pour une manipulation plus facile.
- ▶ Nouveauté : les guides de 45, 50 et 60 cm sont livrés avec le système Advancer.

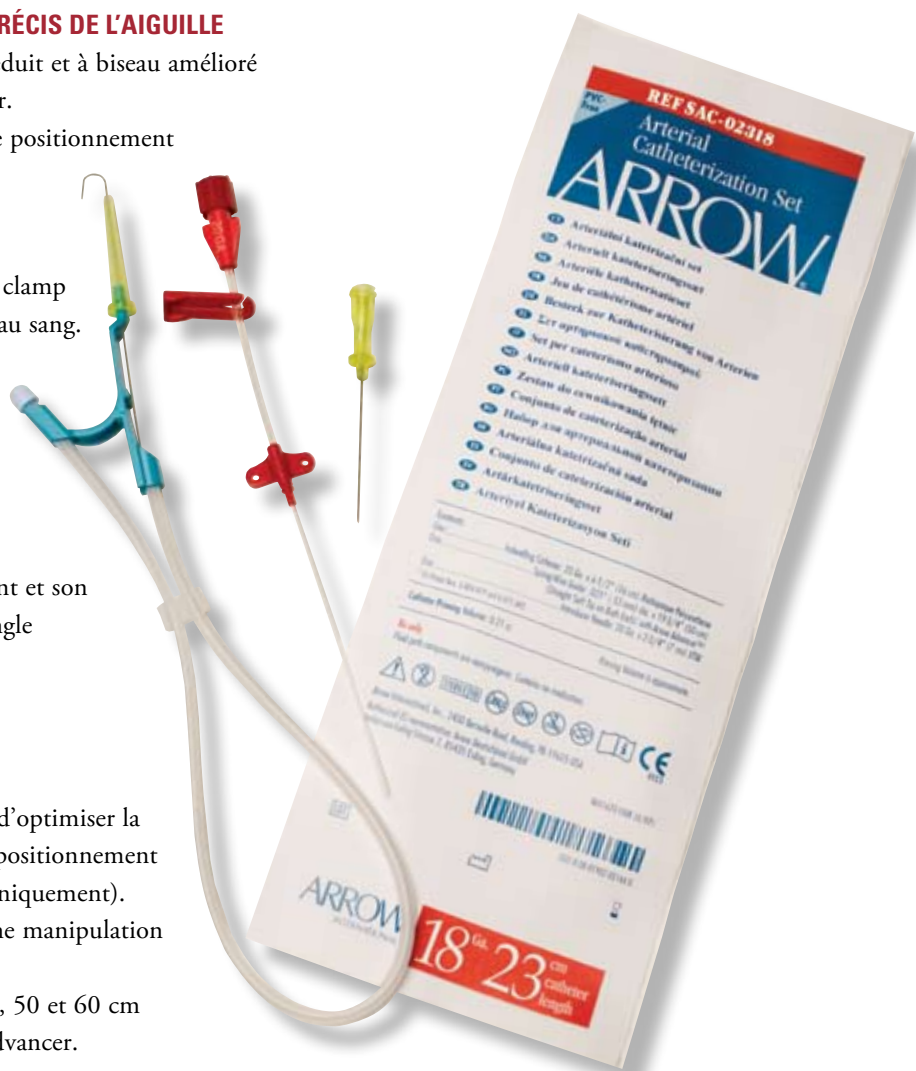

MONITORAGE HEMODYNAMIQUE

ARROW

POSITIONNEMENT FACILE ET PRÉCIS

Le cathéter en polyuréthane est traité avec un revêtement hydrophile qui assure une "glisse" parfaite pendant la procédure d'insertion. Son extrémité est profilée afin de permettre une meilleure transition entre le guide et le cathéter.

RÉDUIT LES COMPLICATIONS LIÉES AUX PLICATURES ET AUX TRAUMATISMES ARTÉRIELS

- ▶ Le polyuréthane modifié mis au point par Arrow est biocompatible.
- ▶ Spécialement conçu pour offrir un cathéter d'une performance sans faille, réduire l'amortissement de la courbe de pression et permettre un monitoring du patient avec une plus grande fiabilité.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- ▶ Le code couleur ISO de l'embase de l'aiguille permet de reconnaître facilement son calibre (Gauge).



- ▶ L'embase de l'aiguille présente une encoche en « V » pour indiquer l'orientation du biseau vers le haut.
- ▶ L'embase du cathéter a été conçu pour être adapté à plusieurs méthodes de fixation.
- ▶ sans PVC; sans DEHP.
- ▶ Nouvel emballage compact
- ▶ Les guides sont droits aux deux extrémités, présentent une marque de référence indiquant que l'extrémité du guide se trouve au niveau du biseau de l'aiguille.



Non destiné à la vente aux États-Unis.

Conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, le marquage CE est apposé sur ce produit

Pour obtenir des références supplémentaires, contactez Arrow International, Inc.

Distribution dans le monde entier :

Les bureaux de Teleflex Medical sont situés en Afrique du Sud, Allemagne, Autriche et Belgique, au Canada, en Espagne, aux États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande et Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Singapour, Slovaquie et Suisse.

SETS POUR CATHÉTÉRISATION ARTÉRIELLE

Réf.	Description	Taille de l'aiguille	Taille du guide	CE	Unités/boîte
SAC-00818	18 ga x 8 cm	18 ga x 5 cm	,025" x 33cm - S	✓	10
SAC-01218	18 ga x 12 cm	18 ga x 5 cm	,025" x 33cm - S	✓	10
SAC-01618	18 ga x 16 cm	18 ga x 7 cm	,025" x 45cm - J	✓	10
SAC-02318	18 ga x 23 cm	18 ga x 7 cm	,025" x 60cm - J	✓	10
SAC-00520	20 ga x 5 cm	20 ga x 4 cm	,021" x 35 cm - S	✓	10
SAC-00820	20 ga x 8 cm	20 ga x 4 cm	,021" x 35 cm - S	✓	10
SAC-01220	20 ga x 12 cm	20 ga x 7 cm	,021" x 35cm - S	✓	10
SAC-01620	20 ga x 16 cm	20 ga x 7 cm	,021" x 50 cm - S	✓	10
SAC-00522	22 ga x 5 cm	22 ga x 4 cm	,021" x 35 cm - S	✓	10
SAC-00822	22 ga x 8 cm	22 ga x 4 cm	,021" x 35 cm - S	✓	10
SAC-01222	22 ga x 12 cm	22 ga x 4 cm	,021" x 35cm - S	✓	10
SAC-00324*	24 ga x 2,5 cm	24 ga/26 ga x 1,9 cm	,018" x 25cm - S	✓	10 NOUVEAU
SAC-00524*	24 ga x 5 cm	24 ga/26 ga x 1,9 cm	,018" x 25cm - S	✓	10 NOUVEAU

Sans latex

« J » indique un guide métallique avec d'un côté une extrémité en J et de l'autre côté une extrémité droite

« S » indique un guide métallique avec une pointe droite à chaque extrémité

* Cathéter 24 Ga. prémonté sur une aiguille d'introduction de 26 Ga. x 1,9 cm

CHAQUE SET CONTIENT :

- 1 Cathéter à demeure avec ailette de fixation profilée à suturer et un prolongateur intégré équipé d'un clamp mobile pour la rétention du sang
- 1 Les guides sont disponibles en plusieurs tailles avec des extrémités droites et en « J » (avec redresseur)
- 1 aiguille de ponction

Attention :

Le contenu des emballages non ouverts et non endommagés est stérile. À usage unique. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions, et mode d'emploi actuels.

Pour savoir où trouver un représentant Teleflex Medical ou connaître les modalités de commande, contactez le service clientèle à :

EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

Tél. : +353 (0) 906 46 08 00

Fax : +353 (0) 14 37 07 73

France

Tél. : +33 (0) 5 62 18 79 40

Fax : +33 (0) 5 61 83 35 84

Belgique

Tél. : +32 (0) 2 333 24 60

Fax : +32 (0) 2 332 27 40

Suisse

Tél. : +41 (0) 31 818 40 90

Fax : +41 (0) 31 818 40 93

www.arrowintl-europe.com