



## RÜSCH TRACFLEX PLUS

La nueva generación de tubos de traqueostomía premium

### EN RESUMEN

- Materiales termosensibles altamente flexibles
- Tubo de traqueostomía reutilizable con protección en espiral para un solo paciente
- Prevención de infecciones mediante un sistema de cánula interna especial de un solo uso\*
- Código de colores para la pestaña de fijación del tubo de traqueostomía y del tapón de la cánula interna para una identificación segura del tamaño correcto
- Gran gama de accesorios: gel lubricante, tapa para la tos, tapa para ducha, Tapa de sellado (opcional), ayuda de inserción, cánulas interiores, banda para acomodar el cuello
- Tarjeta del paciente
- Adaptación óptima: pestaña de fijación ajustable con mecanismo de cierre
- Estéril, sin látex ni DEHP

\* Solicitada patente

### UN "PLUS" EN COMODIDAD

Nuestros tubos de traqueostomía TracFlex Plus representan la última generación de productos premium de la marca RÜSCH. Ofrecen un "plus" en comodidad, seguridad y rendimiento durante el cuidado de pacientes traqueostomizados.

La elección de materiales especialmente blandos y flexibles así como una gama de accesorios específicamente alineados para adaptarse a los tubos, ofrecen la máxima comodidad y una calidad premium. Las puntas atraumáticas del tubo y de la ayuda a la inserción permiten una inserción que no resulta desagradable para el paciente y que respeta la piel y la traquea del paciente. El tubo se adapta perfectamente a la situación anatómica de cada individuo.

### CENTRADOS EN LA SEGURIDAD

El sistema de pestaña de fijación ajustable con su mecanismo de bloqueo sencillo permite una adaptación segura y precisa y una fijación de la pestaña al cuello del

paciente. Unas marcas de referencia adicionales a lo largo del eje del tubo facilitan aún más la correcta alineación de la pestaña de fijación.

Una protección en espiral del tubo de traqueostomía garantiza un alto grado de flexibilidad a la vez que ofrece seguridad evitando que se enrosque o comprima.

El balón de pared fina y baja presión de los tubos con balón sella de forma segura y delicada la traquea en el área de baja presión. Además, la Tapa de sellado con válvula premontada protege la válvula y el balón lleno.

### EFICIENCIA Y GRAN RENDIMIENTO

El sistema de cánula interna de un solo uso y flexible, especialmente diseñado para nuestros tubos de traqueostomía TracFlex Plus, permite una eliminación rápida e higiénica de las secreciones. De este modo, la luz interna del tubo de traqueostomía está protegida de la contaminación, y el riesgo de infección en este contexto está óptimamente reducido.

## VARIOS TAMAÑOS

Nuestro TracFlex Plus está disponible en cinco tamaños desde un D.I. de 7,0 a 11,0 mm y ofrece una relación óptima entre diámetro interno y externo respecto al tubo de traqueostomía reforzado y la cánula interna.

### SET TRACFLEX PLUS (con balón, Ref. 121903; sin balón, Ref. 121900)

**RÜSCH**

TAMAÑO PARA PEDIDOS	DI EN MM	DE EN MM	CLL* EN MM	DIM. A EN MM	DIM. B EN MM	DIM. C EN MM	ÁNGULO APROX.	Ø DE BALÓN EN MM **	CÁNULA INTERNA	CANT.
7,0	7,0	10,1	102,5	37,0	22,8	42,7	100°	23	7,0	2
8,0	8,0	11,1	122,5	40,0	25,4	57,1	100°	27	8,0	2
9,0	9,0	12,1	152,5	44,0	26,4	82,1	100°	30	9,0	2
10,0	10,0	13,1	157,5	44,0	34,0	79,5	100°	32	10,0	2
11,0	11,0	14,2	163,5	47,0	33,1	83,4	100°	34	11,0	2

\* Longitud total (CLL=A+B+C) \*\* sólo para set 121903 TracFlex Plus

### TRACFLEX PLUS CÁNULAS INTERNAS (Ref. 121910)

**RÜSCH**

TAMAÑO PARA PEDIDOS	DI EN MM	DE EN MM	CANT.
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10



### ACCESORIOS


**RÜSCH**

	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
	12 19 11	Tapa para ducha, para tubos TracFlex Plus, que actúa como protección contra salpicaduras para evitar la entrada de gotitas de agua inhaladas durante el baño o la ducha	4
	12 19 12	Tapa para la tos de tubos TracFlex Plus, para orientar hacia abajo las secreciones expelidas	4
	12 19 13	Tapa de sellado para tubos TracFlex Plus, para terapia de deshabitación	4
	12 19 15 ***	Ayuda a la inserción para una introducción segura y no traumática del tubo de traqueostomía TracFlex Plus  *** Al realizar un pedido, indique también el tamaño del tubo	1

AL REALIZAR EL PEDIDO, INDIQUE: REF. Y TAMAÑO

### COMPONENTES DEL SET

- 1 Tubo de traqueotomía TracFlex Plus con o sin balón de baja presión y tapa de sellado con válvula premontada
- 2 Cánulas internas flexibles con tapón de cierre codificado por colores
- 3 Ayuda para la inserción (obturador)
- 4 Banda para acomodar el cuello
- 5 Tapa para ducha
- 6 Tapa para la tos
- 7 Tapa de sellado (opcional)
- 8 Gel lubricante soluble en agua, bolsita de 3g
- 9 Tarjeta de paciente con tubo de traqueostomía

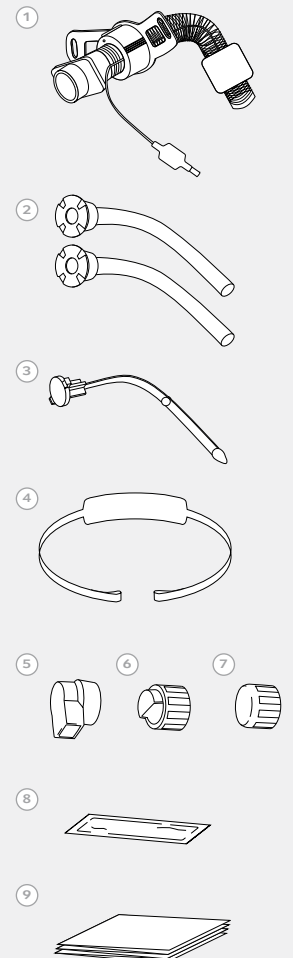

#### DISTRIBUIDO POR:

SEDE CENTRAL EUROPEA, IRLANDA · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone Co Westmeath  
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflexmedical.com

ESPAÑA Tel. +34 918 300 451 · info.es@teleflexmedical.com

WWW.TELEFLEXMEDICAL.COM

94 05 58 - 00 00 03 - REV B · 06 10 02 · Todos los datos están actualizados en el momento de la impresión. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

**Teleflex**  
MEDICAL