



**Hudson RCI**  
**Softech Plus Kanüle zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme**  
 Für zuverlässige Sauerstoffzufuhr und ETCO<sub>2</sub>-Probenahme

**Zuverlässige Sauerstoffzufuhr**


Teleflex hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Sicherheits- und Versorgungsstandard für Patienten stetig zu verbessern. Unsere innovativen Hudson RCI-Nasenkanülen sind speziell auf die Herausforderungen in Zusammenhang mit dem individuellen Patientenbedarf und den Präferenzen auf Seiten der Ärzte abgestimmt.

**Softech Plus Kanüle zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme**

Die Softech Plus Kanüle zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme von Teleflex ist unterteilt und kann daher aus einer Nasenlochöffnung Sauerstoff abgeben und mit der anderen Nasenlochöffnung Kohlendioxid aufnehmen, sodass eine unverdünnte endtidale Probe der Atemgase erhalten wird.

Durch die firmeneigene Kombination aus weichem DEHP-freiem Material und besonderem Produktdesign gibt die Wahl einer Softech Plus-Kanüle dem Arzt die Gewissheit einer zuverlässigen Sauerstoffzufuhr bei einem hohem Tragekomfort. Softech Plus Kanülen können dazu beitragen, den Patientenkomfort zu erhöhen und die Versorgungsqualität zu verbessern.

Das Softech Plus Material ist in der Nasenbrille und im gesamten lassoartigen Schlauch verarbeitet und sorgt damit für Komfort und ideale Passform bei den meisten Patienten.

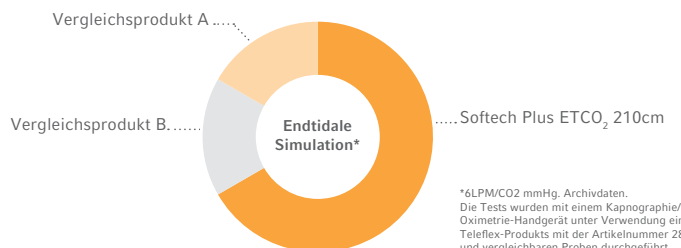

**Vorteile**




**Der Kliniker**  
 Das Design mit geteilten Nasenlochöffnungen produziert eine klare Kurvenform für die klinische Diagnostik.



**Ihre Einrichtung**  
 Verschiedene Verbindungsmöglichkeiten je nach den Gegebenheiten in der Klinik/Einrichtung



**Der Patient**  
 Weichere Nasenbrille und weicherer Schlauch

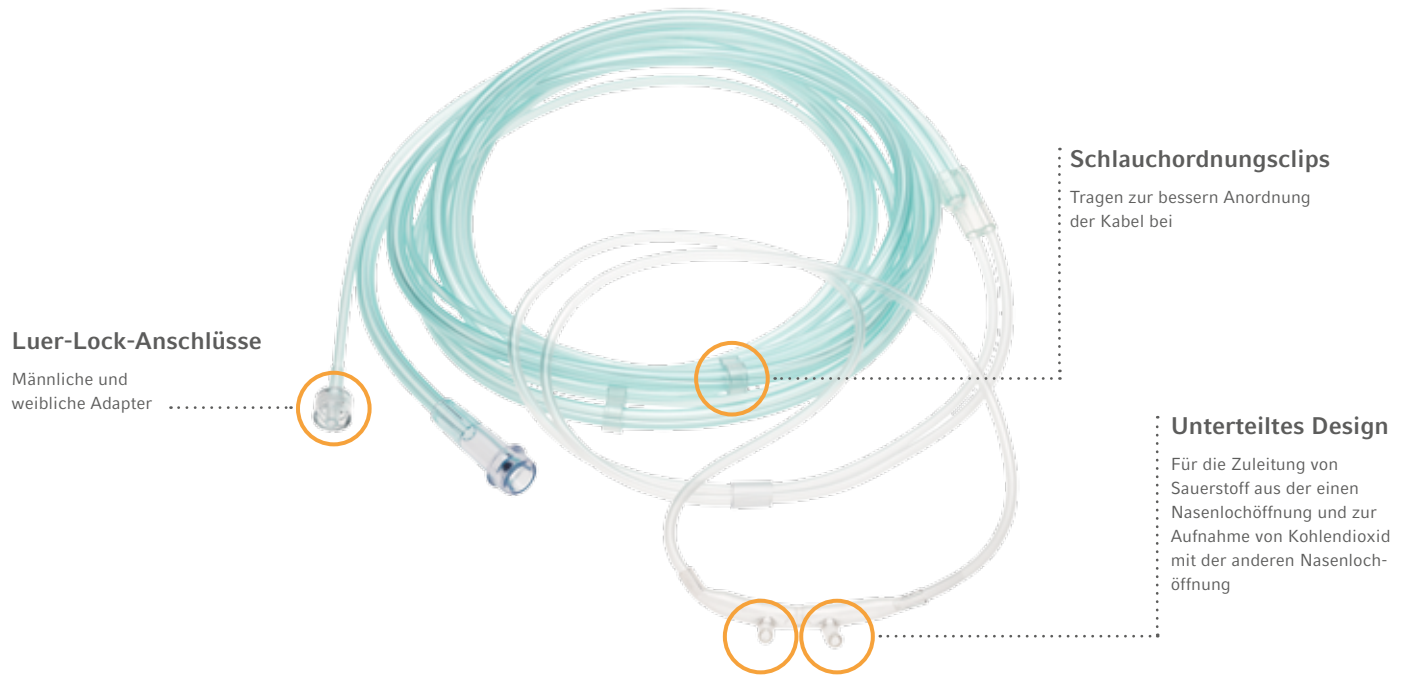

### Luer-Lock-Anschlüsse

Männliche und weibliche Adapter

### Schlauchordnungsclips

Tragen zur besseren Anordnung der Kabel bei

### Unterteiltes Design

Für die Zuleitung von Sauerstoff aus der einen Nasenlochöffnung und zur Aufnahme von Kohlendioxid mit der anderen Nasenlochöffnung

## Fakten in Kürze zu Hudson RCI Softech Plus Kanülen zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme

Nasenbrille und Schlauch der Softech Plus Kanüle zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme bestehen aus einem besonders weichen Material und erhöhen dadurch den Patientenkomfort.

Die Softech Plus Kanülen sind aus DEHP-freiem Material gefertigt und enthalten kein Naturlatex.

Die kleiner gestalteten Nasenlochöffnungen erhöhen den Patientenkomfort. Ab jetzt in Erwachsenen-, Kinder- und Kleinkindergrößen erhältlich.

Unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten je nach den Gegebenheiten in der Einrichtung tragen zur Erhöhung der klinischen Effizienz bei, während Schlauchclips für Ordnung bei der Sauerstoffzufuhr sorgen.

Der hellgrüne Schlauch und Pigtails in einer Länge von 50 mm bis 420 cm für den Anschluss an unterschiedliche Gerätearten tragen zur Erhöhung der klinischen Effizienz bei.

## Hudson RCI Softech Plus Kanülen zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme

REF.	KANÜLE BESCHREIBUNG	LÄNGE DER O <sub>2</sub> -PROBENNAHMELEITUNG	LÄNGE DER CO <sub>2</sub> -PROBENNAHMELEITUNG DES PIGTAILS	LUER-ANSCHLUSS	VE
2842	Für Erwachsene, unterteilt	7" (210 cm)	2" (50,8 mm)	Männlich	50
2843	Für Erwachsene, unterteilt	7" (210 cm)	2" (50,8 mm)	Weiblich	
2844	Für Erwachsene, unterteilt	7" (210 cm)	7" (210 cm)	Weiblich	
2845	Für Erwachsene, unterteilt	7" (210 cm)	7" (210 cm)	Männlich	
2846	Für Erwachsene, unterteilt	14" (420 cm)	2" (50,8 mm)	Weiblich	
2847	Für Erwachsene, unterteilt	14" (420 cm)	14" (420 cm)	Weiblich	
2848	Für Erwachsene, unterteilt	14" (420 cm)	14" (420 cm)	Männlich	
2849	Für Kinder, unterteilt	7" (210 cm)	2" (50,8 mm)	Weiblich	
2850	Für Kinder, unterteilt	7" (210 cm)	7" (210 cm)	Weiblich	
2851	Für Kinder, unterteilt	7" (210 cm)	7" (210 cm)	Männlich	
2852	Für Kinder, unterteilt	14" (420 cm)	2" (50,8 mm)	Weiblich	
2853	Für Kinder, unterteilt	14" (420 cm)	14" (420 cm)	Weiblich	
2854	Für Kinder, unterteilt	14" (420 cm)	14" (420 cm)	Männlich	
2855	Für Kleinkinder, unterteilt	7" (210 cm)	2" (50,8 mm)	Weiblich	
2856	Für Kleinkinder, unterteilt	7" (210 cm)	7" (210 cm)	Weiblich	
2857	Für Kleinkinder, unterteilt	7" (210 cm)	7" (210cm)	Männlich	



### Softech Plus ETCO<sub>2</sub> Nasenlöcher

Die Softech Plus Kanüle zur ETCO<sub>2</sub>-Probenahme aus der einen Nasenlochöffnung führt Sauerstoff zu und nimmt mit der anderen Nasenlochöffnung Atemgasproben auf.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Hudson RCI und Softech sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder der mit ihm verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die im vorliegenden Dokument genannten Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt. Die im vorliegenden Katalog beschriebenen Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung (04/2017) korrekt. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. 94 08 27 - 00 00 00 - MC/SF - REV A - 04 17 01