



## SUPER ARROW-FLEX® EINFÜHRBESTECK

Sichtbare Flexibilität. Fühlbare Festigkeit.



### EINFACHE EINFÜHRUNG UND PLATZIERUNG

- die röntgendichte Spitzenmarkierung ist beim Einführen besser zu erkennen und ermöglicht das präzise Absetzen eines Katheters unmittelbar hinter der Schleusenspitze\*
- stark röntgendichte Schleuse; jedoch ermöglichen die Zwischenräume zwischen den Windungen die Sicht durch die Schleuse hindurch
- ein sanfter Übergang zwischen Schleuse und Dilatator verhindert ein Einrollen
- die hydrophile Oberfläche erleichtert die sanfte Einführung
- die Ventilschmierung erleichtert die Katheterplatzierung durch die Schleuse



### SICHERHEIT UND RUHE

- die mögliche Anwendung als Führungsschleuse kann einen Führungskatheter überflüssig machen (beinhaltet Obturator-Kappe)
- einfache Identifikation der Schleusengröße durch farbcodierten Kern
- das 3-Wege-Hämostaseventil erleichtert die Handhabung des Katheters bei minimaler Blutung
- Schleuse und Dilatator lassen sich zusammenstecken, um die gleichzeitige, sichere Einführung zu gewährleisten



# VOLLSTÄNDIGER GEFÄSSZUGANG OHNE ABKNICKEN ODER KOLLABIERTEN

## FLEXIBLES, KNICKFESTES SUPER ARROW-FLEX EINFÜHRBESTECK

Produkte für den Gefäßzugang der Marke ARROW von Teleflex gehören zu den technisch fortschrittlichsten und sind weltweit bekannt. Aufgrund des hervorragenden Designs gelingt mit dem Super Arrow-Flex ein vollständiger Gefäßzugang. Mit dem Super Arrow-Flex lässt sich von Beginn an optimal arbeiten – von der einfachen Einführung und Handhabung bis zur gut sichtbaren röntgendichten Spitze\*. Super Arrow-Flex bietet mit seiner großen Auswahl an Schleusengrößen und -längen flexible Auswahlmöglichkeiten für eine Vielzahl von Gefäßanwendungen.

## VIELE PRODUKTE FÜR INTERVENTIONELLE VERFAHREN

- spezielle Konstruktionen für renale, Karotis- und transeptale Verfahren
- große Auswahl an Produkten für einen zuverlässigen Zugang für Crossover-, TIPS- und antegrade Brachialis-Verfahren
- verschiedene Auswahlmöglichkeiten von 5 bis 11 Fr. und 7,5 bis 100 cm
- das Einführbesteck ist mit und ohne Führungsdraht erhältlich
- praktische Farbcodierung



## MAXIMALE EFFEKTIVITÄT AUCH BEI SEHR ANSPRUCHSVOLLEN FÄLLEN

- die spezielle Spiraldraht-Konstruktion ermöglicht eine Biegung an jedem Punkt und in jede Richtung, ohne Abknicken oder Verlust an Halt
- aufgrund der hervorragenden Steuerbarkeit lassen sich auch gewundene Gefäße bewältigen
- der konische Dilatator erleichtert das Vorschieben in das andere Bein und in die A. femoralis superficialis (AFS)



\* Bei allen 35 cm und längeren Schleusen außer 5 Fr.

# SUPER ARROW-FLEX EINFÜHRBESTECK-SETS OHNE FÜHRUNGSDRAHT

## JEDES „CL“-SET ENTHÄLT:

- 1 x Super Arrow-Flex Schleuse mit integrierter seitlicher Spülvorrichtung/Hämostaseventil und 3-Wege-Hahn
- 1 x Gefäßdilator mit SnapLock-Verschluss
- 1 x Obturatordeckel

5 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-07511	5 Fr.	11 cm	● grau	10	
CL-07524	5 Fr.	24 cm	● grau	5	
CL-07545	5 Fr.	45 cm	● grau	5	
CL-07565	5 Fr.	65 cm	● grau	5	
CL-07590	5 Fr.	90 cm	● grau	2	

6 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-07611	6 Fr.	11 cm	● grün	10	
CL-07624	6 Fr.	24 cm	● grün	5	
CL-07635	6 Fr.	35 cm = (Cross-Over)	● grün	5	
CL-07645	6 Fr.	45 cm = (Cross-Over)	● grün	5	
CL-07665	6 Fr.	65 cm	● grün	5	
CL-07690	6 Fr.	90 cm	● grün	2	

7 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-07711	7 Fr.	11 cm	● orange	10	
CL-07724	7 Fr.	24 cm	● orange	5	
CL-07735	7 Fr.	35 cm = (Cross-Over)	● orange	5	
CL-07745	7 Fr.	45 cm = (Cross-Over)	● orange	5	
CR-07745*	7 Fr.	45 cm (Renal)	● orange	5	
CR-07745-NT**	7 Fr.	45 cm (Renal)	● orange	5	
CL-07765	7 Fr.	65 cm	● orange	5	
CL-07780	7 Fr.	80 cm	● orange	2	
CL-07790-R*	7 Fr.	90 cm (Carotid)	● orange	2	
CL-07700	7 Fr.	100 cm	● orange	2	

\* Diese Produkte sind mit einem speziellen Tuohy-Borst-„Y“-Adapter mit einer seitlichen Verlängerung ausgestattet.

\*\* Tuohy-Borst „Y“-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

8 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-07811	8 Fr.	11 cm	● blau	10	
CL-07824	8 Fr.	24 cm	● blau	5	
CL-07835	8 Fr.	35 cm = (Cross-Over)	● blau	5	
CL-07845	8 Fr.	45 cm = (Cross-Over)	● blau	5	
CT-07860	8 Fr.	60 cm (Transseptal)	● blau	2	
CL-07865	8 Fr.	65 cm	● blau	5	
CL-07880	8 Fr.	80 cm	● blau	2	
CL-07800	8 Fr.	100 cm	● blau	2	

9 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-07911	9 Fr.	11 cm	● schwarz	10	
CL-07924	9 Fr.	24 cm	● schwarz	5	
CL-07965	9 Fr.	65 cm	● schwarz	5	
CL-07980	9 Fr.	80 cm	● schwarz	2	
CL-07900	9 Fr.	100 cm	● schwarz	2	

10 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-07011	10 Fr.	11 cm	○ weiß	10	
CL-07024	10 Fr.	24 cm	○ weiß	5	
CL-07035	10 Fr.	35 cm	○ weiß	5	
CL-07045	10 Fr.	45 cm	○ weiß	5	
CL-07065	10 Fr.	65 cm	○ weiß	5	
CL-07080	10 Fr.	80 cm	○ weiß	2	

11 FR. EINFÜHRBESTECKE					ARROW
ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE	
CL-71165	11 Fr.	65 cm	● gelb	5	
CL-71180	11 Fr.	80 cm	● gelb	2	


# SUPER ARROW-FLEX EINFÜHRBESTECK-SETS MIT FÜHRUNGSDRAHT

## JEDES „CP“-SET ENTHÄLT:

- 1 x Super Arrow-Flex Schleuse mit integrierter seitlicher Spülvorrichtung/Hämostaseventil und 3-Wege-Hahn
- 1 x 17 3/4" (45 cm) langer Doppelzweck-Führungsdraht mit „J“-Spitze in Halterung mit Geraderichter.  
Durchmesser Führungsdraht: Set mit kurzer Schleuse (P) 0,021", alle anderen 0,035"
- 1 x Gefäßdilatator mit SnapLock-Verschluss
- 1 x Obturatordeckel

## 5/6/7/8/9/10 FR. EINFÜHRBESTECKE MIT FÜHRUNGSDRAHT

ART. NR.	GRÖSSE	LÄNGE	FARBCODIERTER AUFSATZ	VE
CP-07511-P	5 Fr.	7,5 cm	● grau	10
CP-07511	5 Fr.	11 cm	● grau	10
CP-07611-P	6 Fr.	7,5 cm	● grün	10
CP-07611	6 Fr.	11 cm	● grün	10
CP-07711	7 Fr.	11 cm	● orange	10
CP-07811	8 Fr.	11 cm	● blau	10
CP-07911	9 Fr.	11 cm	● schwarz	10
CP-07011	10 Fr.	11 cm	○ weiß	10

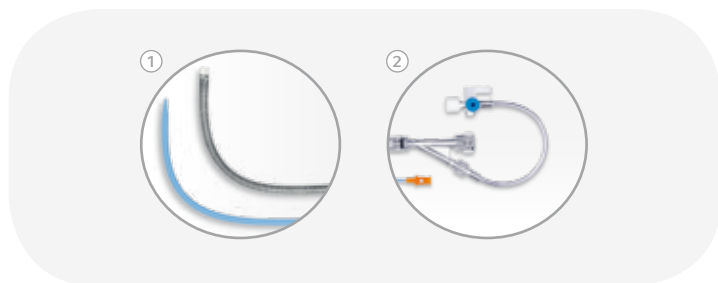

Super Arrow-Flex mit vorgebogener Spitze und Dilator (90° distales Ende) für einen Zugang zu den Nierenarterien (Bild 1).

Das Y-förmige Verbindungsstück mit dem Tuohy-Borst-(T-B)-Hämostaseventil und Seitenarm ermöglicht eine Sicherung des Gerätes innerhalb der Schleuse und eine gleichzeitige Infusion während des Eingriffs (Bild 2).

Teleflex ist ein weltweit führender Anbieter medizinischer Spezialinstrumente für diagnostische und therapeutische Verfahren in der Intensivmedizin, Urologie und Chirurgie. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Lösungen anzubieten, mit deren Hilfe Gesundheitsdienstleister bessere Ergebnisse erzielen und die Sicherheit von Patient und Klinikpersonal verbessern können.

Wir sind auf Instrumente für die Bereiche Anästhesie und Regionalanästhesie, Kardiologie, Atemwege, Urologie, Gefäßzugang und Chirurgie spezialisiert und beliefern Gesundheitseinrichtungen in über 150 Ländern. Teleflex ist außerdem im OEM-Bereich tätig.

Zu unseren bekannten Marken gehören ARROW®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, LMA™, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™, VIDACARE® und WECK®. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated.

Internationale Niederlassungen Teleflex: Australien, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Uruguay und USA.

#### **IHRE INTERNATIONALEN ANSPRECHPARTNER:**

##### **TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND**

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,  
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath  
Phone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73  
orders.intl@teleflex.com

**AUSTRALIEN/NEUSEELAND** +61 (0)3 9081 0600

**BELGIEN** +32 (0)2 333 24 60

**CHINA (SHANGHAI)** +86 (0)21 6381 6399

**CHINA (PEKING)** +86 (0)10 6418 5699

**DEUTSCHLAND** +49 (0)7151 406 0

**FRANKREICH** +33 (0)5 62 18 79 40

**GRIECHENLAND** +30 210 67 77 717

**GROSSBRITANNIEN** +44 (0)1494 53 27 61

**INDIEN** +91 (0)44-2836 5040

**ITALIEN** +39 0362 58 911

**JAPAN** +81 (0)3 3379 1511

**NIEDERLANDE** +31 (0)88 00 215 00

**ÖSTERREICH** +43 (0)1 402 47 72

**PORTUGAL** +351 22 541 90 85

**SCHWEIZ** +41 (0)31 818 40 90

**SINGAPUR** +65 6439 3000

**SLOWAKISCHE REPUBLIK** +421 (0)3377 254 28

**SPANIEN** +34 918 300 451

**SÜDAFRIKA** +27 (0)11 807 4887

**TSCHECHISCHE REPUBLIK** +420 (0)495 759 111

Weitere Informationen finden Sie unter [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Teleflex Repräsentanten.  
Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (03/2014). Technische Änderungen vorbehalten.

94 10 43 - 00 00 00 · REV A · MC / WM · 03 14 02