



SUPER ARROW-FLEX® INTRODUCTEUR

Alliance de force et flexibilité



POSE ET INSERTION FACILES

- le marquage radio opaque de l'extrémité permet une visualisation tout au long de l'insertion et un déploiement précis juste après l'embout du cathéter*
- la gaine d'introduction en polyuréthane armé radio opaque présente des espaces entre les spirales pour une meilleure visualisation à l'insertion
- le dilatateur profilé facilite l'introduction et permet une transition atraumatique
- la surface hydrophylque à l'extrémité du cathéter permet une insertion facile et « en douceur » dans l'artère
- la lubrification de la valve facilite le passage du cathéter au travers de l'introducteur



SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- l'utilisation comme introducteur-guide long peut substituer l'usage d'un cathéter guide (comprend un bouchon obturateur)
- embouts avec code couleur universel pour faciliter l'identification des tailles d'introducteurs
- la valve hémostatique tricuspide facilite la manipulation du cathéter avec un minimum de reflux sanguin et peut également être suturée à la peau grâce à des oeillets de fixation
- l'introducteur et le dilatateur se verrouillent ensemble afin de permettre une insertion simultanée et sécurisée
- voie latérale de perfusion en polycarbonate, avec robinet 3 voies fixe




ACCÈS VASCULAIRE COMPLET SANS PLICATURE NI ÉCRASEMENT

INTRODUCTEUR SUPER ARROW-FLEX FLEXIBLE ET RÉSISTANT AUX TORSIONS

Super Arrow-Flex de Teleflex permet un accès vasculaire complet grâce à sa conception et sa structure supérieure unique en polyuréthane armé. Grâce à sa facilité de manipulation et d'insertion, de même qu'à son embout radio-opaque hautement visible*, Super Arrow-Flex est conçu pour fournir des performances optimales à tout moment.

Nous vous proposons une gamme complète de tailles et de longueurs d'introducteurs, qui offre la possibilité de multiples applications endo-vasculaires.

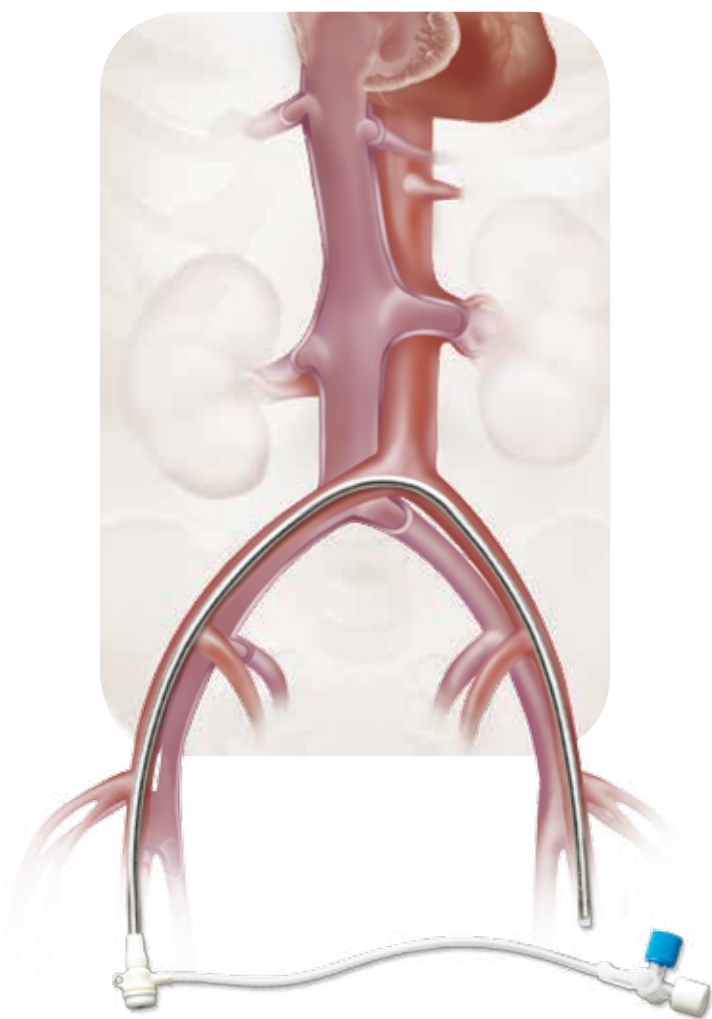

* Dans tous les modèles de 35 cm de longueur et plus, à l'exception du modèle 5 Fr.

GAMME DE PRODUITS POUR LES PROCÉDURES INTERVENTIONNELLES

- formes spéciales pour les procédures rénales, carotidiennes, et transeptales
- large choix de produits offrant un accès fiable pour les « cross over », et les procédures de dérivation portosystémique intrahépatique par voie jugulaire (TIPS) et les procédures brachiales antérogrades
- diamètres disponibles de 5 Fr. à 11 Fr. et longueurs disponibles de 7,5 cm à 100 cm
- introducteur disponible avec ou sans guide
Ils acceptent tous des guides de 0,03" à 0,08" (inch)
- repérage des tailles par code couleur universel

EFFICACITÉ MAXIMALE MÊME DANS LES CAS LES PLUS DIFFICILES

- sa conception exclusive en spirale permet à l'introducteur de se courber et de résister à l'écrasement sans plicature ni perte de performance
- ses excellentes capacités d'orientation lui confèrent un passage aisé et protecteur dans les artères les plus tortueuses
- le dilateur biseauté et profilé offre une capacité d'insertion exceptionnelle dans les différentes voies d'abord telle que l'artère fémorale superficielle
- apporte un plus grand confort au patient et réduit les douleurs dorsales post-opératoires grâce à sa flexibilité¹



¹ Waksman et al : comparaison randomisée d'un introducteur fémoral flexible vs non flexible sur le confort du patient après angioplastie. Journal "American Heart". 131:6, 1076-1078.

SETS D'INTRODUCTEURS SUPER ARROW-FLEX AVEC GUIDES

INTRODUCTEURS 5 - 10 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CP-07511-P	5 Fr.	7,5 cm	gris	10
CP-07511	5 Fr.	11 cm	gris	10
CP-07611-P	6 Fr.	7,5 cm	vert	10
CP-07611	6 Fr.	11 cm	vert	10
CP-07711	7 Fr.	11 cm	orange	10
CP-07811	8 Fr.	11 cm	bleu	10
CP-07911	9 Fr.	11 cm	noir	10
CP-07011	10 Fr.	11 cm	blanc	10

CHAQUE SET « CP » COMPREND :

- 1 introducteur Super Arrow-Flex avec extension latérale intégrale/valve hémostatique avec robinet à 3 voies
- 1 guide de 17 3/4" (45 cm) ; longueur à double usage avec extrémité en « J » dans le support avec redresseur ; le set d'introducteurs courts (P) est équipé de guides de 0,021" (0,05 cm) de diamètre ; tous les autres sets sont équipés de guides de 0,035" (0,89 cm) de diamètre
- 1 dilateur vasculaire avec fonction Snap-Lock
- 1 bouchon obturateur

SETS D'INTRODUCTEURS SUPER ARROW-FLEX SANS GUIDES

INTRODUCTEURS 5 FR.


RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-07511	5 Fr.	11 cm	gris	10
CL-07524	5 Fr.	24 cm	gris	5
CL-07545	5 Fr.	45 cm	gris	5
CL-07565	5 Fr.	65 cm	gris	5
CL-07590	5 Fr.	90 cm	gris	2

INTRODUCTEURS 6 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-07611	6 Fr.	11 cm	vert	10
CL-07624	6 Fr.	24 cm	vert	5
CL-07635	6 Fr.	35 cm	vert	5
CL-07645	6 Fr.	45 cm	vert	5
CR-07645*	6 Fr.	45 cm (rénal)	vert	5
CL-07665	6 Fr.	65 cm	vert	5
CL-07690	6 Fr.	90 cm	vert	2

INTRODUCTEURS 7 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-07711	7 Fr.	11 cm	orange	10
CL-07724	7 Fr.	24 cm	orange	5
CL-07735	7 Fr.	35 cm	orange	5
CL-07745	7 Fr.	45 cm	orange	5
CR-07745*	7 Fr.	45 cm (rénal)	orange	5
CR-07745-NT**	7 Fr.	45 cm (rénal)	orange	5
CL-07765	7 Fr.	65 cm	orange	5
CL-07780	7 Fr.	80 cm	orange	2
CL-07790-R*	7 Fr.	90 cm (carotidien)	orange	2
CL-07700	7 Fr.	100 cm	orange	2

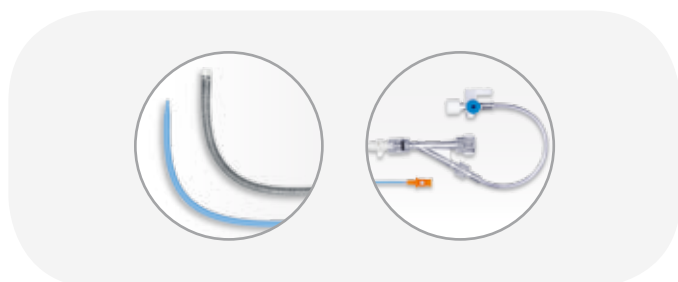

Introducteurs Super Arrow-Flex avec extrémité distale pré-courbée à 90° pour un accès aux artères rénales.

Adaptater Tuohy-Borst en Y avec extension latérale.

INTRODUCTEURS 8 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-07811	8 Fr.	11 cm	bleu	10
CL-07824	8 Fr.	24 cm	bleu	5
CL-07835	8 Fr.	35 cm	bleu	5
CL-07845	8 Fr.	45 cm	bleu	5
CT-07860	8 Fr.	60 cm (transseptal)	bleu	2
CL-07865	8 Fr.	65 cm	bleu	5
CL-07880	8 Fr.	80 cm	bleu	2
CL-07890-R/**	8 Fr.	90 cm (carotidien)	bleu	2
CL-07800	8 Fr.	100 cm	bleu	2

INTRODUCTEURS 9 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-07911	9 Fr.	11 cm	noir	10
CL-07924	9 Fr.	24 cm	noir	5
CL-07965	9 Fr.	65 cm	noir	5
CL-07980	9 Fr.	80 cm	noir	2
CL-07900	9 Fr.	100 cm	noir	2

INTRODUCTEURS 10 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-07011	10 Fr.	11 cm	blanc	10
CL-07024	10 Fr.	24 cm	blanc	5
CL-07035	10 Fr.	35 cm	blanc	5
CL-07045	10 Fr.	45 cm	blanc	5
CL-07065	10 Fr.	65 cm	blanc	5
CL-07080	10 Fr.	80 cm	blanc	2

INTRODUCTEURS 11 FR.

RÉF.	TAILLE DE L'INTRODUCTEUR	LONGUEUR DE L'INTRODUCTEUR	COULEUR DE L'EMBASE	SETS PAR BOÎTE
CL-71165	11 Fr.	65 cm	jaune	5
CL-71180	11 Fr.	80 cm	jaune	2

CHAQUE SET « CL » COMPREND :

- 1 introducteur Super Arrow-Flex avec extension latérale intégrale/valve hémostatique avec robinet à 3 voies
- 1 dilateur vasculaire avec fonction SnapLock
- 1 bouchon obturateur

*Ces produits sont équipés d'un adaptateur spécial Tuohy-Borst en forme de « Y » avec extension de dérivation latérale

**L'adaptateur Tuohy-Borst en forme de « Y » n'est pas livré avec ce produit.

***Contactez votre représentant régional pour plus d'informations.

Teleflex est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux destinés aux applications diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des soins intensifs, de l'urologie et de la chirurgie. Notre mission est d'offrir des solutions permettant aux professionnels de soins de santé d'améliorer l'état de santé des patients tout en assurant leur sécurité ainsi que celles des soignants. Nous sommes spécialisés dans les dispositifs destinés à l'anesthésie générale et locale, aux soins cardiaques, aux soins respiratoires, à l'urologie, à l'accès vasculaire et à la chirurgie. Nous servons par ailleurs des fournisseurs de soins de santé dans plus de 140 pays dans le monde. Teleflex fournit également des produits sur mesure à des fabricants de dispositifs médicaux.

Parmi l'éventail des marques renommées, on retrouve: ARROW®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, LMA™, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ et WECK®, toutes étant des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated.

Filiales mondiales de Teleflex Medical : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, et Uruguay.

VOS CONTACTS A L'INTERNATIONAL :

TELEFLEX SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL, IRLANDE

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath
Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com

AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE +61 (0)3 9081 0600

AFRIQUE DU SUD +27 (0)11 807 4887

ALLEMAGNE +49 (0)7151 406 0

AUTRICHE +43 (0)1 402 47 72

BELGIQUE +32 (0)2 333 24 60

CHINE (SHANGHAI) +86 (0)21 6381 6399

CHINE (PÉKIN) +86 (0)10 6418 5699

ESPAGNE +34 918 300 451

FRANCE +33 (0)5 62 18 79 40

GRÈCE +30 210 67 77 717

INDE +91 (0)44-2836 5040

ITALIE +39 0362 58 911

JAPON +81 (0)3 3379 1511

PAYS-BAS +31 (0)88 00 215 00

PORTUGAL +351 22 541 90 85

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE +421 (0)3377 254 28

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE +420 (0)495 759 111

ROYAUME-UNI +44 (0)1494 53 27 61

SINGAPOUR + 65 6447 5022

SUISSE +41 (0)31 818 40 90

Pour de plus amples informations, visitez le site www.teleflex.com

Les produits de ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données sont à jour au moment de l'impression (10/2013). Susceptible de modifications techniques sans préavis.

94 10 43 - 00 00 02 · REV A · MC / WM · 10 13 02