

## CATHÉTER PÉRIDURAL ARROW FLEXTIP PLUS

Pour des procédures péridurales simples et rapides

### APERÇU

- structure du cathéter résistant à la plicature
- extrémité distale souple, flexible et fermée
- quatre oeils latéraux facilitant l'aspiration des fluides / l'administration des analgésiques
- diminue le risque de complications
- positionnement sûr et précis
- procédures péridurales simples et rapides

### POURQUOI NE PAS AMÉLIORER VOTRE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR PEROPÉRATOIRE, POSTOPÉRATOIRE ET À LONG TERME?

Une anesthésie locorégionale et une gestion de la douleur postopératoire efficaces permettent un rétablissement plus rapide du patient sans les effets secondaires d'une anesthésie générale. L'objectif prioritaire de Teleflex est d'améliorer ses techniques et méthodes de prise en charge de la douleur postopératoire et à long terme; tout en garantissant des résultats optimaux et un plus grand confort aux patients.


Grâce à ses excellentes performances en terme de résistance à la plicature et à la rupture, à son extrémité distale souple, flexible et fermée et à ses quatre oeils latéraux, ce cathéter permet de réduire le risque de complications dans l'espace péridural: risque de brèche dure-mérienne, de paresthésies et de pénétration/perforation accidentelle des vaisseaux sanguins ou de la dure-mère pouvant entraîner une diffusion incorrecte des anesthésiques<sup>1,2</sup>.

La structure armée et spiralée du cathéter, en acier inoxydable, est tout à fait unique et assure une résistance à l'écrasement. L'insertion ne nécessite aucun mandrin. Les procédures péridurales peuvent donc être réalisées plus facilement et plus rapidement. La structure renforcée confère un autre avantage de taille: sa radio-opacité. Une propriété importante pour garantir un positionnement sûr et précis. Enfin, et surtout, ses quatre oeils latéraux facilitent l'aspiration des fluides et/ou l'administration des analgésiques.



## CATHÉTER PÉRIDURAL ARROW FLEXTIP PLUS

En réduisant le risque de complications pendant l'intervention et en éliminant totalement les effets secondaires généralement associés à l'anesthésie générale, le cathéter péridural ARROW FlexTip Plus offre au patient de meilleurs résultats et un plus grand confort.

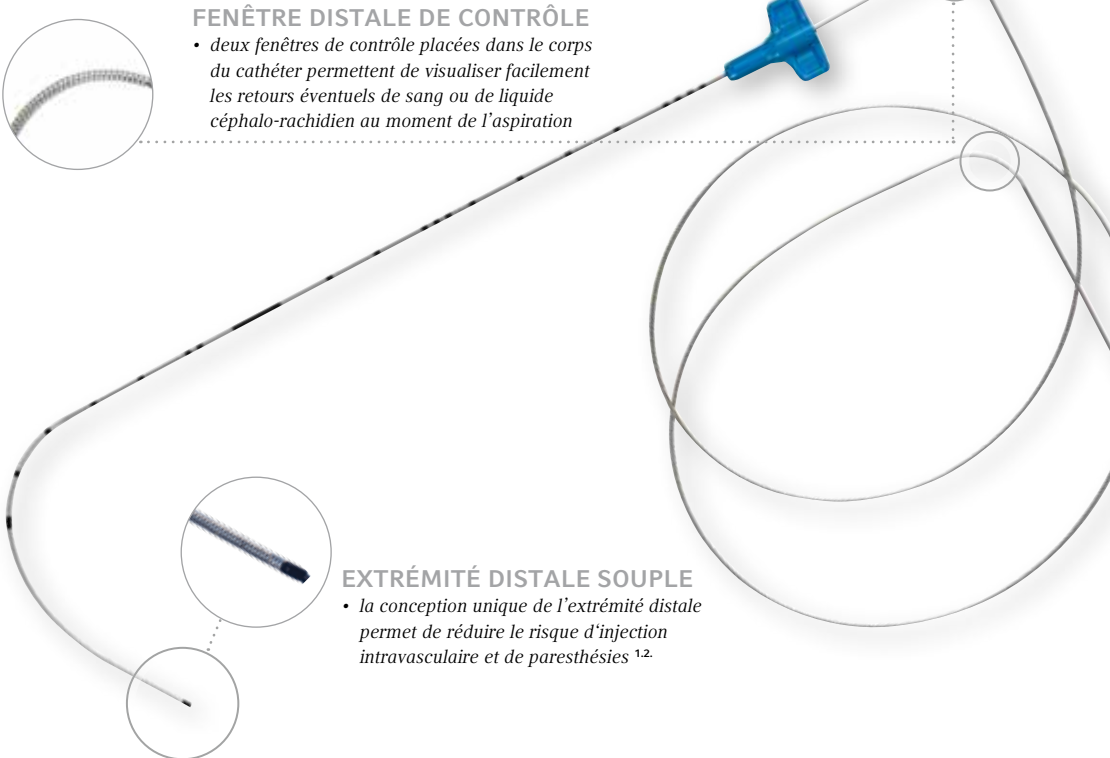

**QUATRE OEILS LATÉRAUX**  
améliore l'aspiration des fluides et l'administration des analgésiques

## INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

FLEX TIP PLUS			ARROW
RÉF.	PRODUIT	DESCRIPTION DU PRODUIT	QTÉ
JC-05400-DC	Kit de cathéter péridural FlexTip Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aiguille péridurale 17 Ga. 9,84 cm TW avec marquages en cm</li> <li>• Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm</li> <li>• Adaptateur SnapLock</li> <li>• Centreur</li> <li>• filtre plat 0,22 µ</li> </ul>	20
JC-05400-DCS	Kit de cathéter péridural FlexTip Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aiguille péridurale 17 Ga. 9,84 cm TW avec marquages en cm</li> <li>• Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm</li> <li>• Adaptateur SnapLock</li> <li>• Centreur</li> <li>• filtre plat 0,22 µ</li> <li>• Seringue 10 ml LOR spéciale Luer Slip</li> </ul>	20

<sup>1</sup> Junega M, MD, Kargas GA, MD, Miller D, CRNA, Perry E, MD, Gupta B, MD, Pajel V, MD, Botic Z, MD, and Rigor B, MD. Comparisons of Epidural Catheters Induced Paresthesia in Parturients. Poster presentation from the American Society of Regional Anesthesia (A.S.R.A.) meeting: presented April, 1995 – Orlando, FL. Regional Anesthesia 1995; 20 (Suppl.):4.

<sup>2</sup> Junega M, MD, Kargas GA, MD, Miller D, CRNA, Perry E, MD, Botic Z, MD, and Rigor B, MD. Incidence of Epidural Vein Cannulation in Parturients with Three Different Epidural Catheters. Regional Anesthesia 1996; 21 (Suppl.):4.

**TELEFLEX MEDICAL SIEGE SOCIAL, IRLANDE** · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath  
Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com  
**FRANCE** Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com  
**BELGIQUE** Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com  
**SUISSE** Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com  
**WWW.TELEFLEX.COM**

94 10 95 - 00 00 02 - REV A - 03 13 01 · Toutes les informations communiquées dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Elles peuvent faire l'objet de modification technique sans préavis.

**Teleflex**