



Arrow
MAC
mit ARROWg⁺ard-Technologie



High Flow trifft maximale Vielseitigkeit

Auf die Flussraten kommt es an

Wenn Durchflussraten von Bedeutung sind, insbesondere unter zeitkritischen Bedingungen, bietet Ihnen die Arrow MAC Mehrlumen-Schleuse von Teleflex mehrere Optionen.

- Anwendbarkeit bei folgenden Patiententypen:
 - Septischer Schock
 - Kardiologische Intervention
 - Trauma, Reanimation
 - Transplantation
- Hohe Durchflussraten von fast 30 Litern pro Stunde allein unter Schwerkrafteinwirkung

Vielseitiger Zugang

Die MAC Mehrlumen-Zugangsschleuse mit ARROWg+ard-Technologie bietet den Komfort, andere Katheter bei gleichbleibend hohen Durchflussraten einführen zu können.

- Ein Zusatz-ZVK (mit bis zu drei zusätzlichen Lumen)
- Ein Thermodilutionskatheter
- Ein temporärer Schrittmacher

Gleichbleibende Leistung

Die MAC bietet einen glatten Übergang vom Dilator zur Spitze sowie eine hydrophile Beschichtung.

- Ermöglicht einfaches Einführen des Katheters durch die Haut
- Eine speziell entwickelte stabile Polyurethanverbindung verhindert das Abknicken des Katheters beim Einführen und in situ

Bitte besuchen Sie uns

auf www.arrowvascular.com/MAC

um weitere Informationen über den Arrow MAC zu erhalten

Vergleich der Durchflussrate nach Gefäßzugang

IV ¹	PICC ³	INTRAOSSEÄR	CVC ³	EINFÜHRSCHEULE ²	MAC ³
1,2-6,3	1,6	5	3-6	12	29

Hinweis: Diese Tabelle vergleicht die höchsten Flusslumen nach Gefäßzugang. Flussraten bei PICC, ZVK, Einführschleuse und MAC sind Schwerkraftinfusion mit Kochsalzlösung. IV- und intraossee Durchflussraten basieren auf Durchflussraten mit Druckbeutel und werden von einem anderen Hersteller geliefert.

MAC-Durchflussraten

LUMEN	DURCHFLUSSRATE (ML/STD) ³
Distal (9 Fr) kein Katheter	29.920
Distal (9 Fr) mit 8 Fr Katheter	12.180
Distal (9 Fr) mit 7 Fr Katheter	19.810
Proximal (12 G) kein Katheter	9.340

Bewährter Schutz – ARROWg+ard-Technologie

Die Arrow MAC mit ARROWg+ard-Technologie integriert chlorhexidinbasierten, antimikrobiellen Schutz, um Ihre Patienten vor katheterbedingten Blutstrominfektionen (CRBSIs) zu bewahren, wie dies in über 30 Studien auf Effizienz und Sicherheit nachgewiesen wurde.



Hämostaseventil und Arretierungsobturator

Behindert Rückblutung (Blutverkeimung) und verringert das Risiko von Luftembolien

¹ <http://www.bd.com/infusion/pdfs/D16130.pdf>. Basierend auf 24 bis 18 Gauge-Durchflussraten.

² Schwerkraftwerte basierend auf internen Tests des Arrow Katheters.

³ Basierend auf 100 cm schwerkraftgeleitete Kochsalzlösungsdurchflussraten (Kopfhöhe). Durchflussraten wären höher mit einem Schnellinfusionsgerät oder einem Druckkissen.

Bestellinformationen



MAC – Mehrlumen-Zugangskatheter

ART. NR.	Ø	LÄNGE	MATERIAL	SETS/ SCHACHTEL
SI-11142	9 Fr	10 cm	PUR ²	5
SI-11242	9 Fr	11,5 cm	PUR ²	5
SI-21142	9 Fr	10 cm	PUR AGB ²	5


¹ XTW = Extra dünnwandig

² PUR = Polyurethan, AGB = ARROWgard Blue antimikrobielle Technologie

Zubehör

- Kontaminationsschutz: Cath-Gard, 80 cm, mit TwistLock-Adapter
- Obturator: 8 Fr
- Zubehör: 1 x Druckumwandler-sonde, 1 x Raulerson Spritze 5 ml, 3 x Gazekompressen 4" x 4", 1 x Verschlusskappe (unbelüftet), 1 x Verschlusskappe (belüftet) 1 x Vierwegehahn High-Flow

Lumendesign G

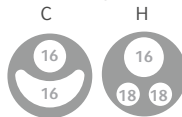

ZVK für MAC Introducer-Systeme

ART. NR.	LUMEN	Ø	LÄNGE MIT MAC	INNENLUMEN G	DESIGN	MATERIAL	SETS/ SCHACHTEL
ML-00701	1	7 Fr	14 cm			PUR	5
ML-00702	2	7 Fr	16 cm	16D-16P	C	PUR	5
ML-00703	3	7 Fr	16 cm	16D-18M-18P	H	PUR	5

Zubehör für perkutane Einführbestecke

ART. NR.	ZUR ANWENDUNG MIT DEM KATHETER	LÄNGE	ANSCHLUSS	FARBE	SETS/ SCHACHTEL
ST-09807	7-7,5 Fr	80 cm	Tuohy-Borst	Blau	25
ST-09880	7-7,5 Fr	80 cm	Keine Arretierung	Blau	25
ST-09870	7 Fr	80 cm	TwistLock	Blau	25
ST-09875	7-7,5 Fr	80 cm	TwistLock	Gelb	25
ST-09885	8-8,5 Fr	80 cm	TwistLock	Schwarz	25

Führungsdraht


Länge: 45 cm; Durchmesser: 0,89 mm / 0.035"; Spitze: J-Spitze/gerade; Markierung: Ja; Arrow Advancer: Ja

Insertionsnadel

Länge: 6,35 cm; Durchmesser: 18 G¹

Flaches Mehrlumensystem

Einfach zu fixieren, zur flachen Positionierung entwickelt, um mehr Patientenkomfort zu bieten

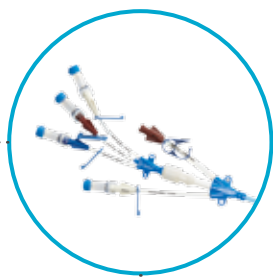

Anwendung von bis zu 5 Lumen möglich



Teleflex ist einer der weltweit führenden Anbieter von medizintechnischen Produkten, ausgerichtet auf das eine Ziel, die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Unser unermüdliches Streben, unerfüllte klinische Bedürfnisse genau zu bestimmen, setzen wir um in zweckorientierte Innovationen – zum größtmöglichen Nutzen für Patienten und die im Gesundheitswesen tätigen Personen. Das Teleflex Portfolio ist breit gefächert und umfasst Produktlösungen auf den Gebieten der vaskulären und interventionellen Zugänge, Chirurgie, Anästhesie, Kardiologie, Urologie, Notfallmedizin und Beatmung. Teleflex-Mitarbeiter in der ganzen Welt verbindet das gleiche Verständnis, mit ihrem Tun tagtäglich etwas bewegen zu wollen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte teleflex.com.

Zur Teleflex Familie zählen Arrow, Deknatel, Hudson RCI, Pilling, Rüscher und Weck – renommierte Marken, vereint unter dem Dach eines gemeinsamen Ziels.

Firmensitz

Telefon +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regionale Büros

USA: Telefon +1 919 544 8000, gebührenfreie Rufnummer 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Lateinamerika: Telefon +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: Telefon +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland

Australien/Neuseeland 1300 360 226

Belgien +32 (0)2 333 24 60

China (Schanghai) +86 (0)21 6163 0965

China (Peking) +86 (0)10 6418 5699

Deutschland +49 (0)7151 406 0

Frankreich +33 (0)5 62 18 79 40

Griechenland +30 210 67 77 717

Großbritannien +44 (0)1494 53 27 61

Indien +91 (0)44 2836 5040

Italien +39 0362 58 911

Japan +81 (0)3 6632 3600

Kanada +1 (0)800 387 9699

Korea +82 2 536 7550

Mexiko +52 55 5002 3500

Niederlande +31 (0)88 00 215 00

Österreich +43 (0)1 402 47 72

Portugal +351 22 541 90 85

Schweiz +41 (0)31 818 40 90

Singapur (Länder in Südostasien ohne Direktvertrieb)
+65 6439 3000

Slowakische Republik +421 (0)3377 254 28

Spanien +34 918 300 451

Südafrika +27 (0)11 807 4887

Tschechische Republik +420 (0)495 759 111

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte teleflex.com.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Arrow Advancer, ARROWG+ard, Cath-Gard, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüscher, TwistLock und Weck sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder der mit ihm verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die im vorliegenden Dokument genannten Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt. Die im vorliegenden Dokument genannten Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt. Die im vorliegenden Katalog beschriebenen Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.

Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung (07/2016) korrekt. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2016 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.