



Arrow
MAC
con Tecnología ARROWg⁺ard



Alto flujo - Máxima versatilidad

La importancia de los ratios de flujo

Cuando lo importante son los ratios de flujo, especialmente en condiciones de tiempo limitado, el catéter de acceso multilumen Arrow MAC de Teleflex no falla.

- Abarca varios tipos de pacientes:
 - Síndrome del shock séptico
 - Problemas cardíacos
 - Resucitación de pacientes con traumatismo
 - Trasplantes
- Ratios de alto flujo de casi 30 litros por hora solo por gravedad

Acceso versátil

El catéter de acceso multilumen MAC con tecnología Arrowgard proporciona la comodidad de introducir otros dispositivos mientras se mantienen altos ratios de flujo.

- Un CVC companion (con hasta tres lúmenes adicionales)
- Un catéter de termodilución
- Un cable marcapasos temporal

Rendimiento consistente

El MAC realiza una transición suave del dilatador a la punta y posee un recubrimiento hidrófilo.

- Facilita la inserción del catéter a través de la piel del paciente
- Fuerte estructura en poliuretano diseñada para evitar el acodamiento del catéter durante la inserción o el uso

Visite www.arrowvascular.com/MAC
para obtener más información sobre Arrow MAC

Comparación de ratio de flujo por dispositivo vascular

IV ¹	PICC ²	INTRAÓSEO	CVC ³	INTRODUCTOR PERCUTÁNEO ²	MAC ³
1,2-6,3	1.6	5	3-6	12	29

Nota: Esta tabla compara el lumen de flujo máximo por dispositivo de acceso vascular. Los ratios de flujo de PICC, CVC, introductor percutáneo y MAC son ratios de flujo con solución salina por gravedad. Los ratios de flujo de vías intravenosas e intraóseas están basados en los ratios de flujo de la bolsa de presión que son suministrados por otro fabricante.

Ratios de flujo MAC

LUMEN	RATIO DE FLUJO (ML/HR) ³
Distal (9 Fr.) sin catéter	29,920
Distal (9 Fr.) con catéter de 8 Fr.	12,180
Distal (9 Fr.) con catéter de 7 Fr.	19,810
Proximal (12 G) sin catéter	9,340

Protección probada – Tecnología ARROWgard

El Arrow MAC con tecnología ARROWgard⁺ incorpora protección antimicrobiana basada en clorhexidina para proteger a los pacientes de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter (BRC) evidenciada por más de 30 estudios de eficacia y seguridad.



Válvula de hemostasia y obturador de bloqueo

Evita el sangrado retrógrado (contaminación de sangre) y reduce el riesgo de embolias gaseosas

¹ <http://www.bd.com/infusion/pdfs/D16130.pdf>. Basado en ratios de flujo de 24 a 18 gauges.

² Valores de tasa gravitacional basados en pruebas internas de catéteres ARROW.

³ Basado en ratios de flujo con solución salina por gravedad y altura del cabezal de 100 cm. Los ratios de flujo serían mayores con un infusor rápido o una bolsa de presión.

Información para pedidos



MAC: catéter de acceso multilumen

REF.	Ø	LONGITUD	MATERIAL	UDS/CAJA
SI-11142	9 Fr.	10 cm	PUR ²	5
SI-11242	9 Fr.	11,5 cm	PUR ²	5
SI-21142	9 Fr.	10 cm	PUR AGB ²	5


¹ XTW = pared extra delgada

² PUR = poliuretano, AGB = tecnología antimicrobiana Arrowgard Blue

Accesorios

- Protección frente a la contaminación: Cath-Gard de 80 cm con adaptador Twist Lock
- Obturador: 8 Fr.
- Accesorios: 1 x transductor de presión, 1 x jeringa Raulerson de 5 ml, 3 x gasas de 4" x 4", 1 x tapón de cierre sin ventilación, 1 x tapón de cierre ventilado, 1 x válvula de alto flujo de cuatro vías

Diseño del lumen (Ga.)

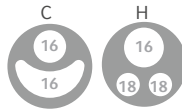

CVC para Introdutores MAC

REF.	LUMEN	Ø	LONGITUD CON MAC	LUMEN INTERNO (GA.)	DISEÑO	MATERIAL	UDS/CAJA
ML-00701	1	7 Fr.	14 cm			PUR	5
ML-00702	2	7 Fr.	16 cm	16D-16P	C	PUR	5
ML-00703	3	7 Fr.	16 cm	16D-18M-18P	H	PUR	5

Accesorios para sistemas introductores percutáneos

REF.	PARA USO CON CATÉTER	LONGITUD	CONEXIÓN	COLOR	UDS/CAJA
SA-09847	4-7 Fr.	80 cm	Adaptador Tuohy Borst	Azul	10
ST-09807	7-7,5 Fr.	80 cm	Adaptador Tuohy Borst	Azul	25
ST-09880	7-7,5 Fr.	80 cm	Sin bloqueo	Azul	25
ST-09870	7 Fr.	80 cm	Twist Lock	Azul	25
ST-09875	7-7,5 Fr.	80 cm	Twist Lock	Amarillo	25
ST-09885	8-8,5 Fr.	80 cm	Twist Lock	Negro	25

Guía


Longitud: 45 cm; Diámetro: 0,89 mm/0,035"; punta: Punta en J/recta; marcas: Sí; Arrow Advancer: Sí

Aguja de inserción

Longitud: 6,35 cm; Diámetro: 18 G¹

Conector multilumen plano

Fácil de fijar, diseñado para quedar plano y así ofrecer comodidad al paciente

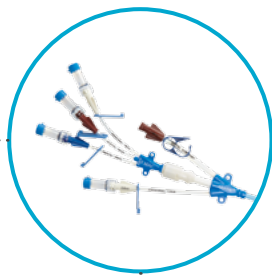

Posibilidad de uso de hasta 5 lúmenes

Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos –una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas no cubiertas– para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia sanitaria. Nuestra cartera es variada, con soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, servicios de urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información visite teleflex.com.

Teleflex es el responsable de Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüschi y Weck, marcas de confianza unidas por la percepción de un objetivo común.

Sede corporativa

Teléfono +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, Estados Unidos

Oficinas regionales

Estados Unidos: Teléfono +1 919 544 8000, Llamada gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, Estados Unidos

Latinoamérica: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, Estados Unidos

Internacional: Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Alemania +49 (0)7151 406 0

Australia/Nueva Zelanda 1300 360 226

Austria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)905 943 9000

China (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

China (Pequín) +86 (0)10 6418 5699

Corea +82 2 536 7550

España +34 918 300 451

Francia +33 (0)5 62 18 79 40

Grecia +30 210 67 77 717

India +91 (0)44 2836 5040

Italia +39 0362 58 911

Japón +81 (0)3 6632 3600

México +52 55 5002 3500

Países Bajos +31 (0)88 00 215 00

Portugal +351 22 541 90 85

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

República de Eslovaquia +421 (0)3377 254 28

República Checa +420 (0)495 759 111

Singapur (SEA, países sin ventas directas) +65 6439 3000

Suiza +41 (0)31 818 40 90

Suráfrica +27 (0)11 807 4887

Si precisa más información, visite teleflex.com.

Teleflex, el logo de Teleflex, Arrow, Arrow Advancer, Arrowgard, Cath-Gard, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüschi, TwistLock e Weck son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en Estados Unidos y otros países.

La información de este documento no sustituye las Instrucciones de Utilización del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local. Toda la información está actualizada en el momento de la impresión (07/2016). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. © 2016 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos.