

Teleflex è un fornitore globale di tecnologie mediche volte a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone. Perseguiamo l'innovazione orientata allo scopo, per cercare di individuare le esigenze cliniche ancora da soddisfare, in modo da garantire vantaggi a pazienti e medici. La nostra gamma di prodotti è estremamente varia, con soluzioni che spaziano dai campi dell'accesso vascolare e dell'interventistica, a quelli della chirurgia, anestesia, cardiologia, urologia, medicina di emergenza e terapia respiratoria. Tutti i dipendenti di Teleflex a livello mondiale sono consapevoli del fatto che ciò che facciamo ogni giorno fa la differenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito teleflex.com.

Teleflex è proprietaria di Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsçh e Weck – tutti marchi di fiducia uniti da un obiettivo comune.

Sede centrale

Tel. +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Sedi locali

Stati Uniti: Tel. +1 919 544 8000, Numero verde 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

America Latina: Tel. +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Internazionale: Telefono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

Australia/Nuova Zelanda 1300 360 226

Austria +43 (0)1 402 47 72

Belgio +32 (0)2 333 24 60

Canada +1 (0)905 943 9000

Cina (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

Cina (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

Corea +82 2 536 7550

Francia +33 (0)5 62 18 79 40

Germania +49 (0)7151 406 0

Giappone +81 (0)3 6632 3600

Gran Bretagna +44 (0)1494 53 27 61

Grecia +30 210 67 77 717

India +91 (0)44 2836 5040

Italia +39 0362 58 911

Messico +52 55 5002 3500

Paesi Bassi +31 (0)88 00 215 00

Portogallo +351 22 541 90 85

Repubblica Ceca +420 (0)495 759 111

Repubblica Slovacca +421 (0)3377 254 28

Singapore (Paesi SEA a vendita indiretta) +65 6439 3000

Spagna +34 918 300 451


Sudafrica +27 (0)11 807 4887

Svizzera +41 (0)31 818 40 90


Per ulteriori informazioni, visitare il sito teleflex.com.

Teleflex, il logo Teleflex, Arrow, Arrow Advancer, Arrowg+ard, Cath-Gard, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsçh, TwistLock e Weck sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Teleflex Incorporated o delle sue affiliate, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le informazioni riportate in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti presenti in questo catalogo possono non essere disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi al proprio rappresentante locale. Tutti i dati sono stati aggiornati al momento della stampa (05/2016). Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso. © 2016 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti riservati.

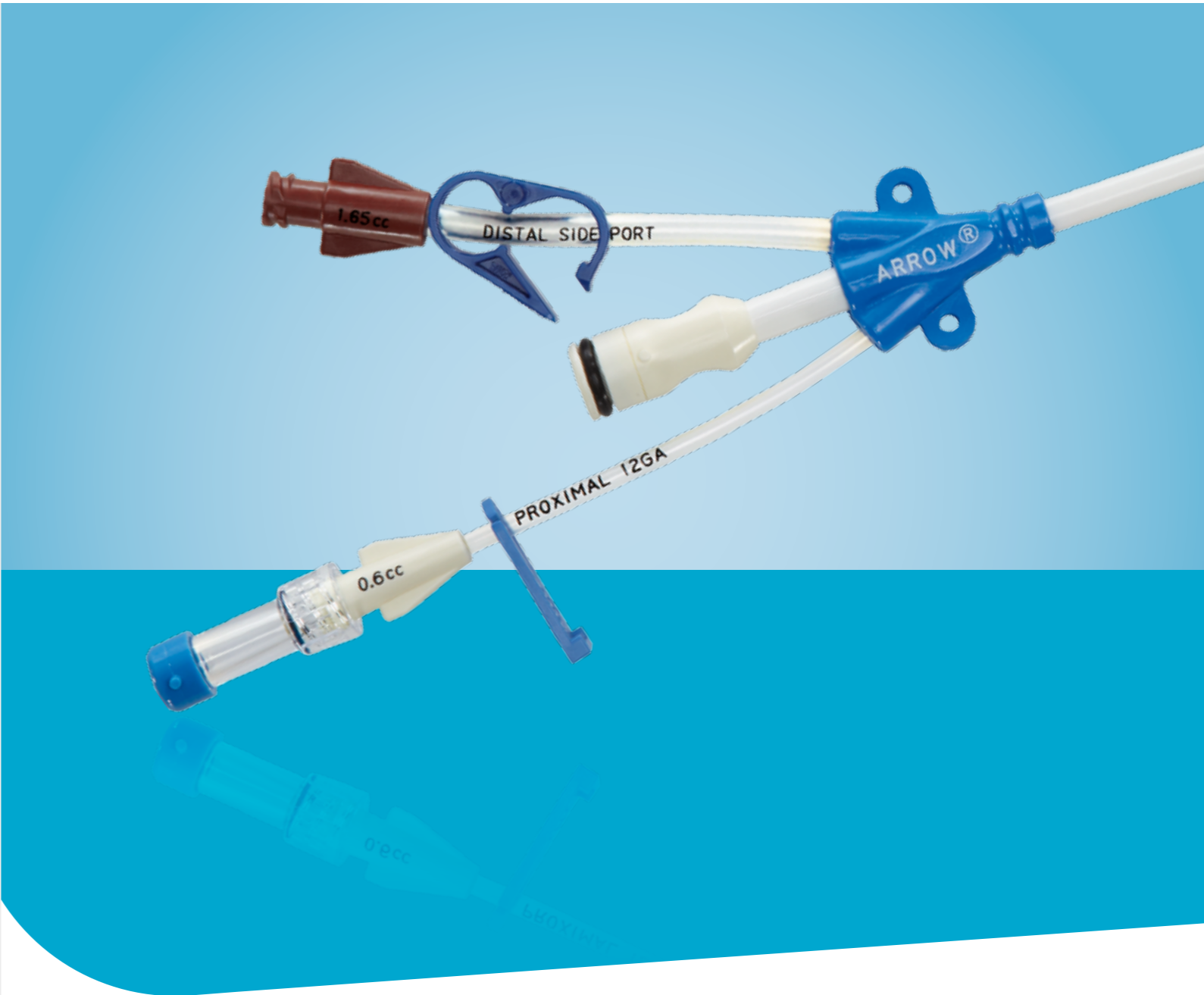

Arrow
MAC
con Tecnologia antimicrobica ARROWg+ard

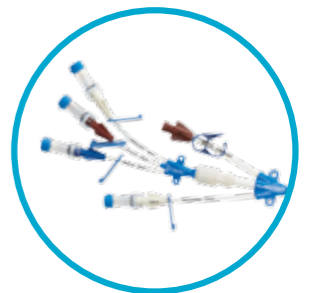

L'alto flusso incontra la massima versatilità

La velocità del flusso conta

Quando la velocità di flusso conta, soprattutto quando il fattore tempo è una condizione critica, il catetere per accesso multi-lume Arrow MAC di Teleflex fa la differenza.

- Soddisfa una vasta gamma di tipi di paziente:
 - Shock Settico
 - Cardiaco
 - Rianimazione da trauma
 - Trapianto
- Elevate velocità del flusso di circa 30 litri per ora con la sola forza di gravità

Accesso versatile

Il catetere per accesso multi-lume MAC con tecnologia Arrowg+ard offre la comodità di introdurre altri dispositivi mantenendo elevata la velocità di flusso.

- Un CVC aggiuntivo (fino a tre lumi aggiuntivi)
- Un catetere per termodiluizione
- Catetere da stimolazione temporanea

Prestazioni consistenti

Il MAC presenta una rastrematura ottimale e un rivestimento idrofilico.

- Consente un facile inserimento del catetere attraverso la cute del paziente
- Il corpo in poliuretano è concepito per prevenire il kinking del catetere durante l'inserimento o l'uso

Visitare il sito www.arrowvascular.com/MAC per ulteriori informazioni su Arrow MAC

Velocità di flusso a confronto per dispositivo vascolare

IV ¹	PICC ²	INTRAOSSEO	CVC ³	INTRODUTTORE PERCUTANEO ²	MAC ³
1,2-6,3	1,6	5	3-6	12	29


Nota: Questa tabella mette a confronto il lume con flusso più alto per dispositivo di accesso vascolare. Le velocità del flusso di PICC, CVC, Introduttore Percutaneo e MAC sono velocità del flusso di soluzione salina a gravità. Le velocità del flusso IV e intraosseo sono basate su velocità di flusso con sacca a pressione e vengono fornite da un altro produttore.

Velocità del flusso MAC

LUME	VELOCITÀ DI FLUSSO (ML/H) ³
Distale (9 Fr.) senza catetere	29 920
Distale (9 Fr.) con catetere da 8 Fr.	12 180
Distale (9 Fr.) con catetere da 7 Fr.	19 810
Proximale (12 G) senza catetere	9 340

Protezione comprovata - Tecnologia ARROWg+ard

Arrow MAC con tecnologia ARROWg+ard incorpora la protezione antimicrobica a base di clorexidina per proteggere i vostri pazienti da infezioni ematiche correlate al catetere (CRBSI) come evidenziato da oltre 30 studi di efficacia e sicurezza.

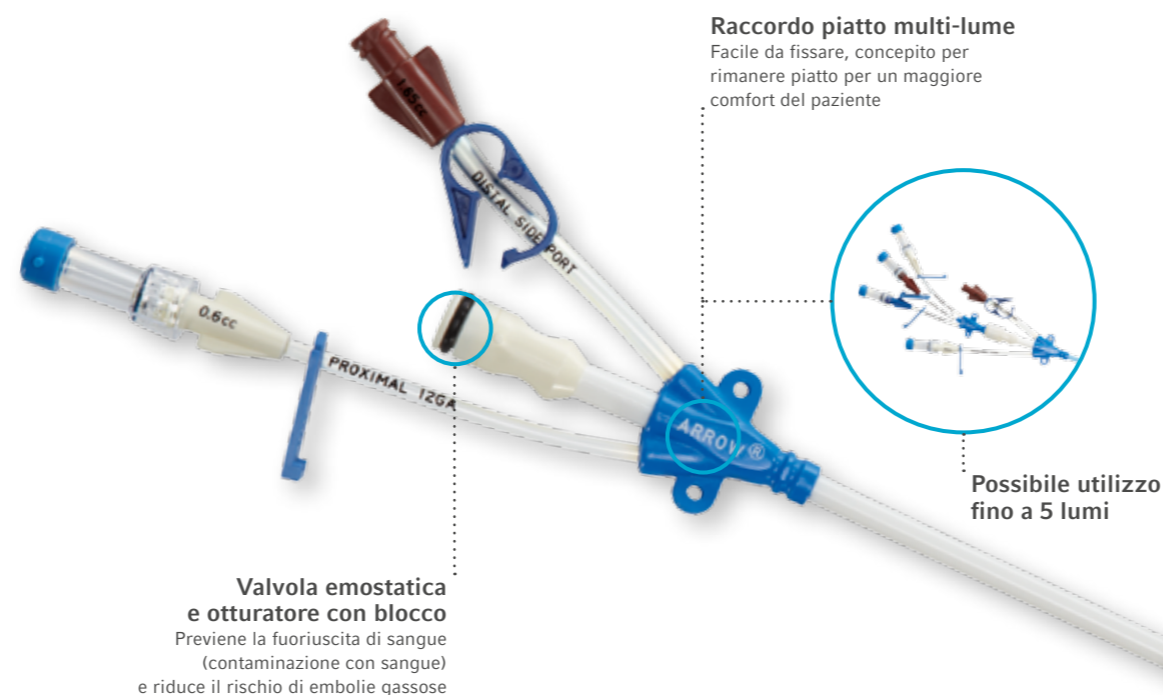

Informazioni per l'ordine

MAC – catetere per accesso multi-lume

ART.	Ø	LUNGHEZZA	MATERIALE	SET/ CONFEZIONE
SI-21142	9 Fr.	10 cm	PUR AGB ²	5

¹ XTW = a parete ultrasottile

² PUR = Poliuretano, AGB = tecnologia antimicrobica Arrowg+ard Blue

Accessori

- Protezione dalle contaminazioni: Cath-Gard, 80 cm, con adattatore Twist Lock
- Otturatore: 8 Fr.
- Accessori: 1 x trasduttore pressorio, 1 x siringa Raulerson 5 ml, 3 x compresse di garza 4" x 4", 1 x tappo di chiusura non ventilato, 1 x tappo di chiusura ventilato, 1 x valvola ad alto flusso a 4 vie

CVC per Introduttore MAC

ART.	LUME	Ø	LUNGHEZZA CON MAC	LUME INTERNO G	DISEGNO	MATERIALE	SET/ CONFEZIONE
ML-00701	1	7 Fr.	14 cm			PUR	5
ML-00702	2	7 Fr.	16 cm	16D-16P	C	PUR	5
ML-00703	3	7 Fr.	16 cm	16D-18M-18P	H	PUR	5

Accessori per sistemi di introduzione percutanea

ART.	PER USO CON CATETERE	LUNGHEZZA	ATTACCO	COLORE	SET/ CONFEZIONE
ST-09807	7-7,5 Fr.	80 cm	Tuohy-Borst	Blu	25
ST-09880	7-7,5 Fr.	80 cm	Senza blocco	Blu	25
ST-09870	7 Fr.	80 cm	TwistLock	Blu	25
ST-09875	7-7,5 Fr.	80 cm	TwistLock	Giallo	25
ST-09885	8-8,5 Fr.	80 cm	TwistLock	nero	25

Guida

Lunghezza: 45 cm; Diametro: 0,89 mm/0,035"; Punta: Punta J tip/dritta; marcatura: Si; Dispositivo di avanzamento Arrow: Si

Ago introduttore

Lunghezza: 6,35 cm; Diametro: 18 G¹

¹ <http://www.bd.com/infusion/pdfs/D16130.pdf>. Basato su flussi da 24 a 18 gauge.

² Valori di gravità basati su test interni Arrow

³ Sulla base di velocità del flusso con soluzione salina a gravità e una prevalenza di 100 cm. Le velocità di flusso sarebbero superiori con un infusore rapido o una sacca a pressione.