



Arrow
MAC
com Tecnologia ARROWg^{ard}



Alto Fluxo e Máxima Versatilidade

O Débito Importa

Quando o débito importa, especialmente em condições de emergência, o cateter de acesso multilúmen Arrow MAC da Teleflex é o produto adequado.

- Aplicável em diversos tipos de doentes:
 - Choque Séptico
 - Cardíaco
 - Ressuscitação Pós-Traumatismo
 - Transplante
- Débitos elevados de quase 30 litros por hora apenas sob gravidade

Acesso Versátil

O cateter de acesso multilúmen MAC com tecnologia Arrowg+ard facilita a introdução de outros dispositivos enquanto mantém débitos elevados.

- Um CVC companion (com até três lúmenes adicionais)
- Um cateter de termodiluição
- Um cabo marcapassos temporário

Desempenho Consistente

O MAC garante uma transição suave entre o dilatador e a ponta, assim como um revestimento hidrófilo.

- Facilita a inserção do cateter através da pele do doente
- O seu material em poliuretano robusto foi concebido para prevenir que o cateter se dobre durante a inserção ou utilização

Visite www.arrowvascular.com/MAC
para mais informações sobre o Arrow MAC

Comparação do débito por dispositivo vascular

IV ¹	PICC ³	INTRAÓSSEO	CVC ³	BAINHA INTRODUTORA ²	MAC ³
1.2-6.3	1.6	5	3-6	12	29

Nota: Esta tabela compara o lúmen de débito máximo por dispositivo de acesso vascular. O débito de PICC, CVC, bainha introdutora e MAC corresponde ao débito de solução salina sob gravidade. O débito das vias IV e intraóssea é baseado no débito da bolsa de pressão que é fornecido por outro fabricante.

Débito do MAC

LÚMEN	DÉBITO (ML/HR) ³
Distal (9 Fr.) sem cateter	29,920
Distal (9 Fr.) com cateter de 8 Fr.	12,180
Distal (9 Fr.) com cateter de 7 Fr.	19,810
Proximal (12 G) sem cateter	9,340

Proteção Comprovada – Tecnologia ARROWg+ard⁺

O Arrow MAC com Tecnologia ARROWg+ard possui uma proteção antimicrobiana à base de clorexidina para proteger os doentes contra infeções da corrente sanguínea relacionadas com cateteres (CRBSI) comprovada por mais de 30 estudos de eficácia e segurança.



Válvula de hemóstase e obturador de bloqueio

Impede o retrocesso do fluxo sanguíneo (contaminação sanguínea) e reduz o risco de embolia gasosa

1 <http://www.bd.com/infusion/pdfs/D16130.pdf>. Com base em débitos de calibre 24 a 18 gauges.

2 Valores do débito sob gravidade, com base em testes internos com o cateter Arrow.

3 Com base em débitos de solução salina sob gravidade à altura da cabeça, a 100 cm. Os débitos seriam mais elevados com um infusor rápido ou uma bolsa de pressão.

Informação para encomendas



MAC – Cateter de Acesso Multilúmen

REF.	Ø	COMPRIMENTO	MATERIAL	QUANT./CX.
SI-11142	9 Fr.	10 cm	PUR ²	5
SI-11242	9 Fr.	11,5 cm	PUR ²	5
SI-21142	9 Fr.	10 cm	PUR AGB ²	5


¹ XTW = Parede extra fina

² PUR = Poliuretano, AGB = Tecnologia antimicrobiana Arrowgard Blue

Acessórios

- Protecção contra contaminação: Cath-Gard de 80 cm com adaptador TwistLock
- Obturador: 8 Fr.
- Acessórios: 1 x transdutor de pressão, 1 x seringa de Raulerson de 5 ml, 3 x gazes de 4" x 4", 1 x tampão não ventilado, 1 x tampão ventilado, 1 x válvula de quatro vias de alto fluxo

Desenho dos lúmenes (G)

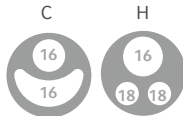

CVC PARA INTRODUTORES MAC

REF. ^A	LÚMEN	Ø	COMPRIMENTO COM MAC	LÚMEN INTERNO (G)	DESENHO	MATERIAL	QUANT./CX.
ML-00701	1	7 Fr.	14 cm			PUR	5
ML-00702	2	7 Fr.	16 cm	16D-16P	C	PUR	5
ML-00703	3	7 Fr.	16 cm	16D-18M-18P	H	PUR	5

Acessórios para sistemas de introdutores percutâneos

REF. ^A	PARA UTILIZAR COM CATETER	COMPRIMENTO	CONEXÃO	COR	QUANT./CX.
SA-09847	4-7 Fr.	80 cm	Adaptador Tuohy-Borst	Azul	10
ST-09807	7-7,5 Fr.	80 cm	Adaptador Tuohy-Borst	Azul	25
ST-09880	7-7,5 Fr.	80 cm	Sem bloqueio	Azul	25
ST-09870	7 Fr.	80 cm	TwistLock	Azul	25
ST-09875	7-7,5 Fr.	80 cm	TwistLock	Amarelo	25
ST-09885	8-8,5 Fr.	80 cm	TwistLock	Preto	25

Fio-guia


Comprimento: 45 cm; Diâmetro: 0,89 mm/0.035"; Ponta: Ponta em J / recta; Marca: Sim; Arrow Advancer: Sim

Agulha Introdutora

Comprimento: 6,35 cm; Diâmetro: 18 G¹

Conector plano multilúmen

Fácil de fixar, concebido para ficar plano para conforto do doente

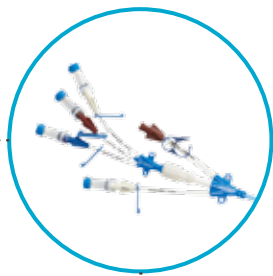

Podem ser utilizados até 5 lúmenes

Teleflex é um provedor global de tecnologias médicas concebidas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Aplicamos a inovação orientada – numa procura constante para identificar necessidades clínicas ainda não satisfeitas – em benefício dos doentes e dos prestadores de cuidados de saúde. O nosso portfólio é diversificado, e inclui soluções nas áreas de acesso vascular e intervencionista, cirurgia, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo sabem que o que fazemos marca a diferença. Para mais informação, visite teleflex.com.

A Teleflex agrupa as marcas Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsç e Weck – marcas de confiança, unidas por um propósito comum.

Sede corporativa

Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA

Delegações regionais

Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, chamada gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

Internacional: Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

África do Sul +27 (0)11 807 4887

Alemanha +49 (0)7151 406 0

Austrália / Nova Zelândia 1300 360 226

Áustria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)905 943 9000

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

China (Xangai) +86 (0)21 6163 0965

Coreia +82 2 536 7550

Espanha +34 918 300 451

França +33 (0)5 62 18 79 40

Grécia +30 210 67 77 717

Holanda +31 (0)88 00 215 00

Índia +91 (0)44 2836 5040

Itália +39 0362 58 911

Japão +81 (0)3 6632 3600

México +52 55 5002 3500

Portugal +351 22 541 90 85

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

República Checa +420 (0)495 759 111

República Eslovaca +421 (0)3377 254 28

Singapura (venda indireta para outros países do Sudoeste Asiático) +65 6439 3000

Suíça +41 (0)31 818 40 90

Para mais informação, por favor visite teleflex.com.

Teleflex, o logótipo Teleflex, Arrow, Arrow Advancer, Arrow+ard, Cath-Gard, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsç, TwistLock e Weck são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Teleflex Incorporated ou das suas afiliadas, nos EUA e/ou noutros países.

A informação contida no presente documento não constitui um substituto das Instruções de utilização do produto. Os produtos incluídos neste catálogo podem não estar disponíveis em todos os países. Contacte o seu representante local. Todos os dados são atuais à data da impressão (09/2016). Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio. © 2016 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados.