



Arrow Midline

Acceso venoso periférico sencillo y seguro

El objetivo de Teleflex es estar siempre a la vanguardia. Nuestros productos están diseñados, fabricados y distribuidos para nuestros clientes, los profesionales sanitarios. Nuestra misión consiste en esforzarnos en ofrecer precisión en el detalle para proporcionar seguridad a la vez que comodidad tanto del paciente como del profesional sanitario.

A la vanguardia en prevención de riesgos

Inspirado por la misma preocupación con la seguridad que ha llevado a nuestros kits de catéter venoso central a ser líderes de la industria, el kit de catéter de Arrow Midline proporciona una amplia gama de componentes de alta calidad.

Sencillez de uso para una calidad máxima

Con esta premisa en mente, Teleflex se enorgullece de presentar el kit básico de reciente desarrollo que incluye el catéter Arrow Midline. El kit solo contiene componentes de alta

calidad. El nuevo introduccionador pelable GlideThru de Arrow, compuesto por la nueva conexión con bloqueo giratorio y el nuevo diseño del conector, facilita la transición suave del dilatador al introduccionador, reduciendo así la necesidad de realizar una incisión en la piel.

El dispositivo clavaagujas sharpsaway II protege al implantador de daños por pinchazo con aguja.

Esto es solo un ejemplo de la atención que Teleflex pone en el diseño de sus kits para facilitar el trabajo del profesional sanitario.



Beneficios



Para el médico

Un vaso sanguíneo periférico de mayor calibre puede soportar la solución de terapia intravenosa




Para el Centro

La terapia no durará más de 1-4 semanas



Para el paciente

Ayuda a proteger al paciente de múltiples punciones de aguja

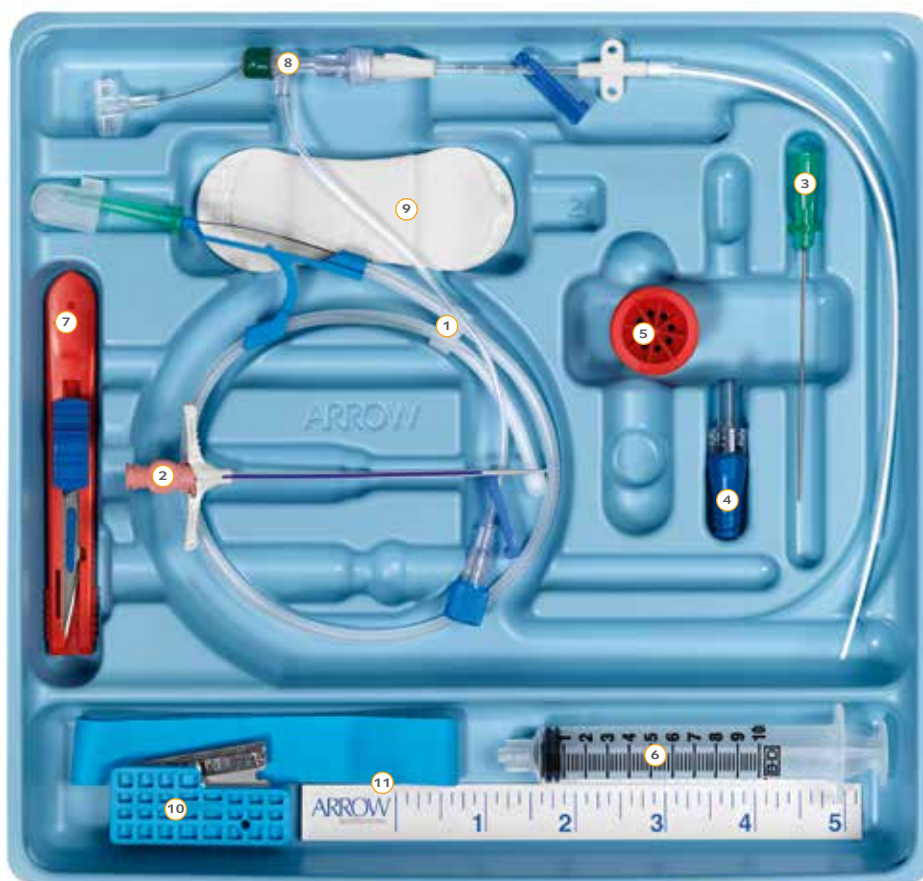

Contenido del kit

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Guía de nitinol con sistema de avance de 0.018" x 45 cm atraumático y resistente a acodamientos ② Introdutor pelable GlideThru transición suave del dilatador al introdutor ③ Aguja de inserción ecogénica, 7 cm, visibilidad mejorada para inserciones guiadas por ecografía | <ul style="list-style-type: none"> ④ Conectores sin aguja reducen el riesgo de contaminación y el reflujo sanguíneo ⑤ Dispositivo clavaagujas SharpsAway II protege al implantador de daños por pinchazo con aguja ⑥ Jeringa de 10 ml ⑦ Bisturí de seguridad n.º 11 | <ul style="list-style-type: none"> ⑧ Catéter Arrow Midline ⑨ Dispositivo de fijación sin sutura proporciona fijación atraumática y estable ⑩ Cortador de catéteres ⑪ Torniquete y cinta métrica |
|---|---|---|

Información para pedidos

ARROW

REF.	N.º DE LÚMENES	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	TASA DE FLUJO	LONGITUD	CANTIDAD
EU-02031-ML	1	3 Fr.	20 G	300 mL/hr	20 cm	5
EU-02041-ML	1	4 Fr.	18 G	1690 mL/hr	20 cm	5
EU-02051-ML	1	5 Fr.	18 G	3060 mL/hr	20 cm	5

* Tasa de flujo gravitacional



teleflex.com

Referencias:

- Grip-Lok es una marca registrada de Zefon International, Inc.
- Trerotola S., Stravropoulos S., Mondeschein J., Patel A., Fishman N., Fuchs B., Kolansky D, Kasner S., Pryor J., Chittams J.
- "Triple-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter in Patients in the Critical Care Unit: Prospective Evaluation." Radiology, 2010; 256 (1.2).
- MicroCLAVE Conector de desplazamiento neutro es un producto de propiedad exclusiva y fabricación ICU Medical

Teleflex, el logotipo de Teleflex y Arrow son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o de sus filiales, en EE.UU y/u otros países. La información contenida en este documento no sustituye las instrucciones de uso del producto. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor contacte con el delegado comercial de su zona. Los datos están actualizados a fecha de impresión (03/2017). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. © 2017 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. 94 11 36 - 00 00 03 - REV B - 03 17 01

Distribuido por:
Oficinas centrales de Teleflex, Irlanda · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath
 Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
España · Tel. +34 918 300 451 · info.es@teleflex.com
 www.teleflex.com

Teleflex