



## ARROW TRANSRADIALER ZUGANG

Entwickelt für kardiologische und vaskuläre Interventionen

### MEHRFACHE OPTIONEN FÜR DEN ARZT. EINE OPTION FÜR DEN PATIENTEN.

Unabhängig davon, ob der Zugang über die A. radialis in Ihrem Labor Routine ist oder nicht, kann die Patienten-anatomie eine Katheteranlage erschweren. Teleflex hat mit seiner Marke ARROW in Zusammenarbeit mit Ärzten ein neues transradiales Produkt für anspruchsvolle Patienten entwickelt.



#### OPTIONEN FÜR DEN ZUGANG ÜBER DIE RADIALE ARTERIE

- schnell sichtbarer Blutrückfluss durch den transparenten Anschluss
- dünnwandige Mikropunktionskanüle
- gleitbeschichtete Kanüle für einen vereinfachten Zugang durch Haut und Arterienwand
- direkter Zugang oder Katheterüber-Nadel-Optionen



#### VERRINGERN SIE DAS RISIKO EINES ARTERIENSPASMUS


- verschiedene Führungsdrahtoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse von Arzt und Patient
- Edelstahlröhre und Drähte mit Nitinol-Mandrin, teils mit formbarer Spitze zum Steuern in gewundenen Gefäßen
- 45 und 60 cm Länge, je nach Schleusenlänge



#### DANK DES SPEZIELLEN DESIGNS KANN AUF EINEN HAUTEINSCHNITT VERZICHTET WERDEN

- Prädilatation<sup>1</sup> verringert die Notwendigkeit eines Hauteinschnitts bei größeren French-Größen
- glatte, atraumatische Schleuse am Übergang zum Dilatator
- die hydrophile Beschichtung erleichtert die Schleuseneinführung

<sup>1</sup> Patent anhängig

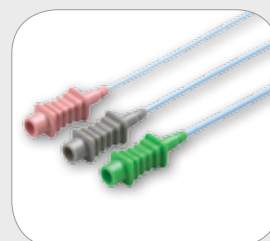

#### DESIGN, BEI DEM FUNKTION AN ERSTER STELLE STEHT

- neues, ergonomisches Design
- verbesserter Schnappverschluss bei der Verbindung mit dem Schleusenventil
- längerer Luer-Anschluss zum Vorspülen mit der Spritze

## BESTELLINFORMATIONEN

### TRANSRADIAL FÜR DEN DIREKTEN ZUGANG


REF. NR.	SCHLEUSEN-GRÖSSE	SCHLEUSEN-LÄNGE	DILATATOR-AUSFÜHRUNG <sup>1</sup>	MIKROPUNKTIONS-KANÜLE	EDELSTAHL-FÜHRUNGSDRAHT MIT WEICHER SPITZE	VE
AA-10407-1	4 Fr.	7 cm	gerade	2,5 cm	45 cm	5
AA-10411-1	4 Fr.	11 cm	gerade	2,5 cm	45 cm	5
AA-10507-1	5 Fr.	7 cm	spezial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10511-1	5 Fr.	11 cm	spezial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10524-1	5 Fr.	24 cm	spezial	2,5 cm	60 cm	5
AA-10607-1	6 Fr.	7 cm	spezial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10611-1	6 Fr.	11 cm	spezial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10624-1	6 Fr.	24 cm	spezial	2,5 cm	60 cm	5

REF. NR.	SCHLEUSEN-GRÖSSE	SCHLEUSEN-LÄNGE	DILATATOR-AUSFÜHRUNG <sup>1</sup>	MIKROPUNKTIONS-KANÜLE	NITINOL-FÜHRUNGSDRAHT MIT SUPERWEICHER SPITZE	VE
AA-15511-3	5 Fr.	11 cm	spezial	4,0 cm	45 cm	5
AA-15511-S	5 Fr.	11 cm	gerade	4,0 cm	45 cm	5
AA-15611-3	6 Fr.	11 cm	spezial	4,0 cm	45 cm	5
AA-15611-S	6 Fr.	11 cm	gerade	4,0 cm	45 cm	5

### TRANSRADIAL FÜR KATHETER-ÜBER-NADEL-TECHNIK

REF. NR.	SCHLEUSEN-GRÖSSE	SCHLEUSEN-LÄNGE	DILATATOR-AUSFÜHRUNG <sup>1</sup>	KATHETER ÜBER NADEL	EDELSTAHL-FÜHRUNGSDRAHT MIT WEICHER SPITZE	VE
AA-20407-1	4 Fr.	7 cm	gerade	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20411-1	4 Fr.	11 cm	gerade	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20507-1	5 Fr.	7 cm	spezial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20511-1	5 Fr.	11 cm	spezial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20524-1	5 Fr.	24 cm	spezial	20g / 3,2 cm	60 cm	5
AA-20607-1	6 Fr.	7 cm	spezial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20611-1	6 Fr.	11 cm	spezial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20624-1	6 Fr.	24 cm	spezial	20g / 3,2 cm	60 cm	5

<sup>1</sup> Patent anhängig

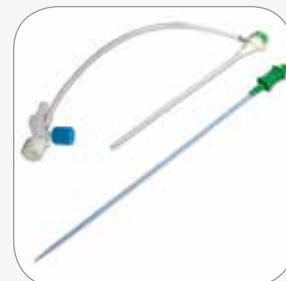

verschiedene Schleusen



verschiedene Führungsdrahtoptionen



Optionen für den Zugang

#### VERTRIEB DURCH:

**TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND** · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

**DEUTSCHLAND** Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

**ÖSTERREICH** Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

**SCHWEIZ** Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

**WWW.TELEFLEX.COM**

94 11 00 · 00 00 00 · REV B · 10 12 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Teleflex**