



ARROW ULTRAQUIK

Nadeln für periphere Nervenblockaden

PRODUKTINFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- fünf eingearbeitete Rillen am distalen Ende der Kanülnadel zur leichteren Identifizierung der Nadelspitze unter Ultraschall
- nicht isolierter Nadelschaft für Nadelführung unter Ultraschall
- atraumatischer B-Schliff
- leicht ablesbare Zentimetermarkierungen
- ergonomischer Nadelansatz
- Injektionsschlauch mit erweiterter Länge
- in vier Längen erhältlich:
 - 50 mm
 - 70 mm
 - 100 mm
 - 150 mm

IN ZUSAMMENARBEIT MIT ÄRZTEN ENTWICKELTES NADELDESIGN

ARROW UltraQuik Nadeln für periphere Nervenblockaden erhöhen insgesamt den Erfolg bei ultraschallkontrollierten Verfahren. Die in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelten UltraQuik Nadeln sind so konstruiert, dass sie die Genauigkeit einer peripheren Single-Shot Injektion erhöhen, indem sie die Sichtbarkeit unter Ultraschall sowie die Kontrolle und Lenkbarkeit bei der Positionierung der Nadel verbessern.



Für eine bessere Sicht- und Lenkbarkeit der Nadel unter Ultraschall ist der Nadelschaft nicht isoliert, und das distale Ende weist fünf eingearbeitete Rillen auf. Die Zentimetermarkierungen der Kanüle sind für die visuelle Bestätigung der Einführtiefe hilfreich.

ARROW Nadeln für periphere Nervenblockaden zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Handhabung aus, wobei der atraumatische B-Schliff für eine optimale Balance zwischen taktilem Gefühl und Penetrationskraft sorgt und der ergonomische Nadelansatz besonders gut in der Hand liegt.

Nicht zuletzt trägt auch die Länge des Einführungsschlauchs dazu bei, das Kontaminierungsrisiko zu reduzieren.



VERBESSERTER FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN DER ARROW ULTRAQUIK PNB-NADEL

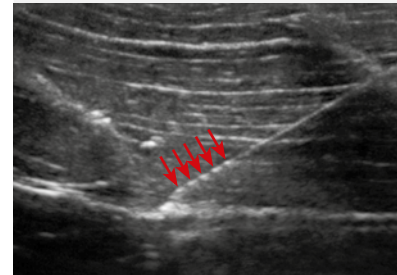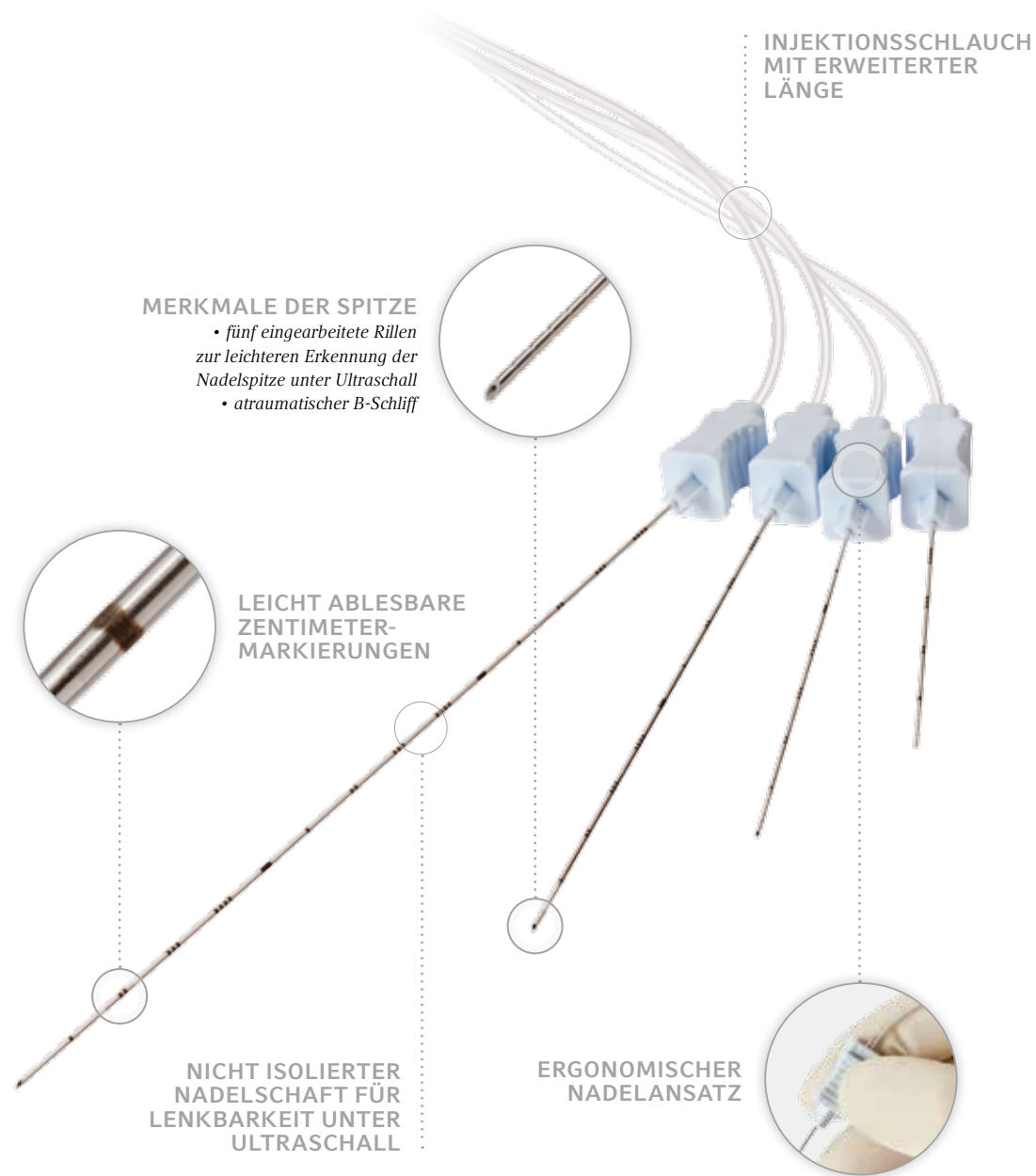

UltraQuik Nadel für periphere Nadelblockaden unter Ultraschall im Schweinemodell unter Verwendung eines SonoSite® S-Nerve™ Geräts



UltraQuik verfügt über fünf eingearbeitete Rillen zur leichteren Identifizierung der Nadelspitze unter Ultraschall

ULTRAQUIK PNB-NADEL		ARROW
ART. NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	VE
AB-22050-US	22 G 50 mm	25
AB-22070-US	22 G 70 mm	25
AB-21100-US	21 G 100 mm	25
AB-21150-US	21 G 150 mm	25

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND

Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 11 18 - 00 00 00 · REV A · 07 14 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

SonoSite und S-Nerve sind Marken oder eingetragene Marken von Sonosite, Inc. Teleflex, Arrow und UltraQuik sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen.

©2013 Teleflex Incorporated
Alle Rechte vorbehalten.

Teleflex