




ARROW ULTRAQUIK

Βελόνες αποκλεισμού περιφερικών νεύρων

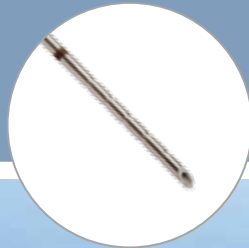

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- πέντε αυλακωτοί δακτύλιοι στο περιφερικό άκρο της βελόνας που βοηθούν τους ιατρούς να ταυτοποιήσουν το άκρο της βελόνας μέσω υπερήχων
- στέλεχος βελόνας χωρίς μόνωση για καθοδήγησή της μόνο μέσω υπερήχων
- ατραυματικό άκρο B-bevel
- ευανάγνωστα σημάδια ανά εκατοστό
- εργονομική λαβή βελόνας
- εκτεταμένο μήκος του σωλήνα έγχυσης
- διατίθεται σε τέσσερα μήκη:
 - 50 mm
 - 70 mm
 - 100 mm
 - 150 mm

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ



Οι βελόνες αποκλεισμού περιφερικών νεύρων ARROW UltraQuik έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βελτιώσουν καθολικά τις διαδικασίες αποκλεισμού με καθοδήγηση μέσω υπερήχων. Οι εμπνευσμένες από τους ιατρούς βελόνες UltraQuik έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να αυξάνουν την ακρίβεια κατά τη χορήγηση περιφερικής αναισθησίας με μία έγχυση, ενισχύοντας την ορατότητα μέσω υπερήχων και τον έλεγχο των χειρισμών κατά την τοποθέτηση της βελόνας.

Για να γίνει όσο απλούστερη γίνεται για τους ιατρούς η ταυτοποίηση και η καθοδήγηση της βελόνας μέσω υπερήχων, το στέλεχος της βελόνας δεν είναι μονωμένο και το περιφερικό άκρο της βελόνας φέρει αυλακωτούς

δακτύλιους. Επίσης, υπάρχουν σημάδια τοποθέτησης ανά εκατοστό στο στέλεχος που βοηθούν στην οπτική επιβεβαίωση του βάθους εισαγωγής. Οι βελόνες αποκλεισμού περιφερικών νεύρων ARROW διακρίνονται και από την εύκολη χρήση τους, με ένα ατραυματικό άκρο τύπου B-bevel που παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας ψηλάφησης και της διείσδυσης και με μια εργονομική λαβή της βελόνας που είναι ιδιαίτερα εύκολη στο κράτημα. Τέλος, το εκτεταμένο μήκος του σωλήνα βοηθά στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ARROW ULTRAQUIK

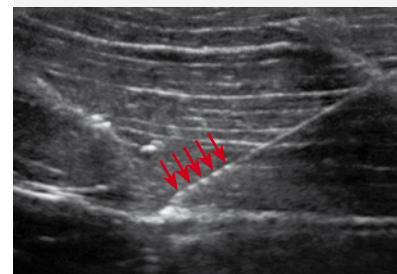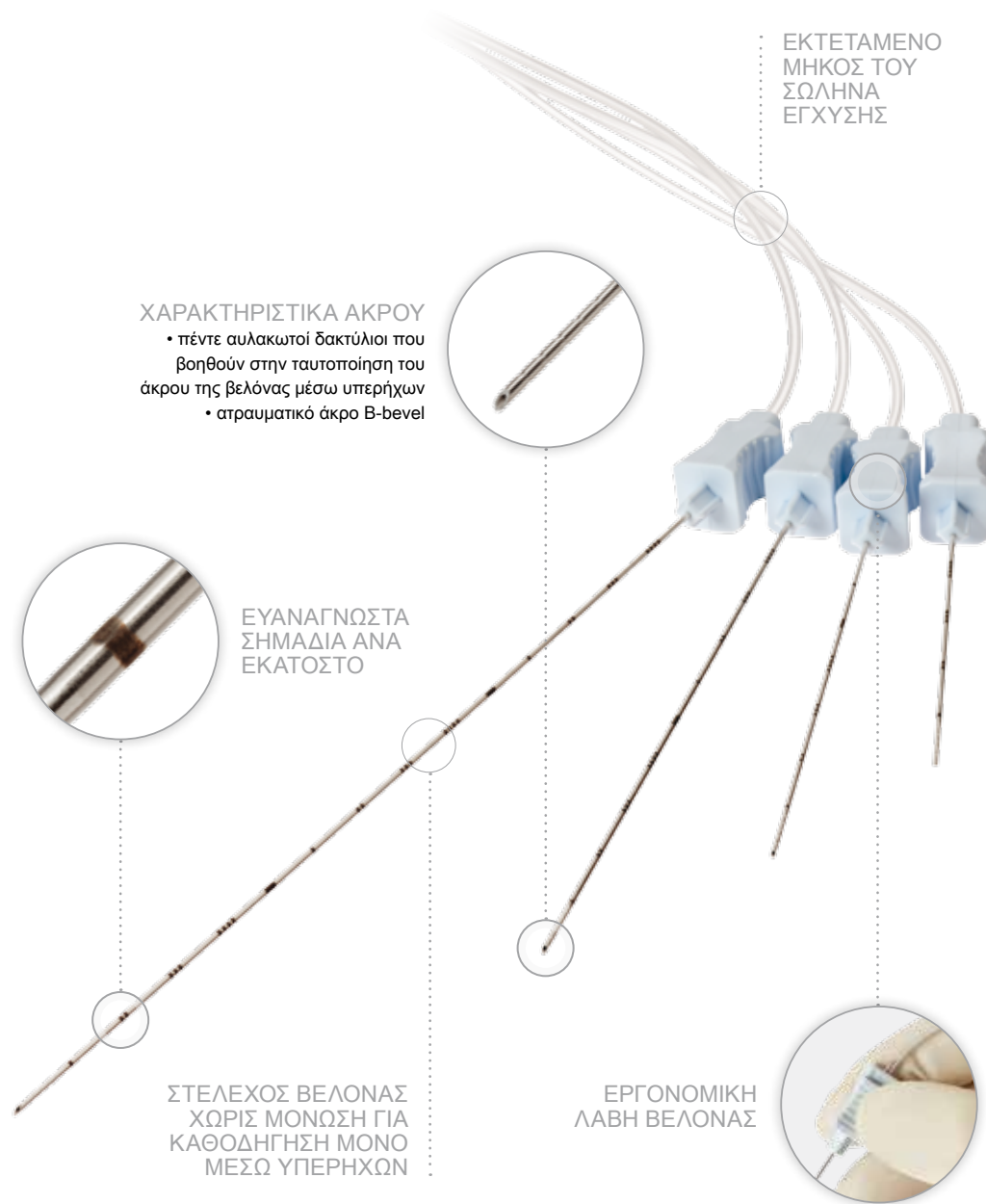

Βελόνα αποκλεισμού περιφερικών νεύρων UltraQuik υπό καθοδήγηση υπερήχων σε μοντέλο χοίρου με χρήση του μηχανήματος SonoSite® S-Nerve™



Η βελόνα UltraQuik φέρει πέντε αυλακωτούς δακτυλίους που βοηθούν στην ταυτοποίηση του άκρου της βελόνας μέσω υπερήχων

ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ULTRAQUIK ARROW

Κωδ.	Περιγραφή προϊόντος	Ποσότητα
AB-22050-US	22 Ga. 50 mm	25
AB-22070-US	22 Ga. 70 mm	25
AB-21100-US	21 Ga. 100 mm	25
AB-21150-US	21 Ga. 150 mm	25

Τα SonoSite και S-Nerve είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sonosite, Inc. Τα Teleflex, Arrow και UltraQuik είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Teleflex Incorporated ή των θυγατρικών της.

©2013 Teleflex Incorporated.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.