

## Arrow Epiduralset und CSE-Set Versorgungsqualität, die Ihre Ansprüche erfüllt

### Kontrolle von Komplikationen im Epiduralraum

Teleflex arbeitet unablässig daran, Techniken und Technologien für das postoperative und langfristige Schmerzmanagement zu verbessern. Zunehmende Bedeutung erlangt dabei die Regionalanästhesie, die eine Kontrolle der Stressbelastung für die Patienten ermöglicht.

Zudem trägt sie dazu bei, kardiopulmonale Komplikationen zu verringern und die Wartezeiten im OP zu verkürzen.

### Zuverlässige Leistung

Das Arrow Epiduralset von Teleflex besteht aus einer sorgfältig durchdachten und daher hoch zuverlässigen Tuohy-Epiduralkanüle und einem Epiduralkatheter aus Nylon mit Multiport-Spitzenkonfiguration. Das Anästhetikum wird durch den Katheter injiziert und durch die drei Ports an dessen distalem Ende abgegeben. Der knickfeste Katheter

weist eine runde und glatte Spitze auf, um das Risiko traumatischer Verletzungen zu kontrollieren. Gleichzeitig ist der Katheter jedoch starr genug, um ohne Mandrin durch die Kanüle in den Epiduralraum eingeführt werden zu können. Ein röntgendichter Streifen sorgt im Bedarfsfall für Sichtbarkeit.

### Vorgehensweise bei einer kombinierten Epidural-/Spinalanästhesie

Das Arrow CSE (Combined Spinal-Epidural)-Set von Teleflex wurde als Hilfsmittel für CSE-Verfahren entwickelt und kommt dem Anspruch Ihrer Patienten entgegen. Damit lässt sich die traumatische Belastung der Patienten reduzieren, da nur eine einzige Punktion durchgeführt werden muss. Die rasch einsetzende Spinalanästhesie verkürzt die Wartezeit im OP.

#### Vorteile




**Der Kliniker**  
Kürzere Verfahrensdauer.



**Ihre Einrichtung**  
Effektives Schmerzmanagement verkürzt die Dauer des Krankenhausaufenthalts.



**Der Patient**  
Weniger Trauma.  
Wirksames Schmerzmanagement.  
Schnellere Erholung.

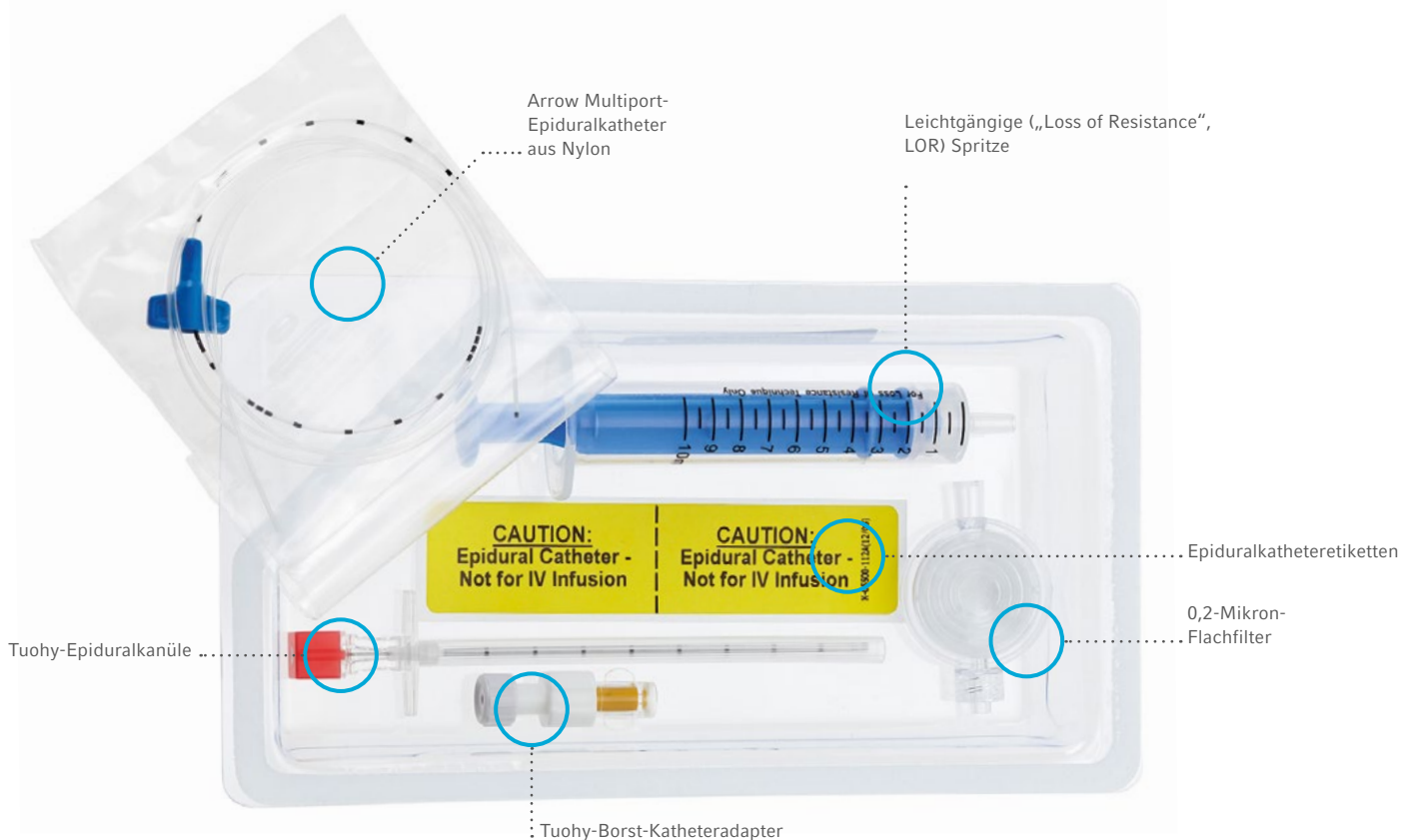

## Fakten zum Epiduralset und CSE-Set auf einen Blick

Einführungshilfe zum einfacheren Einführen des Katheters mit Präzision und Vielseitigkeit

Epiduralkatheter mit 3 gleichmäßig um den Katheterkörper herum angeordneten distalen Ports für einfache Aspiration von Flüssigkeit

Pencil-Point-Spinalkanüle im CSE-Set für sanftes Einführen

Steril  
Ohne Naturkautschuklatex hergestellt  
Ohne DEHP hergestellt

### Epiduralset und Arrow CSE-Set:

ART. NR.	LOR-SPRITZE, 10 ML	SPINALKANÜLE PENCIL POINT 27 G X 124 MM	EINHEITEN PRO KARTON
<b>Epiduralset</b>			
MPN-18020S	x		20
MPN-18020			20
<b>CSE Set</b>			
MPC-18020-S	x	x	20
MPC-18020		x	20

### Set-Bestandteile:

- 1 x Arrow Multiport-Epiduralkatheter aus Nylon mit Zentimetermarkierungen und Einführungshilfe, 20 G x 90 cm
- 1 x Tuohy-Epiduralkanüle mit fixierten Flügeln und Zentimetermarkierungen, 18 G x 90 mm
- 1 x 27 G Pencil-Point-Spinalkanüle (nur MPC-18020-S & MPC-18020)
- 1 x flacher 0,2-Mikron-Filter
- 1 x Tuohy-Borst-Katheteradapter
- 2 x Epiduralkatheteretiketten

Teleflex, das Teleflex Logo und Arrow sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (05/2016). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. © 2016 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. 94 08 00 - 00 00 00 · REV A · 05 16 01

**Teleflex**

Vertrieb durch: **Teleflex Headquarters International, Irland** · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park  
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com  
**Deutschland** Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com  
**Österreich** Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com  
**Schweiz** Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com  
[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)