

Arrow

## Kit pour péridurale et kit pour CSE

La qualité de soin que vous exigez pour vos patients

### Contrôle des complications dans l'espace péridural

Teleflex se donne pour objectif prioritaire l'amélioration de ses techniques et méthodes de gestion de la douleur postopératoire et à long terme. Permettant de contrôler le stress du patient, l'anesthésie locorégionale est en train de gagner en importance. Elle permet de réduire le risque de complications cardiaques et pulmonaires tout en permettant de raccourcir les délais d'attente au bloc opératoire.

### Performance fiable

Le kit pour péridurale Arrow de Teleflex se compose d'une aiguille de péridurale Tuohy méticuleusement conçue pour garantir une fiabilité maximale et d'un cathéter péridural en nylon doté d'une extrémité multi-orifices. L'anesthésique est injecté par le cathéter et se répartit dans les trois orifices situés au niveau de son extrémité distale. Le cathéter a été spécialement conçu pour résister à la plicature et est doté d'une extrémité arrondie et lisse afin de contrôler le risque

de traumatisme. De plus, ce cathéter est suffisamment rigide pour être introduit par une aiguille dans l'espace péridural sans nécessiter l'utilisation d'un mandrin. Une bande radio-opaque garantit une visibilité optimale, en cas de besoin.

### Utilisation dans le cadre d'une anesthésie péridurale et rachidienne combinée

Le kit pour CSE (anesthésie péridurale et rachidienne combinée) Arrow de Teleflex a été mis au point pour la procédure CSE et pour répondre aux besoins de vos patients. La ponction unique pour ces 2 anesthésies permet d'éviter plusieurs traumatismes au patient. Le déclenchement rapide de la rachianesthésie réduit le temps d'attente au bloc opératoire.

Avantages




**Le médecin**  
Procédure plus courte.



**Votre établissement**  
Une prise en charge efficace de la douleur réduisant la durée de l'hospitalisation.



**Le patient**  
Moins de traumatismes.  
Une prise en charge efficace de la douleur  
Une récupération plus rapide.

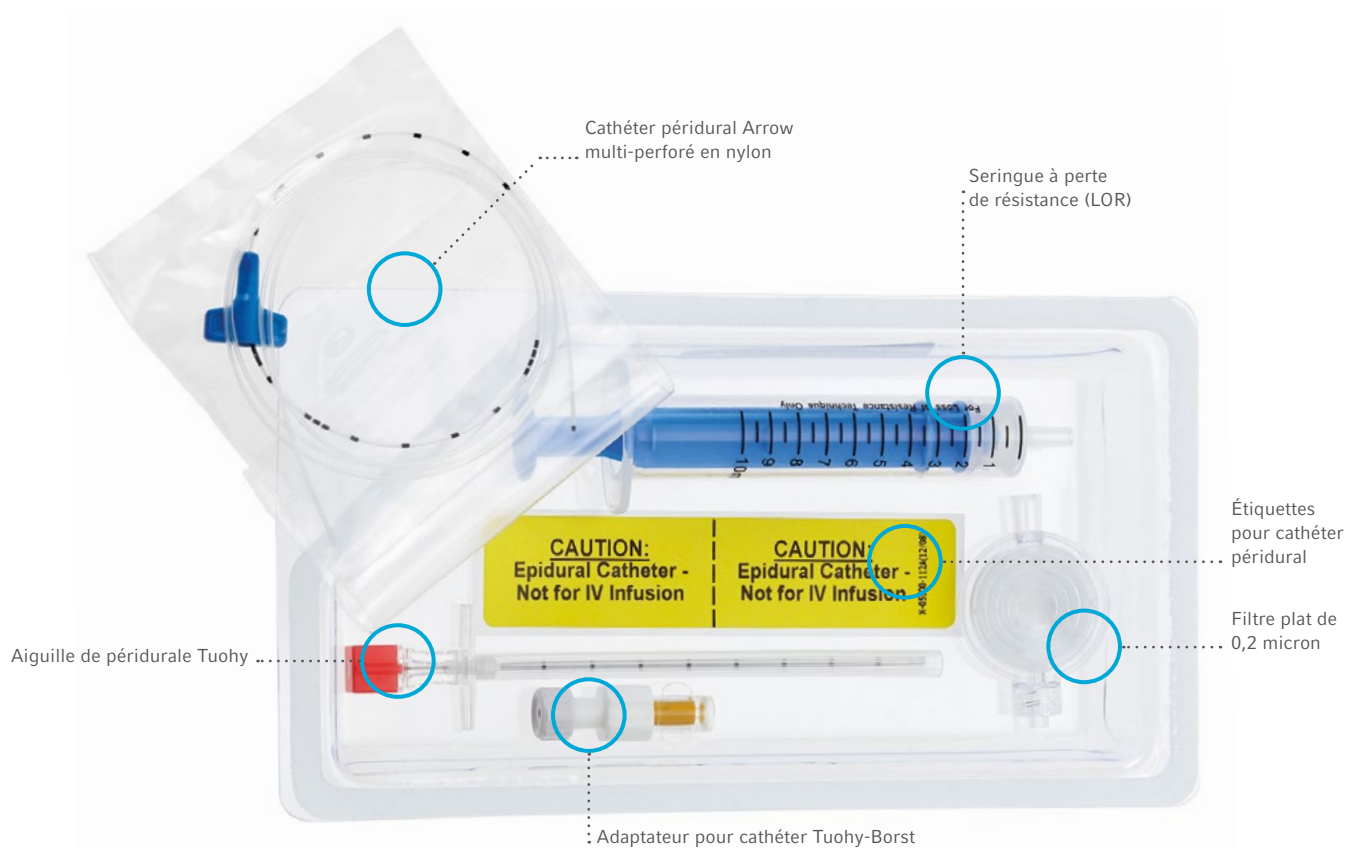

## Kit pour péridurale et kit CSE pour Péri-Rachi combinée En résumé

Dispositifs d'aide à l'introduction facilitant l'introduction du cathéter et garantissant précision et polyvalence

Cathéter péridural avec 3 orifices distaux répartis de façon homogène autour du corps du cathéter et facilitant l'aspiration des fluides

L'aiguille de rachianesthésie Pencil Point du kit pour CSE garantit une introduction en douceur

Stériles  
Fabriqués sans latex de caoutchouc naturel  
Fabriqués sans DEHP

### Kit pour péridurale et kit pour CSE Arrow :

RÉF.	SERINGUE LOR 10 ML	AIGUILLE DE RACHIANESTHÉSIE PENCIL POINT 27 G X 124 MM	UNITÉS PAR BOÎTE
Kit pour péridurale			
MPN-18020-S	x		20
MPN-18020			20
Set CSE			
MPC-18020-S	x	x	20
MPC-18020		x	20

### Composition du kit :

- 1 x cathéter péridural Arrow multi-perforé avec repères en centimètres et dispositif d'aide à l'introduction 20 G x 90 cm
- 1 x aiguille de péridurale Tuohy avec ailettes fixes et repères en centimètres 18 G x 90 mm
- 1 x aiguille de rachianesthésie Pencil Point 27 G (MPC-18020-S & MPC-18020 uniquement)
- 1 x filtre plat de 0,2 micron
- 1 x adaptateur pour cathéter Tuohy-Borst
- 2 x étiquettes pour cathéter péridural

Document à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Classe du Dispositif Médical: IIb. Organisme notifié: BSI – CE 0086 - Fabricant:Teleflex ARROW Etats-Unis  
Teleflex, le logo Teleflex et Arrow sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales immatriculées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document ne se substituent en aucun cas au mode d'emploi du produit. Les produits présentés dans ce document peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter le représentant de votre pays. Toutes les données sont à jour au moment de l'impression (07/2016). Susceptible de modifications techniques sans préavis.  
© 2016 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. 94 08 00 - 00 00 02 - REV A - 07 16 01.1

**Teleflex**

Distribué par : Siège social international de Teleflex, Irlande · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park  
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.int@teleflex.com  
France Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com  
Belgique Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com  
Suisse Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com