

Microcatéter SuperCross™


Excelente Capacidad de Cruce en Anatomía Tortuosa

Excelente Capacidad de Cruce en Casos Complicados

Los Microcatéteres SuperCross brindan ayuda para la anatomía tortuosa y en la navegación por vasos bifurcados.



45°

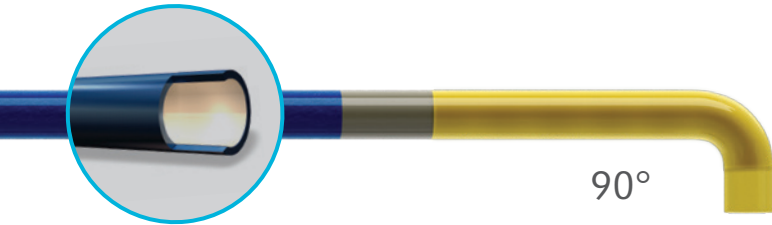


90°




PE de 90°

PE = Punta Extendida de 90°
para una Canulación Segura

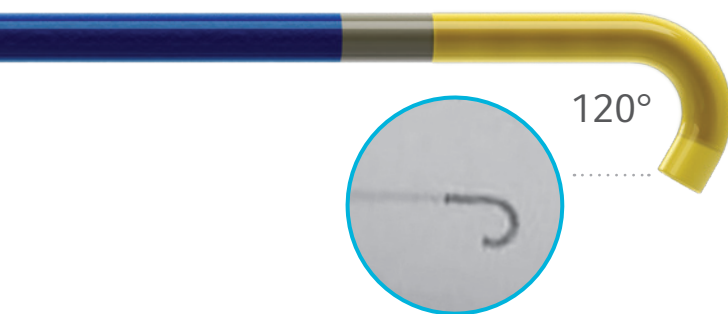

120°

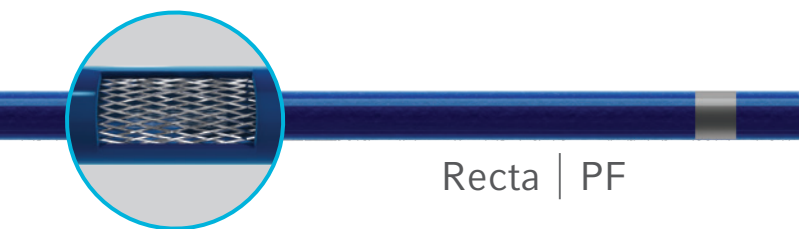

Recta | PF

Trenzado de Acero Inoxidable

Para tener flexibilidad, capacidad de empuje y resistencia a los pliegues

Catéteres de Punta en Ángulo

Fabricación del Cuerpo con Espiral Doble

Ofrece una excelente respuesta a la torsión, flexibilidad, capacidad de empuje y resistencia a los pliegues

Capa Interna de politetrafluoroetileno (PTFE, por sus siglas en inglés)

Permite un movimiento del alambre guía y una administración excepcionales

Revestimiento Hidrófilo en los 80 cm del Distal

Permite una rastreabilidad excepcional en curvas muy estrechas y anatomía tortuosa

Espiral con Recubrimiento de Tungsteno/Platino

Brinda una visibilidad mejorada en toda la punta en ángulo

Catéteres de Punta Flexible (PF)|Recta

Versión de Punta Recta

Punta más rígida para una administración más contenedora y con aumento de la capacidad de empuje para acceder a la anatomía compleja

Versión de Punta Flexible (PF)

Para una rastreabilidad mayor a través de la anatomía tortuosa


Información para Pedidos

Microcatéteres SuperCross™

El Microcatéter SuperCross™ está diseñado para utilizarse junto con alambres guía dirigibles para acceder a regiones discretas de la vasculatura coronaria o periférica. Se puede utilizar para facilitar la colocación y el intercambio de alambres guía y otros dispositivos intervencionistas y para infundir/administrar agentes de diagnóstico y terapéuticos de forma subselectiva.

MODELO	COMPATIBILIDAD DE ALAMBRE GUÍA	PUNTA DISTAL	LONGITUD DE TRABAJO	FABRICACIÓN DEL CUERPO	DISTAL D. E.	PROXIMAL D. E.	DISTAL D. I.	PROXIMAL D. I.	REVESTIMIENTO HIDRÓFILO
5302	0.014"	45°	130 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5303	0.014"	45°	150 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5304	0.014"	90°	130 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5305	0.014"	90°	150 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5306	0.014"	120°	130 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5307	0.014"	120°	150 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5308	0.014"	PE de 90°	130 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm
5309	0.014"	PE de 90°	150 cm	Espiral	2.4 Fr. 0.79 mm/0.031"	3.2 Fr. 1.07 mm/0.042"	0.017" (0.43 mm)	0.018" (0.46 mm)	Distal 80 cm

Empaquetado en cantidades de 1 unidad por caja.

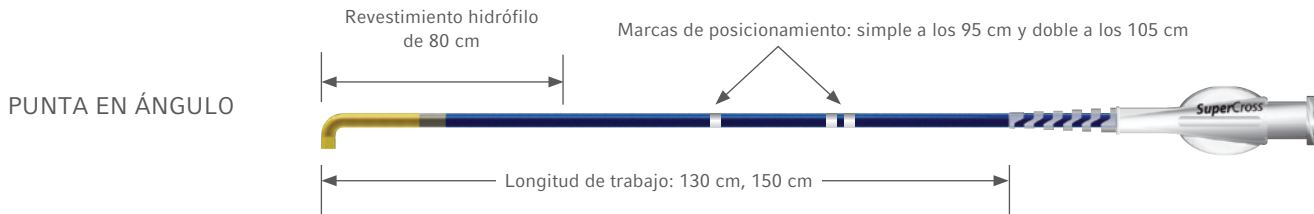


Microcatéteres SuperCross™ — Recto | PF

El Microcatéter SuperCross™ está diseñado para utilizarse junto con alambres guía dirigibles para acceder a regiones discretas de la vasculatura coronaria o periférica. Se puede utilizar para facilitar la colocación y el intercambio de alambres guía y otros dispositivos intervencionistas y para infundir/administrar agentes de diagnóstico y terapéuticos de forma subselectiva.

MODELO	COMPATIBILIDAD DE ALAMBRE GUÍA	PUNTA DISTAL	LONGITUD DE TRABAJO	FABRICACIÓN DEL CUERPO	DISTAL D. E.	PROXIMAL D. E.	DISTAL D. I.	PROXIMAL D. I.	REVESTIMIENTO HIDRÓFILO
5300	0.014"	Recto	130 cm	Trenzada	1.8 Fr. 0.61 mm/0.024"	2.5 Fr. 0.84 mm/0.033"	0.017" (0.43 mm)	0.021" (0.53 mm)	Distal 40 cm
5301	0.014"	Recta	150 cm	Trenzada	1.8 Fr. 0.61 mm/0.024"	2.5 Fr. 0.84 mm/0.033"	0.017" (0.43 mm)	0.021" (0.53 mm)	Distal 40 cm
5340	0.014"	PF	130 cm	Trenzada	1.8 Fr. 0.61 mm/0.024"	2.5 Fr. 0.84 mm/0.033"	0.017" (0.43 mm)	0.021" (0.53 mm)	Distal 40 cm
5341	0.014"	PF	150 cm	Trenzada	1.8 Fr. 0.61 mm/0.024"	2.5 Fr. 0.84 mm/0.033"	0.017" (0.43 mm)	0.021" (0.53 mm)	Distal 40 cm

Empaquetado en cantidades de 1 unidad por caja.

PF = Punta Flexible

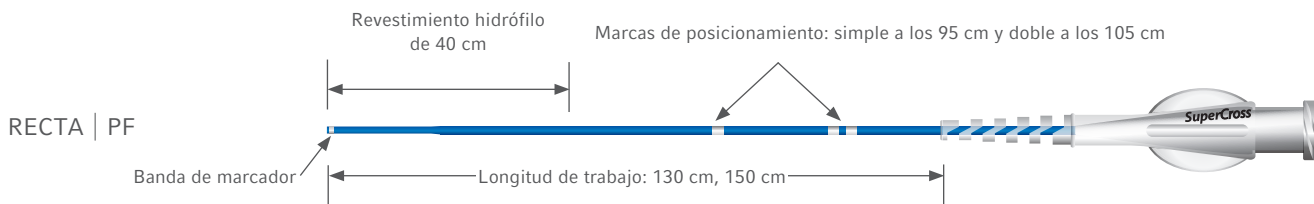

Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos –una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas no cubiertas– para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia sanitaria. Nuestra cartera es variada, con soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, servicios de urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información, visite teleflex.com.

Teleflex alberga a Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsçh® y Weck®: marcas de confianza unidas por un propósito en común.

Oficina Corporativa

Teléfono: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EE. UU.

Oficinas Regionales

Estados Unidos: Teléfono: +1 919 544 8000, Número gratuito: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Latinoamérica: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Internacional: Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

Alemania +49 (0)7151 406 0

Australia 1300 360 226

Austria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)800 387 9699

Corea +82 2 536 7550

China (Pekín) +86 (0)10 6418 5699

China (Shanghái) +86 (0)21 6163 0965

España +34 918 300 451

Francia +33 (0)5 62 18 79 40

Grecia +30 210 67 77 717

India +91 (0)44 2836 5040

Italia +39 0362 58911

Japón +81 (0)3 6632 3600

México +52 55 5002 3500

Nueva Zelanda 0800 601 100

Países Bajos +31 (0)88 00 215 00

Polonia +48 22 4624032

Portugal +351 22 541 90 85

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

República Checa +420 (0)495 759 111

República Eslovaca +421 (0)3377 254 28

Singapur (países de ventas no directas del Sudeste asiático) +65 6439 3000

Sudáfrica +27 (0)11 807 4887

Suiza +41 (0)31 818 40 90

Si precisa más información, visite teleflex.com.

Consulte las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

PRECAUCIÓN: Las leyes federales (de los Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, SuperCross, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsçh y Weck son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los Estados Unidos o en otros países.

La información incluida en este material no sustituye las instrucciones de uso del producto. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local. Revisado: 08/2018.

© 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-004795 LA ES