

SONDAS DE NITINOL

Beneficio triple mediante tecnología de capas



SEGURIDAD SUPERIOR

Todas nuestras sondas de nitinol, ya sea con un eje rígido o flexible, se proporcionan con una punta de seguridad que protege a la mucosa sensible del tracto urinario de lesiones e irritaciones.

La zona de transición entre el eje y la punta de seguridad flexible es especialmente suave para preservar el delicado tracto urinario o el canal de punción.

LA SONDA CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN

De acuerdo con el tipo de aplicación y de los dispositivos con el que se utilizará la sonda, puede elegir entre aquellos con un eje flexible o uno rígido, cada uno de ellos con longitudes y tamaños diferentes. Las sondas están disponibles ya sea con una punta de seguridad flexible angulada o derecha.

Para aplicaciones especiales, también proporcionamos sondas de nitinol rígido y flexible con una punta de punta de seguridad flexible angulada suave extra y más larga.

APLICACIÓN CÓMODA

Todas nuestras sondas de nitinol vienen con un dispensador con adaptador Luer-lock para una activación sencilla del recubrimiento hidrofílico, por medio de una jeringa Luer o Luer-lock.

Además, el dispensador cuenta con un introductor para facilitar la inserción de la punta de seguridad flexible de la sonda.



BENEFICIO TRIPLE MEDIANTE TECNOLOGÍA DE CAPAS



Con la marca Rusch,[®] Telflex proporciona productos de calidad reconocidos para casi todas las áreas de la urología: desde drenaje transuretral hasta la nefrostomía. Más de 100 años de conocimiento técnico en cada uno de nuestros productos. Con esta amplia experiencia, logramos los estándares más altos para hacer que nuestros productos sean los más seguros, sencillos y cómodos posibles para los pacientes, los médicos y el personal de salud.

Sin embargo, no estamos contentos con lo que hemos logrado. Nuestra búsqueda constante de la perfección a través de la investigación y el desarrollo continuos, además del uso de nuevas tecnologías ha dado lugar a productos médicos, cuya calidad establece nuevos estándares en todo el mundo.

Nuestro rango integral de sondas de nitinol de alta calidad con recubrimiento hidrofílico es conveniente para una amplia gama de aplicaciones urológicas, tales como la inspección de órganos tubulares huecos o la inserción de dispositivos médicos.

Las sondas se pueden colocar en el tracto urinario eferente, o se pueden utilizar en conexión con canales de punción suprapúbicos y percutáneos.



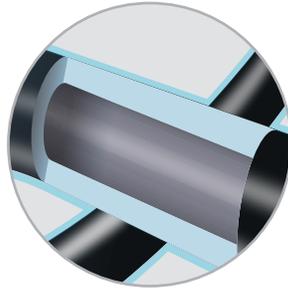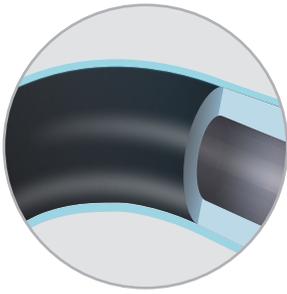

FUNDA NEGRA DE POLIURETANO

Hace que la sonda sea fácilmente visible en cuartos oscuros de endoscopia. El material altamente radiopaco permite el control de la posición mediante imágenes de rayos x.

NÚCLEO DE NITINOL


Hace que la sonda sea extremadamente resistente a torceduras y le otorga una alta estabilidad rotacional, permitiendo, consecuentemente, un manejo preciso durante el tratamiento.

RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO

Proporciona una hidratación rápida y homogénea y mejora significativamente las propiedades de deslizamiento. Esto facilita la aplicación, especialmente cuando se enfrenta con conductos angostos y obstruidos.


BENEFICIOS CLAVE

- Resistencia excelente a las torceduras y alta estabilidad rotacional
- Alta visibilidad en cuartos oscuros de endoscopia
- Alta radiopacidad
- Excelentes propiedades de deslizamiento
- Aplicación atraumática
- Amplia gama de sondas
- Cuenta con un dispensador con adaptador e introductor Luer-lock
- Estéril, de un solo uso
- Sin látex

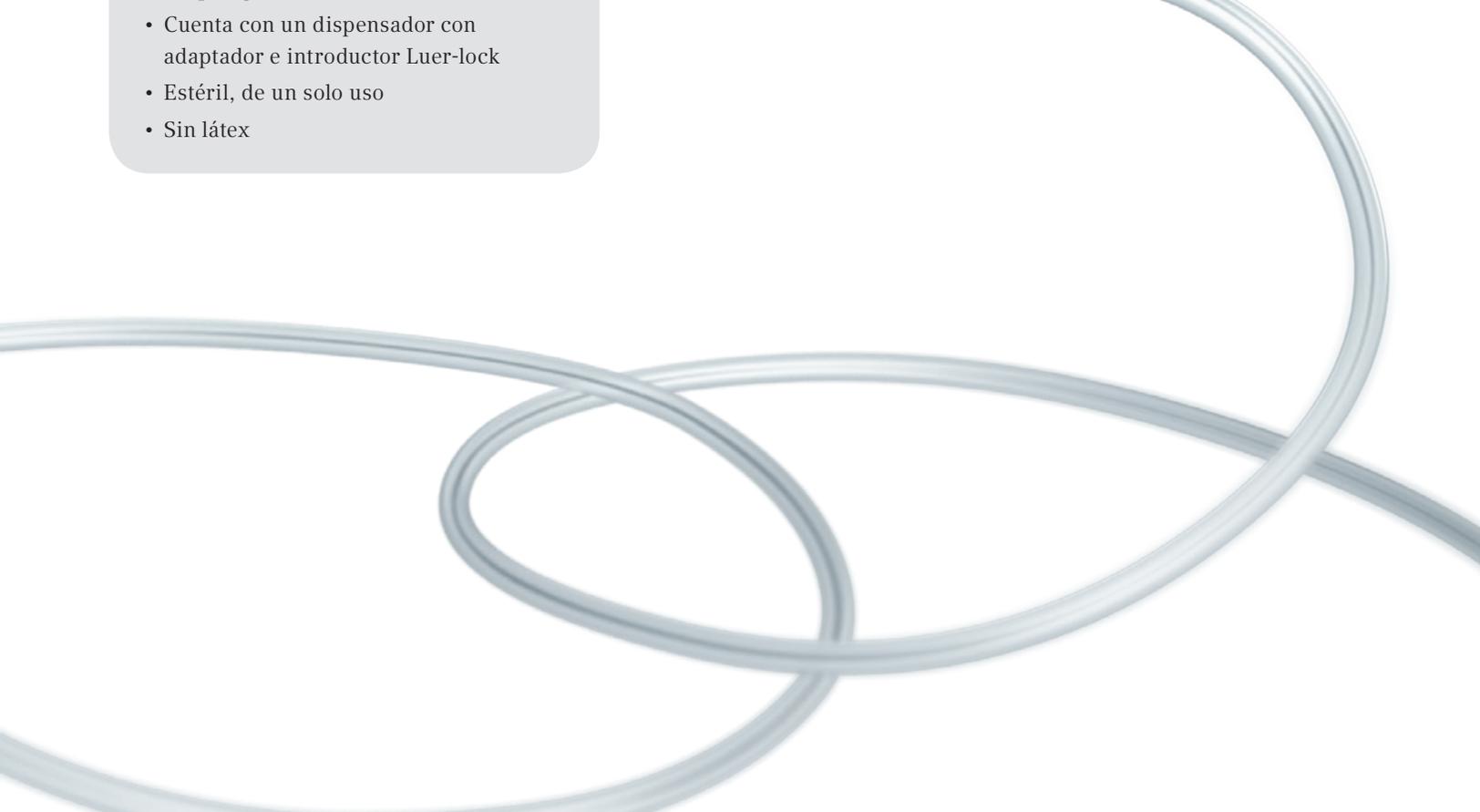



INFORMACIÓN DE PEDIDO

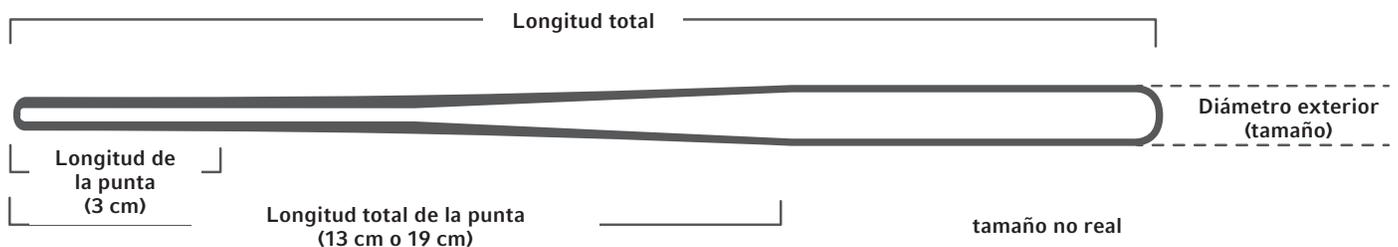

SONDAS DE NITINOL FLEXIBLES CON PUNTA ESTÁNDAR RECTA T (13 CM)

REF.	LONGITUD TOTAL	TAMAÑO (D.E.)	CANT.
680160150018GDS	150 cm	0,018"	5
680160150035GDS	150 cm	0,035"	5
680160150038GDS	150 cm	0,038"	5
680160180018GDS	180 cm	0,018"	5
680160180035GDS	180 cm	0,035"	5
680160180038GDS	180 cm	0,038"	5

SONDAS DE NITINOL RÍGIDAS CON PUNTA ESTÁNDAR RECTA (13 CM)

REF.	LONGITUD TOTAL	TAMAÑO (D.E.)	CANT.
680170150035GDS	150 cm	0,035"	5
680170150038GDS	150 cm	0,038"	5
680170180035GDS	180 cm	0,035"	5
680170180038GDS	180 cm	0,038"	5

SONDAS DE NITINOL FLEXIBLES CON PUNTA ESTÁNDAR ANGULADA (13 CM)

REF.	LONGITUD TOTAL	TAMAÑO (D.E.)	CANT.
680161150018GDS	150 cm	0,018"	5
680161150035GDS	150 cm	0,035"	5
680161150038GDS	150 cm	0,038"	5
680161180018GDS	180 cm	0,018"	5
680161180035GDS	180 cm	0,035"	5
680161180038GDS	180 cm	0,038"	5

SONDAS DE NITINOL RÍGIDAS CON PUNTA ESTÁNDAR ANGULADA (13 CM)

REF.	LONGITUD TOTAL	TAMAÑO (D.E.)	CANT.
680171150035GDS	150 cm	0,035"	5
680171150038GDS	150 cm	0,038"	5
680171180035GDS	180 cm	0,035"	5
680171180038GDS	180 cm	0,038"	5

SONDAS DE NITINOL FLEXIBLES CON PUNTA ANGULADA SUAVE (19 CM)

REF.	LONGITUD TOTAL	TAMAÑO (D.E.)	CANT.
680162150035GDS	150 cm	0,035"	5
680162150038GDS	150 cm	0,038"	5

SONDA DE NITINOL RÍGIDA CON PUNTA ANGULADA SUAVE (19 CM)

REF.	LONGITUD TOTAL	TAMAÑO (D.E.)	CANT.
680172150035GDS	150 cm	0,035"	5

Teleflex y Rusch son marcas comerciales de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, registradas en los Estados Unidos y otros países.

Teleflex es un proveedor global de productos médicos diseñados para que los prestadores de atención de la salud puedan ofrecer protección frente a las infecciones y mejorar la seguridad del paciente y el suministrador. La empresa se especializa en productos y servicios para el acceso vascular, las vías respiratorias, anestesia general y local, el cuidado cardíaco, urología y cirugía. Teleflex también proporciona productos especializados para los fabricantes de dispositivos.

© 2015 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. LA-MC-001067 ES



TELEFLEX LATIN AMERICA 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560 USA
For product information please contact la.cs@teleflex.com or +1.919.433.4999
TELEFLEX.COM