

FIOS GUIA DE NITINOL

Três benefícios da tecnologia de camada



SEGURANÇA SUPERIOR

Todos os nossos fios guia de nitinol, com um eixo flexível ou rígido, são fornecidos com uma ponta de segurança flexível, que protege a mucosa sensível do trato urinário de irritações ou lesões.

A zona de transição entre o eixo e a ponta de segurança flexível é especialmente lisa para preservar o trato urinário delicado ou o canal de punção.

O FIO GUIA CORRETO PARA CADA APLICAÇÃO

Dependendo do tipo de aplicação e dos dispositivos com os quais o fio guia será utilizado, é possível escolher entre aqueles com um eixo flexível ou rígido; cada um disponível em comprimentos e tamanhos diferentes. Os fios guia estão disponíveis com uma ponta de segurança reta ou angulada flexível.

Para aplicações especiais, também poderão ser fornecidos fios guia flexíveis e rígidos com uma ponta de segurança maior e mais levemente angulada e flexível.

APLICAÇÃO CONFORTÁVEL

Todos os nossos fios guia de nitinol vêm em um compartimento com adaptador Luer-lock de fácil ativação do revestimento hidrofílico por meio de uma seringa Luer ou Luer-lock.

Além disso, o compartimento contém um introdutor que facilita a inserção da ponta de segurança flexível do fio guia.



TRÊS BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA DE CAMADA


Sob o nome da marca Rusch®, a Teleflex oferece produtos de qualidade renomada para quase todas as áreas de urologia – de drenagem transuretral à nefrostomia. Mais de 100 anos de experiência refletem em cada um dos nossos produtos. Com essa vasta experiência, nós atingimos os mais altos padrões ao tornar os nossos produtos os mais seguros, simples e confortáveis possíveis para os pacientes, médicos e a equipe médica.

Entretanto, não estamos satisfeitos com o que atingimos. A nossa busca constante pela perfeição através de pesquisa contínua e de desenvolvimento somada ao uso de novas tecnologias resultou em produtos médicos com a qualidade que define novos padrões por todo o mundo.

Nossa vasta gama de fios guia de nitinol de alta qualidade, com revestimento hidrofílico, é adequada para uma série de aplicações urológicas, como a inspeção dos órgãos tubulares ocultos ou a inserção de dispositivos médicos.


Os fios guia podem ser colocados no trato urinário eferente ou usados na conexão dos canais de punção suprapúbica e percutânea.



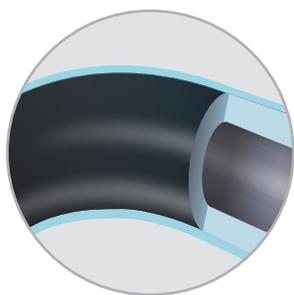


REVESTIMENTO DE POLIURETANO PRETO

Torna o fio guia mais visível em salas de endoscopia escuras. O material altamente radiopaco permite o controle da posição usando imagens de radiografia.

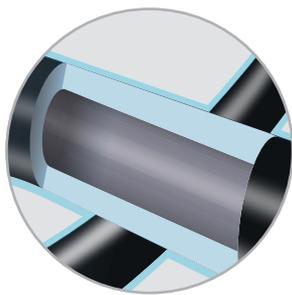

NÚCLEO DE NITINOL

Torna o fio guia extremamente resistente a dobras e fornece a ele uma alta estabilidade rotacional, permitindo, conseqüentemente, uma manipulação precisa durante o tratamento.

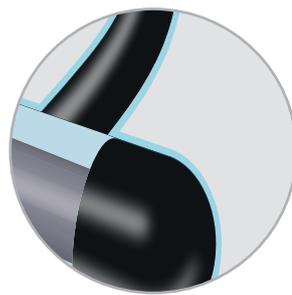



REVESTIMENTO HIDROFÍLICO

Fornece hidratação rápida e homogênea e melhora significativamente as propriedades de deslizamento. Isso facilita a aplicação, especialmente quando estiver perante passagens obstruídas e estreitas.


PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Excelente resistência a dobras e alta estabilidade rotacional
- Alta visibilidade em salas de endoscopia escuras
- Alta radiopacidade
- Excelentes propriedades de deslizamento
- Aplicação atraumática
- Ampla gama de fios guia
- Acompanha um compartimento com adaptador Luer-lock e introdutor
- Uso estéril e único
- Sem látex

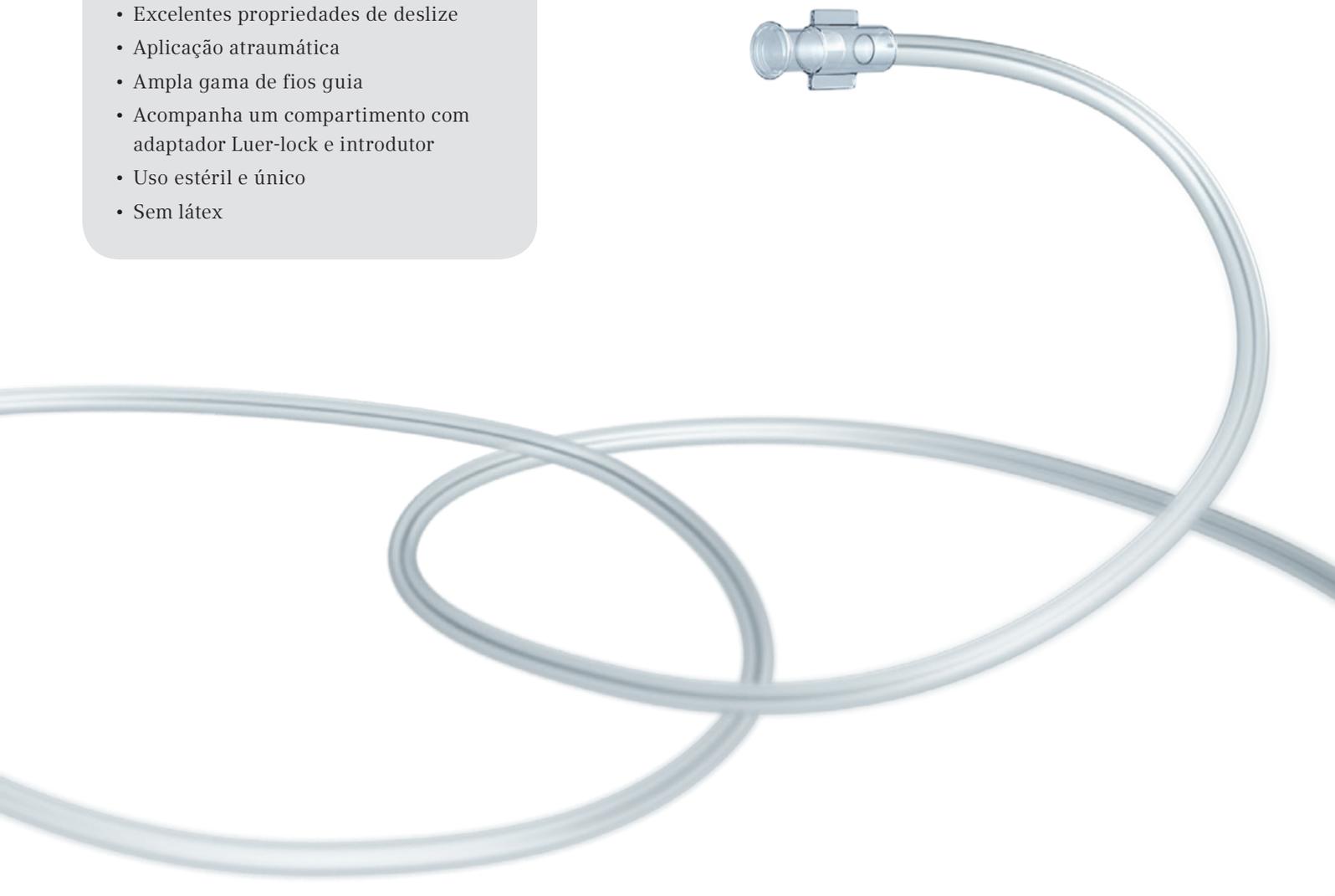

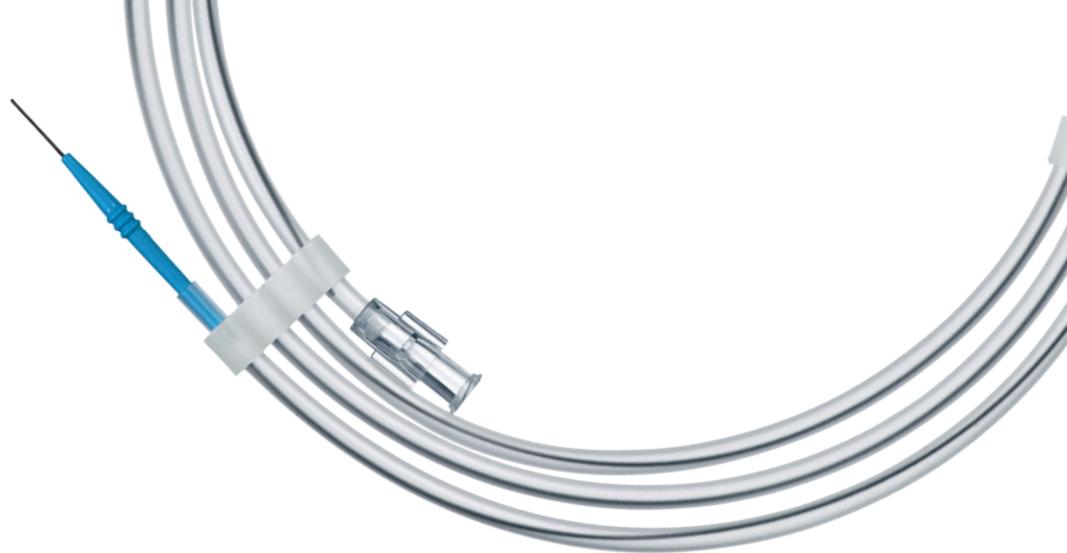

INFORMAÇÕES DE PEDIDO

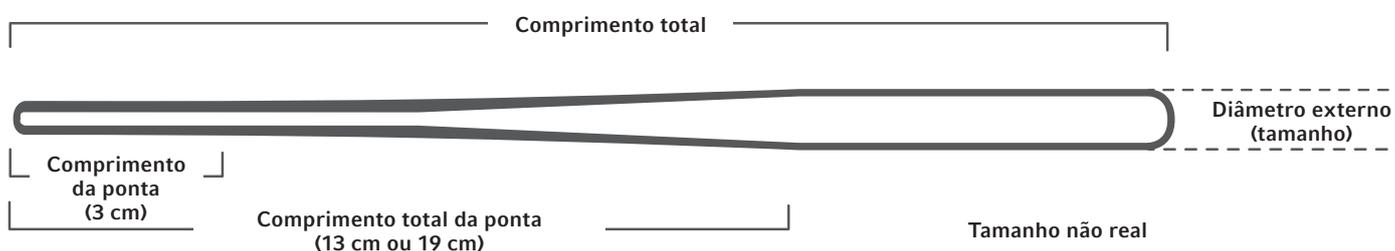

FIOS GUIA DE NITINOL FLEXÍVEIS COM PONTA PADRÃO RETA (13 CM)

REF.	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO (D.E.)	QUANT.
680160150018GDS	150 cm	0,018"	5
680160150035GDS	150 cm	0,035"	5
680160150038GDS	150 cm	0,038"	5
680160180018GDS	180 cm	0,018"	5
680160180035GDS	180 cm	0,035"	5
680160180038GDS	180 cm	0,038"	5

FIOS GUIA DE NITINOL RÍGIDOS COM PONTA PADRÃO RETA (13 CM)

REF.	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO (D.E.)	QUANT.
680170150035GDS	150 cm	0,035"	5
680170150038GDS	150 cm	0,038"	5
680170180035GDS	180 cm	0,035"	5
680170180038GDS	180 cm	0,038"	5

FIOS GUIA DE NITINOL FLEXÍVEIS COM PONTA PADRÃO ANGULADA (13 CM)

REF.	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO (D.E.)	QUANT.
680161150018GDS	150 cm	0,018"	5
680161150035GDS	150 cm	0,035"	5
680161150038GDS	150 cm	0,038"	5
680161180018GDS	180 cm	0,018"	5
680161180035GDS	180 cm	0,035"	5
680161180038GDS	180 cm	0,038"	5

FIOS GUIA DE NITINOL RÍGIDOS COM PONTA PADRÃO ANGULADA (13 CM)

REF.	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO (D.E.)	QUANT.
680171150035GDS	150 cm	0,035"	5
680171150038GDS	150 cm	0,038"	5
680171180035GDS	180 cm	0,035"	5
680171180038GDS	180 cm	0,038"	5

FIOS GUIA DE NITINOL FLEXÍVEIS COM PONTA LEVEMENTE ANGULADA (19 CM)

REF.	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO (D.E.)	QUANT.
680162150035GDS	150 cm	0,035"	5
680162150038GDS	150 cm	0,038"	5

FIOS GUIA DE NITINOL RÍGIDOS COM PONTA LEVEMENTE ANGULADA (19 CM)

REF.	COMPRIMENTO TOTAL	TAMANHO (D.E.)	QUANT.
680172150035GDS	150 cm	0,035"	5

Teleflex e Rusch são marcas comerciais da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas registradas nos EUA e/ou em outros países.

A Teleflex é uma fornecedora global de produtos médicos projetados para permitir que os profissionais da saúde protejam contra infecções e aumentem a segurança do paciente e do profissional. A empresa é especializada em produtos e serviços para acesso vascular, anestesia respiratória, geral e local, procedimentos cardíacos, urologia e cirurgia. A Teleflex também fornece produtos especializados para fabricantes de dispositivos.

© 2015 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. LA-MC-001067 PT



TELEFLEX LATIN AMERICA 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560 USA
For product information please contact la.cs@teleflex.com or +1.919.433.4999
TELEFLEX.COM