
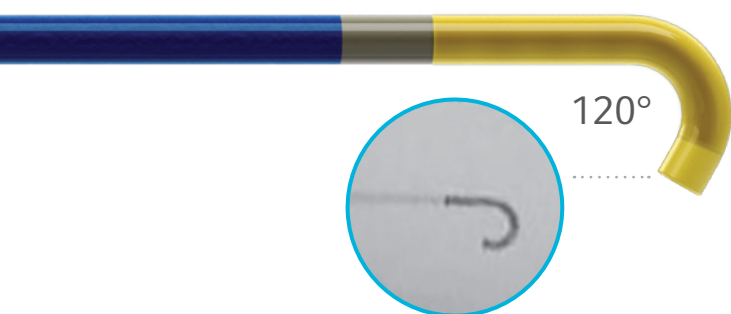
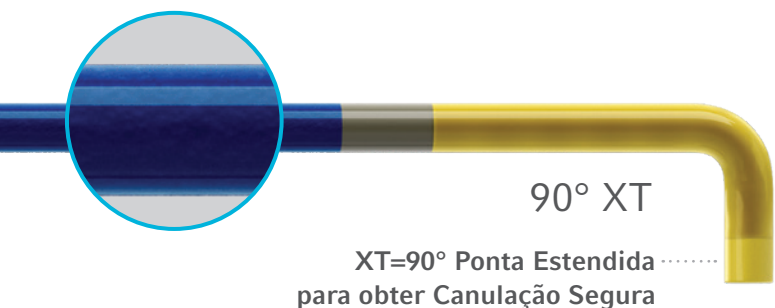


Microcateteres SuperCross™

Progride em Alta Qualidade em Anatomias Tortuosas

Progride em Alta Qualidade em Casos Desafiadores

Os Microcateteres SuperCross fornecem suporte em anatomias tortuosas e na navegação de vasos bifurcados.

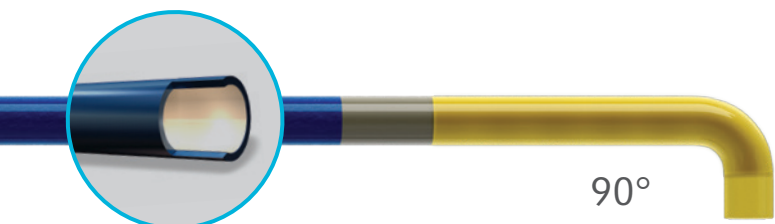

Fio de Aço Inoxidável Trançado
Para obter maior flexibilidade, capacidade de expansão e resistência à dobra

Cateteres de Ponta Angulada

Estrutura de Eixo de Mola Dupla

Fornecer excelente resposta de torque, flexibilidade, capacidade de expansão e resistência à dobra

Camada Interna de PTFE

Proporciona um movimento e resultado excepcional do fio-guia

Revestimento Hidrofílico na Distal de 80 cm

Permite uma rastreabilidade única em curvas estreitas e anatomias tortuosas

Mola Embutida de Platina/Tungstênio

Fornecer uma melhor visibilidade ao longo de toda a ponta angulada

Reto | Cateteres de Ponta Flexível (FT)

Versão de Ponta Reta

Ponta mais rígida para obter resultado mais favorável e aumento na capacidade de expansão para acessar anatomias complexas

Versão de Ponta Flexível (FT)

Para obter aumento na rastreabilidade em anatomias tortuosas


Informações Sobre Pedidos

Microcateteres SuperCross™

Os Microcateteres SuperCross™ são destinados ao uso com fio guia direcionáveis para acessar regiões distintas da vasculatura coronária e/ou periférica. Podem ser usados para facilitar a colocação e a troca de fio guia e de outros dispositivos intervencionais, além de infundir/fornecer diagnósticos e agentes terapêuticos subseletivamente.

MODELO	COMPATIBILIDADE COM FIO GUIA	PONTA DISTAL	COMPRIMENTO OPERACIONAL	ESTRUTURA DO EIXO	DISTAL D.E.	PROXIMAL D.E.	DISTAL D.I.	PROXIMAL D.I.	REVESTIMENTO HIDROFÍLICO
5302	0,014 POL.	45°	130 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5303	0,014 POL.	45°	150 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5304	0,014 POL.	90°	130 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5305	0,014 POL.	90°	150 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5306	0,014 POL.	120°	130 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5307	0,014 POL.	120°	150 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5308	0,014 POL.	90° XT	130 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm
5309	0,014 POL.	90° XT	150 cm	Mola	2.4 Fr. 0,79 mm/0,031 pol.	3.2 Fr. 1,07 mm/0,042 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,018 pol. (0,46 mm)	Distal 80 cm

Embalados em quantidade de 1 unidade por caixa.

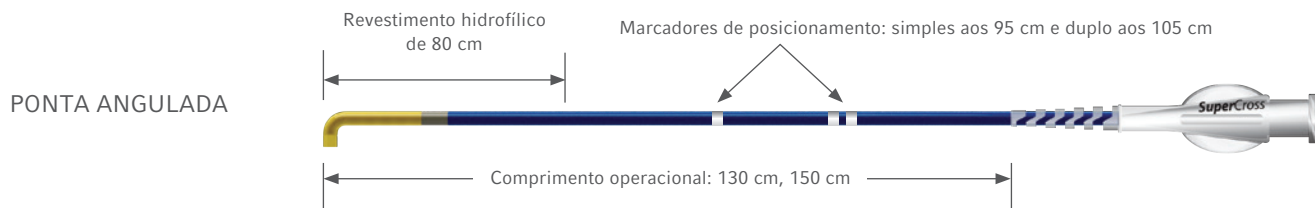


Microcateteres SuperCross™ – Reto | FT

Os Microcateteres SuperCross™ são destinados ao uso com fio guia direcionáveis para acessar regiões distintas da vasculatura coronária e/ou periférica. Podem ser usados para facilitar a colocação e a troca de fio guia e de outros dispositivos intervencionais, além de infundir/fornecer diagnósticos e agentes terapêuticos subseletivamente.

MODELO	COMPATIBILIDADE COM FIO GUIA	PONTA DISTAL	COMPRIMENTO OPERACIONAL	ESTRUTURA DO EIXO	DISTAL D.E.	PROXIMAL D.E.	DISTAL D.I.	PROXIMAL D.I.	REVESTIMENTO HIDROFÍLICO
5300	0,014 POL.	Reto	130 cm	Trançado	1.8 Fr. 0,61 mm/0,024 pol.	2.5 Fr. 0,84 mm/0,033 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,021 pol. (0,53 mm)	Distal 40 cm
5301	0,014 POL.	Reto	150 cm	Trançado	1.8 Fr. 0,61 mm/0,024 pol.	2.5 Fr. 0,84 mm/0,033 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,021 pol. (0,53 mm)	Distal 40 cm
5340	0,014 POL.	FT	130 cm	Trançado	1.8 Fr. 0,61 mm/0,024 pol.	2.5 Fr. 0,84 mm/0,033 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,021 pol. (0,53 mm)	Distal 40 cm
5341	0,014 POL.	FT	150 cm	Trançado	1.8 Fr. 0,61 mm/0,024 pol.	2.5 Fr. 0,84 mm/0,033 pol.	0,017 pol. (0,43 mm)	0,021 pol. (0,53 mm)	Distal 40 cm

Embalados em quantidade de 1 unidade por caixa.

FT= Ponta Flexível

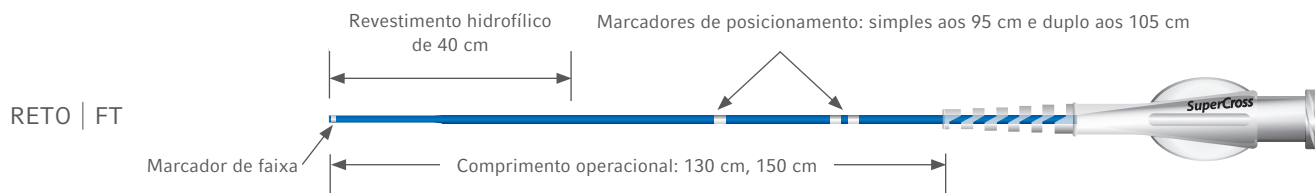

A Teleflex é um fornecedor global de tecnologias médicas desenvolvidas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nossa proposta é direcionada para a inovação — uma busca incansável pela identificação das necessidades clínicas não atendidas — para beneficiar pacientes e profissionais da saúde. Nosso portfólio é diversificado, com soluções em acesso vascular e intervencional, cirurgia, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo compartilham a visão de que o que nós fazemos todos os dias faz a diferença. Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

A Teleflex é proprietária da Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsche® e Weck® – marcas confiáveis unidas por um objetivo em comum.

Escritório Corporativo

Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA

Escritórios Regionais

Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, ligação gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

Internacional: Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

África do Sul +27 (0)11 807 4887

Alemanha +49 (0)7151 406 0

Austrália 1300 360 226

Áustria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)800 387 9699

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

China (Xangai) +86 (0)21 6163 0965

Coreia +82 2 536 7550

Espanha +34 918 300 451

França +33 (0)5 62 18 79 40

Grécia +30 210 67 77 717

Índia +91 (0)44 2836 5040

Itália +39 0362 58911

Japão +81 (0)3 6632 3600

México +52 55 5002 3500

Nova Zelândia 0800 601 100

Países Baixos +31 (0)88 00 215 00

Polônia +48 22 4624032

Portugal +351 22 541 90 85

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

República Eslovaca +421 (0)3377 254 28

República Tcheca +420 (0)495 759 111

Singapura (venda indireta para outros países do Sudoeste Asiático) +65 6439 3000

Suíça +41 (0)31 818 40 90

Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

Veja as Instruções de Uso para ter uma lista completa de indicações, contraindicações, avisos e precauções.

PRECAUÇÕES: As leis federais dos EUA restringem a venda desse dispositivo de modo que apenas um médico possa vendê-lo ou solicitar sua venda.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, SuperCross, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsche e Weck são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países.

As informações contidas neste documento não substituem as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Revisado em: 08/2018.

© 2018 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-004795 LA PT