



Navegue por Intervenções
Complexas Constantemente

Continue Seguindo em Frente

O portfólio dos Cateteres Turnpike® coloca o poder em suas mãos. Navegue por uma anatomia tortuosa com agilidade e precisão.

Não importa o desafio, os Cateteres Turnpike são desenvolvidos para ajudar a simplificar a jornada.



*“Os Cateteres Turnpike® têm uma vasta gama de utilidades. Eles me deram a confiança para lidar com uma ampla variedade de lesões de alta complexidade.”**

Dr. Jon Robken
Cardiovascular Medicine, P.C.



*Esta declaração reflete a opinião e experiência pessoal do médico.

Combinação Ideal de Flexibilidade e Resposta de Torque

Os Cateteres Turnpike® apresentam uma construção única da haste em cinco camadas, que fornece flexibilidade, torque e rastreamento sobre um fio-guia de 0,014 pol. em intervenções coronarianas complexas

Barreiras a Serem Quebradas

- + Lesões complexas
- + Tortuosidade extrema
- + Suporte ao fio-guia



Movimento Aprimorado do Fio-guia

Um PTFE interno que abrange todo o cateter para assegurar uma interação suave do fio-guia ao longo do caso

Responsivo e Resistente a Dobras

Espirais de dupla camada e mais uma camada trançada para uma combinação ideal de flexibilidade e resposta de torque

Fornecimento Excepcional

Uma camada externa em polímero, combinada com um revestimento hidrofílico de 60 cm na distal, oferece uma excelente lubrificação para o fornecimento

Turnpike® LP

Duas espirais de rosqueamento por baixo de uma espiral de 21 cm da ponta distal para perfil mais baixo e maior flexibilidade na ponta e na haste distal.

Turnpike[®]
catheter


Versão padrão, ponta flexível

Um dispositivo robusto anterógrado, assim como um dispositivo de ampliação retrógrada, para aumentar a potência de torque e suporte ao fio-guia¹ em septais colaterais resistentes




Resposta de Torque Bidirecional Superior*

Teste de Torque em Sentido Horário

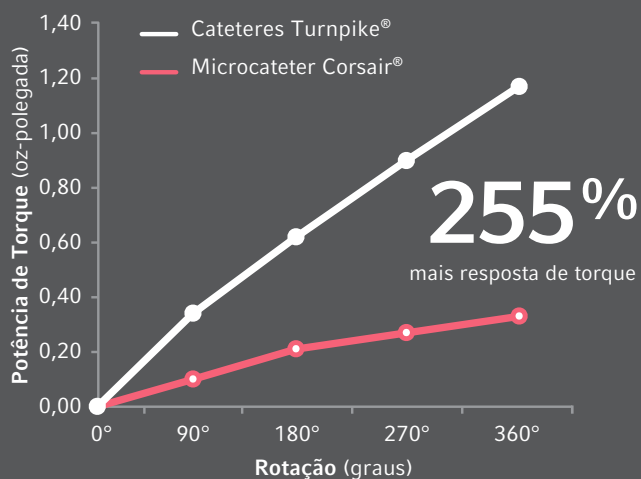

Teste de Torque em Sentido Anti-horário

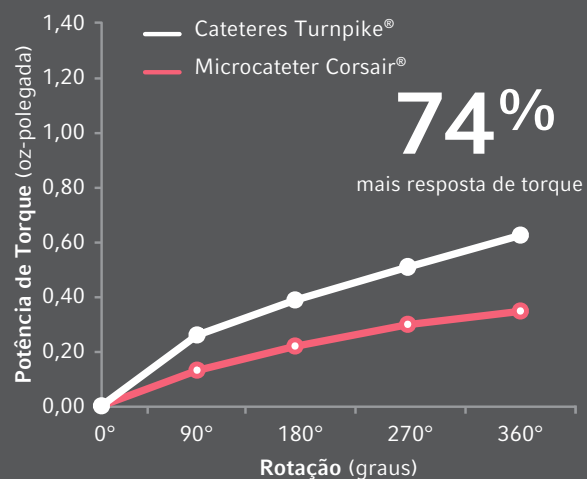


*Todos os valores são baseados em médias de testes de bancos de dados, n=3, realizados pela Teleflex. Os resultados dos testes de bancos de dados não são necessariamente um reflexo do desempenho clínico. Dados no arquivo.

Informações Sobre Pedidos

MODELO	VERSÃO	COMPRIMENTO ÚTIL	HASTE PROXIMAL D.E.	HASTE DISTAL D.E.	PONTA DISTAL D.E.	DIÂMETRO DO FIO-GUIA COMPATÍVEL	TAMANHO DO CATETER-GUIA COMPATÍVEL
5642	Turnpike	135 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,6 Fr. 0,86 mm/0,034 pol.	1,6 Fr. 0,53 mm/0,021 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.
5643	Turnpike	150 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,6 Fr. 0,86 mm/0,034 pol.	1,6 Fr. 0,53 mm/0,021 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.


Embalados em quantidades de 1 unidade por caixa.

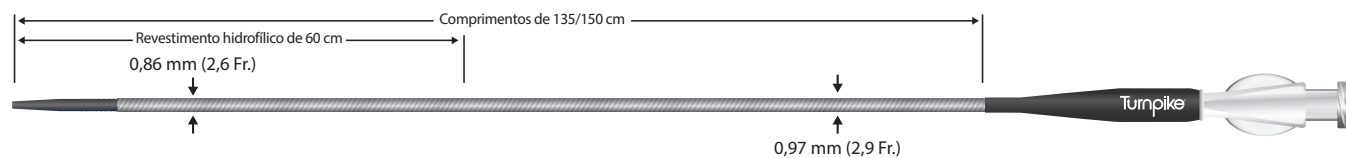


Turnpike[®] Spiral catheter

Haste espiral, ponta flexível

Dispositivo da linha de frente para intervenções anterógradas complexas

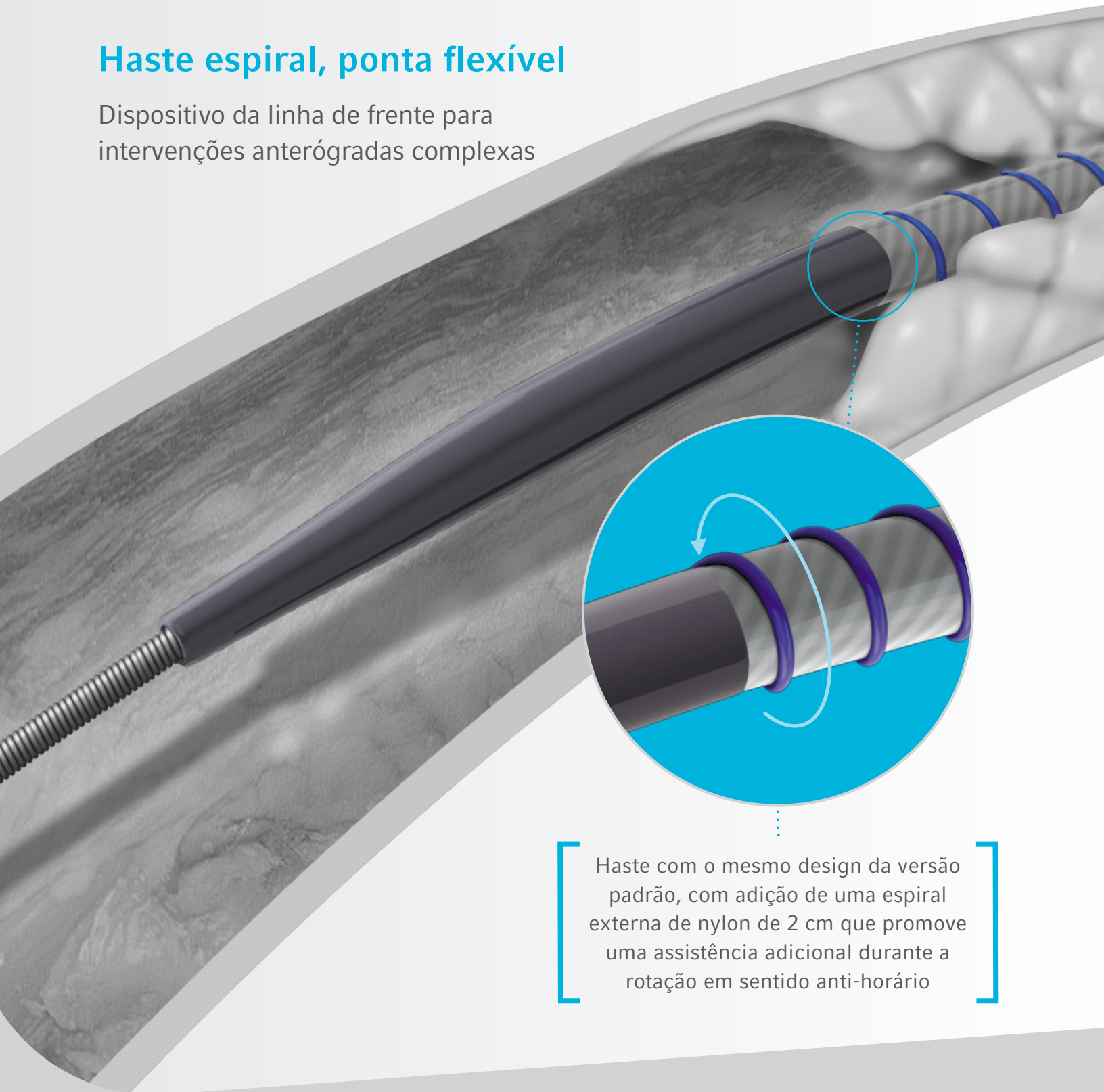


Haste com o mesmo design da versão padrão, com adição de uma espiral externa de nylon de 2 cm que promove uma assistência adicional durante a rotação em sentido anti-horário

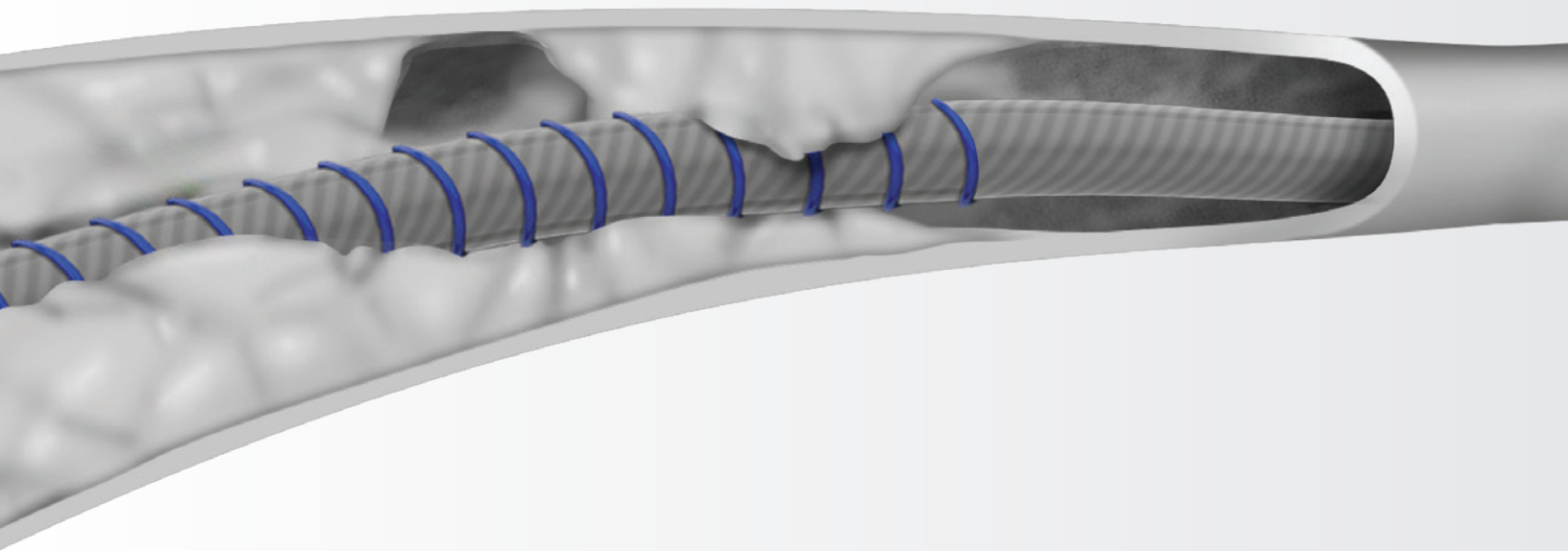

Informações Sobre Pedidos

MODELO	VERSÃO	COMPRIMENTO ÚTIL	HASTE PROXIMAL D.E.	HASTE DISTAL D.E.	PONTA DISTAL D.E.	DIÂMETRO DO FIO-GUIA COMPATÍVEL	TAMANHO DO CATETER-GUIA COMPATÍVEL
5640	Turnpike Spiral	135 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	1,6 Fr. 0,53 mm/0,021 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.
5641	Turnpike Spiral	150 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	1,6 Fr. 0,53 mm/0,021 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.

Embalados em quantidades de 1 unidade por caixa.

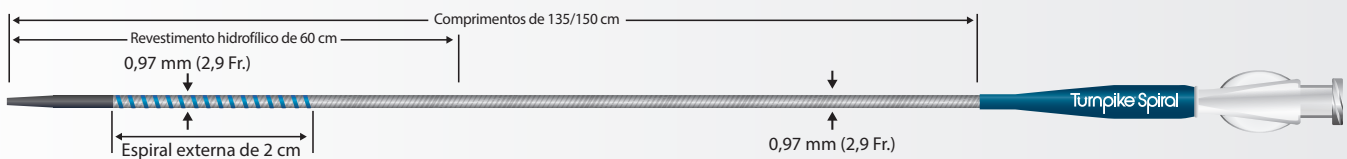


Turnpike® Gold
catheter

Haste em espiral, ponta metálica rosqueada

Dispositivo de ampliação anterógrada
para lesões resistentes




Roscas banhadas a ouro na ponta distal
fornecem avanços rotacionais de ponta
com visibilidade sob fluoroscopia

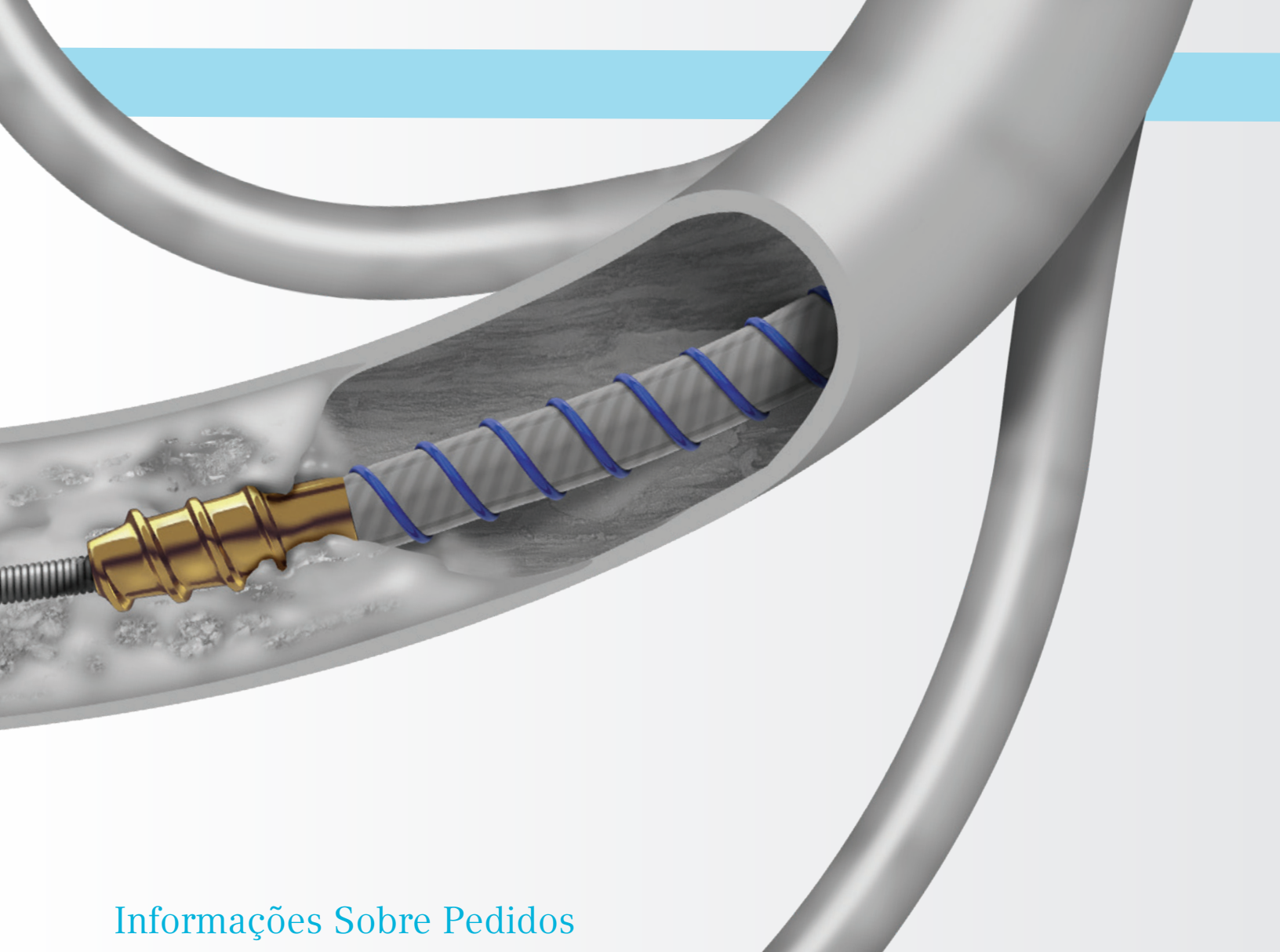

Informações Sobre Pedidos

MODELO	VERSÃO	COMPRIMENTO ÚTIL	HASTE PROXIMAL D.E.	HASTE DISTAL D.E.	PONTA DISTAL D.E.	DIÂMETRO DO FIO-GUIA COMPATÍVEL	TAMANHO DO CATETER-GUIA COMPATÍVEL
5621	Turnpike Gold	135 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,1 Fr. 0,71 mm/0,028 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.
5622	Turnpike Gold	150 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,1 Fr. 0,71 mm/0,028 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.

Embalados em quantidades de 1 unidade por caixa.

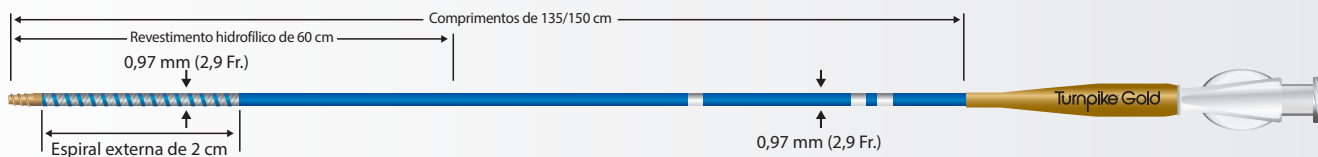


RETRÓGRADO

Turnpike[®] LP
catheter

Haste de baixo perfil, ponta flexível

Dispositivo da linha
de frente para
intervenções retrógradas

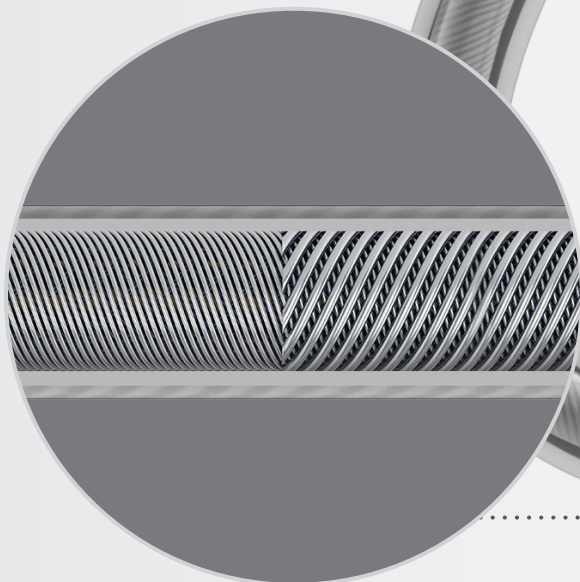

Flexibilidade da
Haste Distal


79,4%
mais flexível¹

Flexibilidade da Ponta


85,7%
mais flexível¹

[De uma a duas espirais de transição de
21 cm da ponta distal para perfil mais
baixo e maior flexibilidade na ponta e
na haste distal]

Os Cateteres Turnpike® LP oferecem uma capacidade de torque impressionante com um perfil de cruzamento menor que o do Microcateter Corsair®

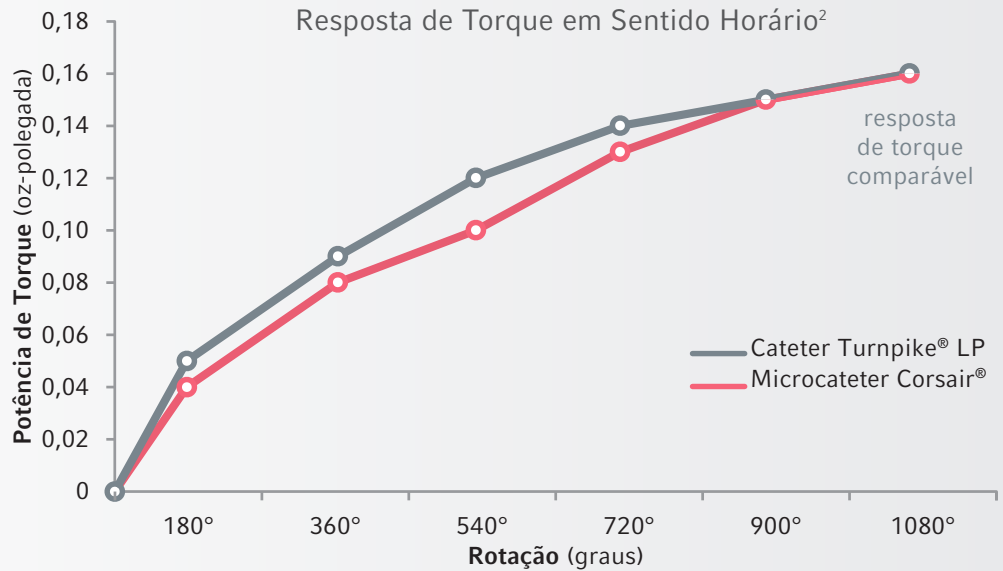

Microcateteres com poder de Torque

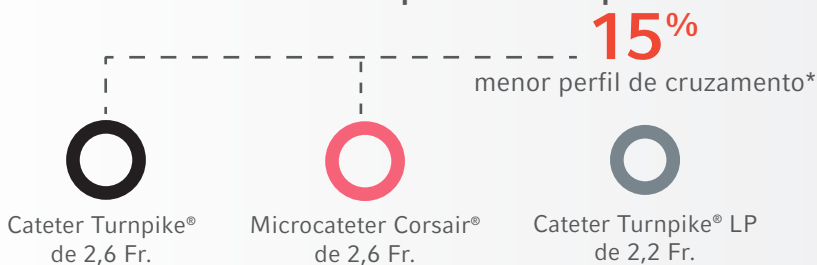

Microcateteres sem poder de Torque




*Com base em valores de diâmetro declarados em sites concorrentes no momento desta publicação.

Informações Sobre Pedidos

MODELO	VERSÃO	COMPRIMENTO ÚTIL	HASTE PROXIMAL D.E.	HASTE DISTAL D.E.	PONTA DISTAL D.E.	DIÂMETRO DO FIO-GUIA COMPATÍVEL	TAMANHO DO CATETER-GUIA COMPATÍVEL
5638	Turnpike LP	135 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,2 Fr. 0,74 mm/0,029 pol.	1,6 Fr. 0,53 mm/0,021 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.
5639	Turnpike LP	150 cm	2,9 Fr. 0,97 mm/0,038 pol.	2,2 Fr. 0,74 mm/0,029 pol.	1,6 Fr. 0,53 mm/0,021 pol.	≤ 0,014 pol. (0,36 mm)	≥ 5 Fr. ≥ 1,42 mm/0,056 pol. D.I.

Embalados em quantidades de 1 unidade por caixa.

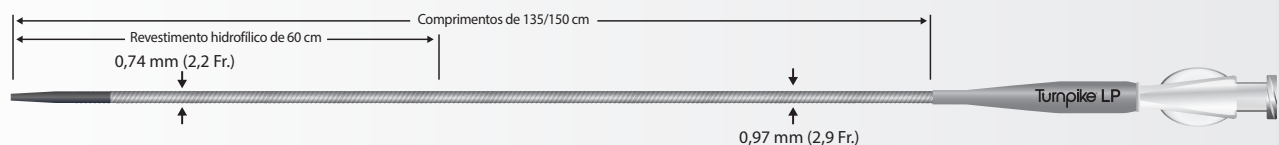

1 Todos os valores são baseados em médias de testes de bancos de dados, comparados ao Cateter Turnpike padrão, n=15, realizados pela Teleflex. Os resultados dos testes de bancos de dados não são necessariamente um reflexo do desempenho clínico. Dados no arquivo.

2 Todos os valores são baseados em médias de testes de bancos de dados, n=2, realizados pela Teleflex. Os resultados dos testes de bancos de dados não são necessariamente um reflexo do desempenho clínico. Dados no arquivo.

Cateteres Turnpike®

Os Cateteres Turnpike® foram desenvolvidos para serem usados no acesso a regiões distintas do sistema vascular coronariano e/ou periférico. Eles podem ser usados para facilitar a colocação e a troca dos fios-guia, além de subseletivamente realizar a infusão/entrega de diagnósticos e agentes terapêuticos.

Os Cateteres Turnpike® Spiral e Turnpike® Gold são contraindicados para uso em vasos com um diâmetro eficaz menor que 1 mm.

A Teleflex é um fornecedor global de tecnologias médicas projetadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nossa proposta é direcionada para a inovação — uma busca incansável pela identificação das necessidades clínicas não atendidas — para beneficiar pacientes e profissionais da saúde. Nosso portfólio é diversificado, com soluções em acesso vascular e intervencional, produtos cirúrgicos, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo compartilham a visão de que o que nós fazemos todos os dias faz a diferença. Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

A Teleflex é proprietária da Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsç® e Weck® — marcas confiáveis unidas por um objetivo em comum.

Escritório Corporativo

Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA

Escritórios Regionais

Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, ligação gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

Internacional: Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

África do Sul +27 (0)11 807 4887

Alemanha +49 (0)7151 406 0

Austrália 1300 360 226

Áustria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)800 387 9699

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

China (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

Coreia +82 2 536 7550

Espanha +34 918 300 451

França +33 (0)5 62 18 79 40

Grécia +30 210 67 77 717

Índia +91 (0)44 2836 5040

Itália +39 0362 58911

Japão +81 (0)3 6632 3600

México +52 55 5002 3500

Nova Zelândia 0800 601 100

Países Baixos +31 (0)88 00 215 00

Polônia +48 22 4624032

Portugal +351 22 541 90 85

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

República Eslovaca +421 (0)3377 254 28

República Tcheca +420 (0)495 759 111

Singapura (venda indireta para outros países do Sudeste Asiático) +65 6439 3000

Suíça +41 (0)31 818 40 90

Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

Leia as Instruções de Uso para uma lista completa de indicações, contraindicações, avisos e precauções. CUIDADO: as leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a médicos ou com solicitação médica.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Turnpike, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsç e Weck são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

As informações contidas neste documento não são um substituto para as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Revisado em: 10/2018.

© 2018 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados MC-005030 LA EN